



各部のなまえとその使い方

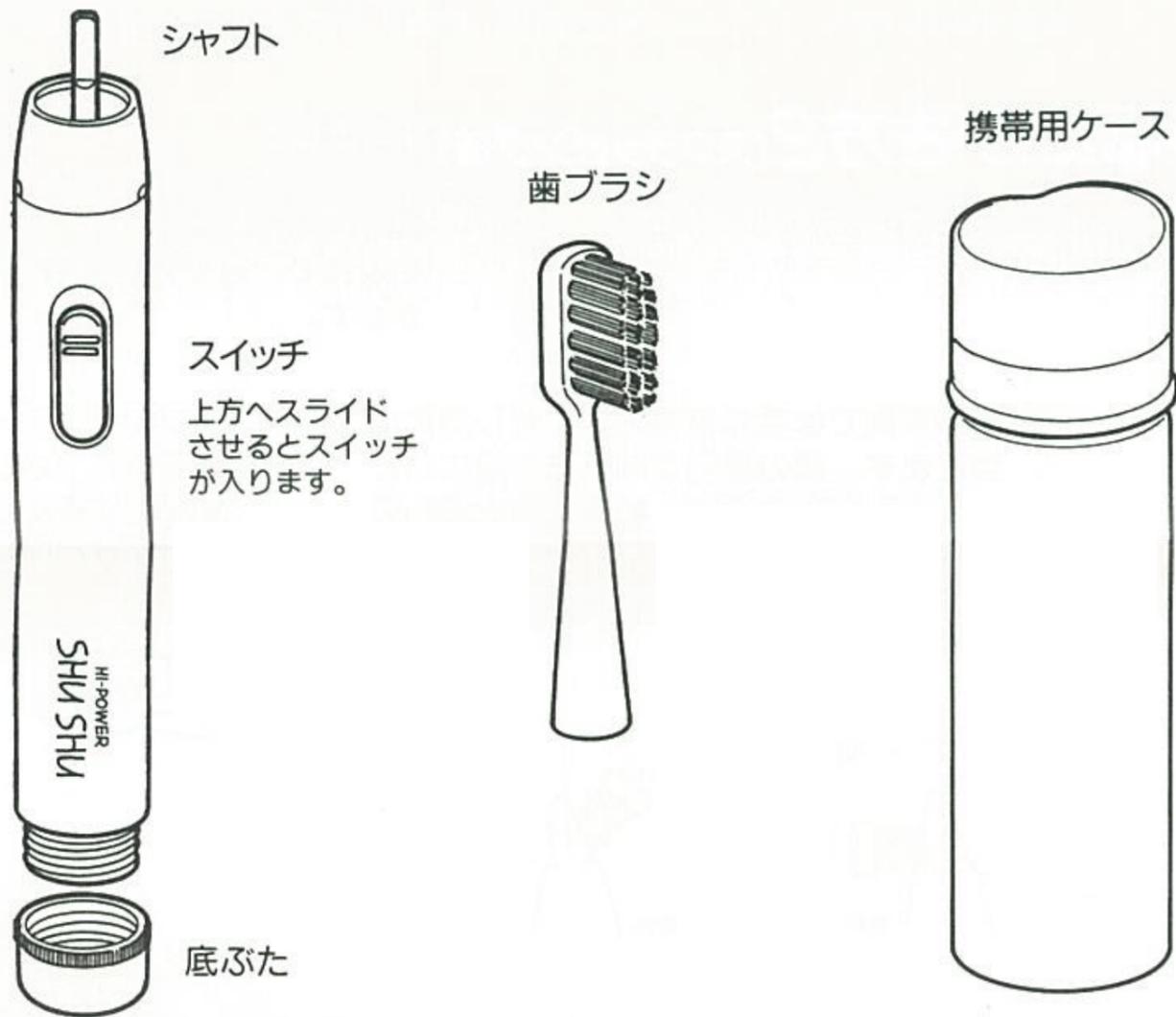

乾電池の入れ方

- 1 底ぶたを左に回してはずし、乾電池の⊕
⊖に注意して入れてください。

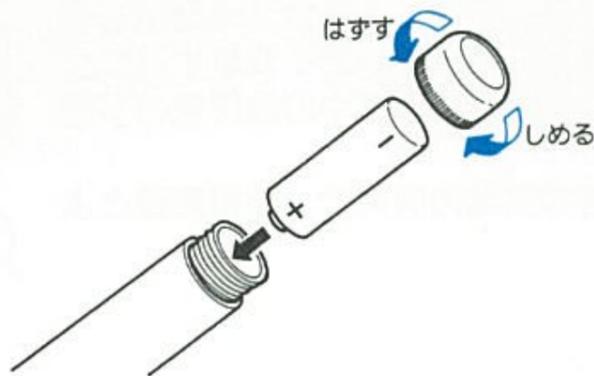


- 2 底ぶたを右に回して最後まで確実にしめ
てください。

底ぶたが確実にしまっていない場合は、水が内部に入り故障の原因となります。

- ☆乾電池をお取替えのときは、本体の水気をよく拭き取って、水滴が中に入らないようにご注意ください。
- ☆乾電池は別売りです。
単3形アルカリ乾電池をご使用の場合、1回2分お使いになるとして約35回使えます。
- ☆1ヵ月以上使わないときは、乾電池を取出しておいてください。

歯ブラシの使い方


- 1 歯ブラシを下図のよう
に、シャフトに差し込
んでください。
●本体のスイッチ側に歯ブ
ラシ毛先を向けて差し込
んでください。

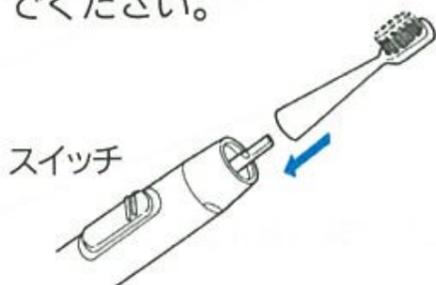

- 2 「歯みがき」をつけ、必
ず歯ブラシを口の中
に入れてからスイッチを入
れてください。
●使用するときには下図の点
線部より下を持って磨いて
ください。



- 3 ご使用後、歯ブラシと
本体を洗ってください。
●本体、歯ブラシの水分を
よく拭き取ってから、携帯
用ケースへ収納してくださ
い。

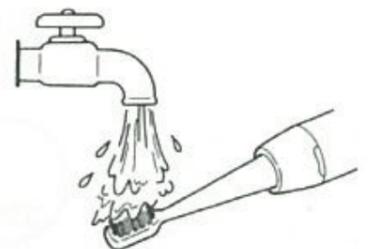

特にご注意いただきたいこと

- 歯や歯ぐきの病気にかかっている方や、歯の治療を受けておられる方。医師に相談の上ご使用ください。




- お子様の使用について。正しい使い方を教えてあげてください。



- 水中に放置しないでください。故障の原因になります。



- 本体に強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。

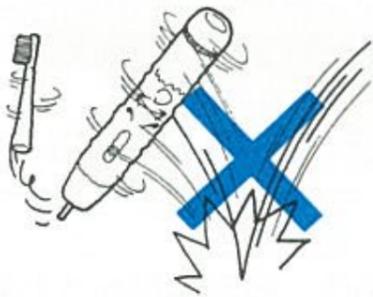

- 水洗いは水道水かぬるま湯をご使用ください。海水、熱湯は使わないでください。



- 発熱体の近くに放置しないでください。故障の原因となります。



- 本体を分解したり内部にふれたりしないでください。故障の原因となります。




上手なみがき方1(バス法)

歯と歯肉の境目(歯肉縁部)の歯垢を取り除くのに適した磨き方であり、同時に歯周病*の予防に効果的です。
*歯周病…歯を支えているその周囲の組織の病気で歯槽膿漏とよく言われている。

振幅 3 mm の前後振動で歯垢を除去。当て方により理想のバス磨きができます。


- 1 ブラシの毛先を歯と歯ぐきの境目に45度の角度で当て磨いてください。

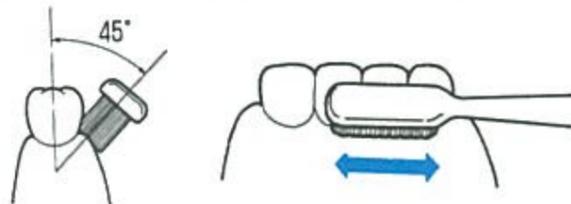

- 2 歯ブラシを2~3歯ずつに当てて磨くようにしてください。



- 3 上の歯と下の歯は別々に磨いてください。

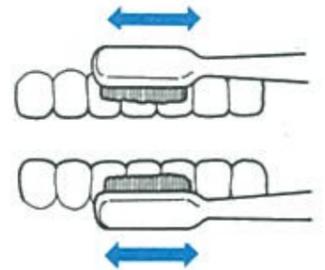

- 4 歯の裏側、かみ合わせ面もていねいに磨いてください。




歯ブラシの毛先が広がると、交換の時期です。新しいブラシをお買い求めください。
*必ずハイパワーシュッシュ用と指定して購入するようにお願い申し上げます。

上手なみがき方2(スクラッピング法)


歯の表面や、歯と歯の間の歯垢の除去率が高い磨き方です。いろいろな方向から角度をもたせて磨けば、この方法だけでもほぼ完全に歯垢が取れます。スイッチを入れて、当て方を工夫するとスクラッピング法ができます。

1 歯の表側では毛先を歯の面に対し直角に当てます。歯の裏側では毛先を歯に対し45°に傾けて当てます。毛先は歯と歯肉の境目すれすれにきちんとくるようにします。歯ブラシは〈ふつう〉〈かため〉のものが良いです。

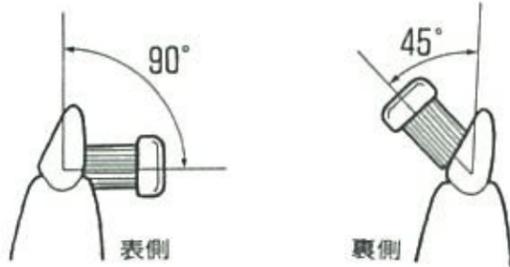

2 歯ブラシを2～3歯ずつ当てて移動させて磨いて下さい。

※左右に長く引いて歯頸部(歯の根元)を傷つけないようにしましょう。

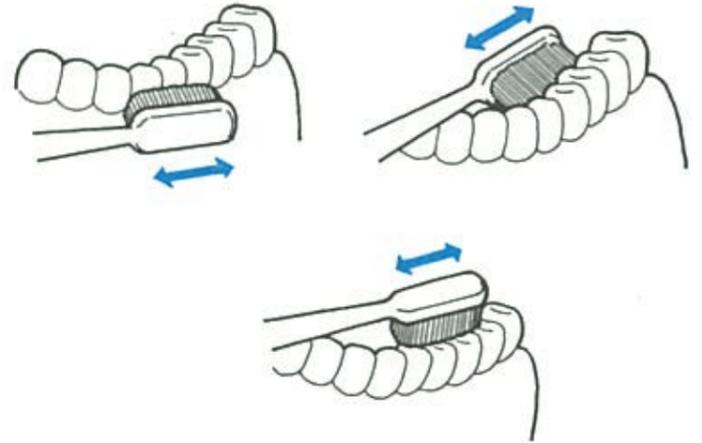

ハイパワーシュシュで毎日、笑顔に磨きをかけましょう。

虫歯やお口の臭いが気になっては、笑顔にも自信がもてませんね。きょうからハイパワーシュシュで、「食べたら磨く」を実行しましょう。オムロンのハイパワーシュシュは、毎分約3,000回の直線往復運動(約3mm)によるバス法・スクラッピングブラッシング。歯と歯ぐきの間にひそんでいる食べカスや歯垢をきれいにお掃除して、虫歯やお口の臭いを防いでくれます。また、早ければ10代から始まるといわれている歯ぐきの歯周病の予防にも効果的です。

※歯周病…歯を支えている周囲の組織の病気で、歯槽膿漏とよく言われている。



歯と歯ぐきのために、さまざまなアイデアが生かされています。

●歯面の磨き残しをなくすために、3列植毛にしました。



●歯と歯ぐきにやさしい丸加工の毛先で、しなやかに磨けます。

●歯と歯ぐきを痛めないソフトな素材のブラシです。

●毎分約3,000回のブラシの直線往復運動(約3mm)で歯と歯ぐきの境目のポケットにたまった歯垢をきれいにかきだします。

●手にピッタリの細めグリップ(径24mm)。



Mサイズ
(大人用)
ブラシ部 幅6.0×長さ18.4mm

Sサイズ
(婦人、子供用)
ブラシ部 幅5.5×長さ17.8mm


が交換用としてあります。

お手入れのしかた


●本体、キャップ等の汚れは、水洗いをしたあと、乾いた布でふきとってください。ベンジン、シンナーなど揮発性の薬品や熱湯は、プラスチックをいためますので、ご使用にならないでください。



●本体のキャップ内に溜まった「はみがき」などの汚れは、キャップをはずして、水洗いをしてください。また、水気をよくふき取ってください。

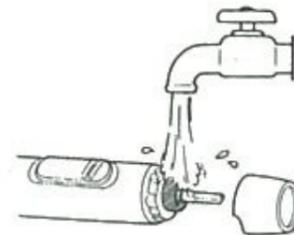

※キャップは左右側面をもって上方向へ引いてはずしてください。

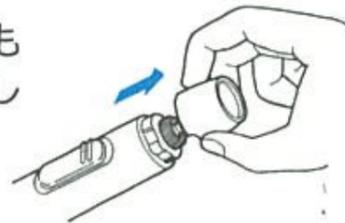

※本体の防水ゴムを回したり、引いたり、切ったりしないでください。本体内部に水気が入り、故障の原因になります。

スペア歯ブラシについて

スペア歯ブラシのお求めは、オムロン電動歯ブラシお買い上げの販売店でお求めください。

●別売スペア歯ブラシ 各2本入 ¥300

Mサイズ(大人用) ブラシ部/幅6.0×長さ18.4mm

かため ふつう やわらかめ

Sサイズ(婦人、子供用) ブラシ部/幅5.5×長さ17.8mm

かため ふつう やわらかめ

仕様

型式/HT-B005

電源電圧/DC1.5V(単3形アルカリ乾電池1コ/別売)

振動数/約3,000回/分(無負荷時)

振幅/約3mm

外形寸法/φ24×223mm(歯ブラシ装着時)

重量/75g(乾電池別)

付属品/歯ブラシ(1)・携帯用ケース(1)

アフターサービスについて

不審な点、故障の場合は、内部機構をさわらずにお買い上げ販売店にご持参のうえ、ご相談ください。