



各部のなまえとその使い方

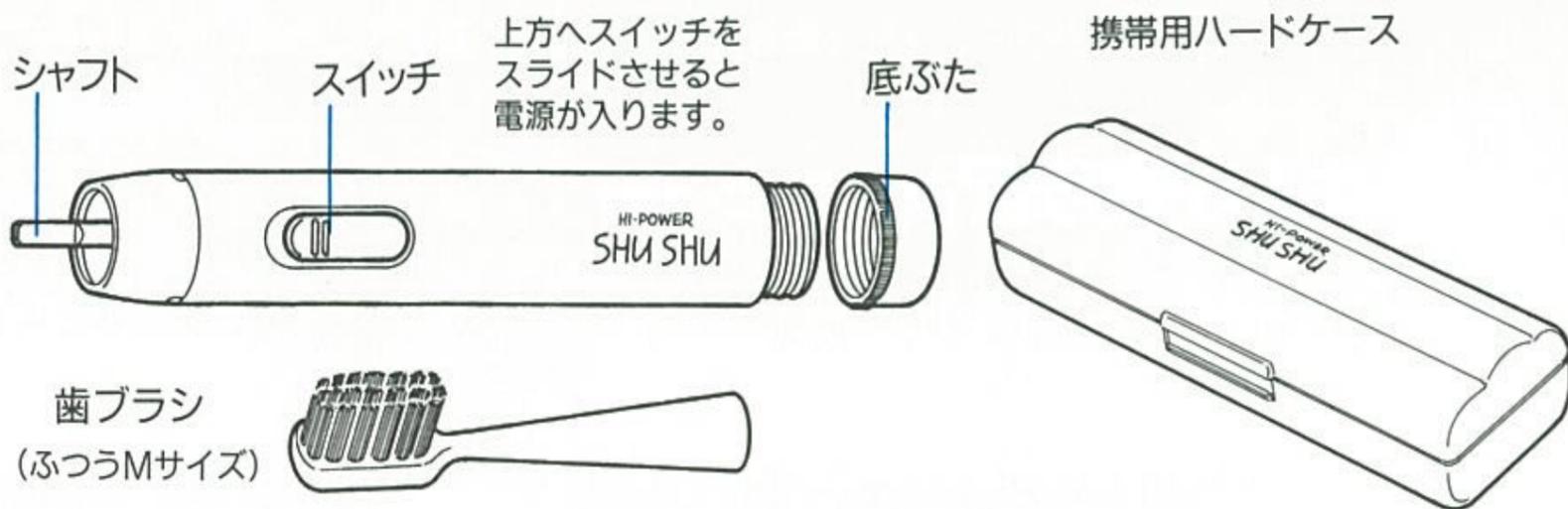

乾電池の入れ方

1 底ぶたを左に回してはずし、乾電池の⊕⊖に注意して入れてください。

2 底ぶたを右に回して最後まで確実にしめてください。

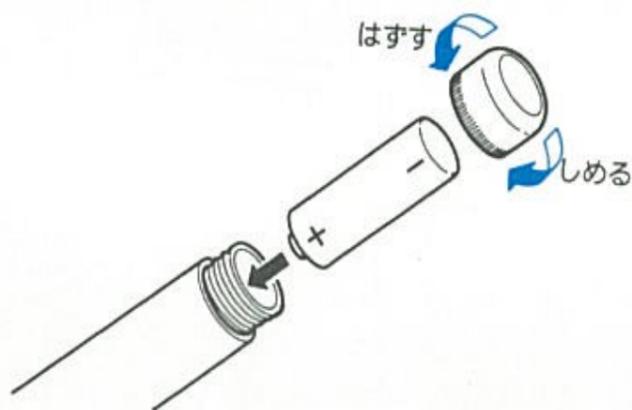

底ぶたが確実にしまっていない場合は、水が内部に入り故障の原因となります。

☆乾電池をお取替えのときは、本体の水気をよく拭き取って、水滴が中に入らないようにご注意ください。

☆乾電池は別売りです。

単3形アルカリ乾電池をご使用の場合、1回2分お使いになるとして約35回使えます。

☆1ヵ月以上使わないときは、乾電池を取出しておいてください。

ハードケースの使い方

1. ケースの開け方

親指でハードケースの開け口の上下をおさえ、上ふたの開け口を軽く押すと開きやすくなります。

2. 電動歯ブラシ本体の収納

①図のように、ハードケースの手前に、電動歯ブラシ本体シャフト部が左にくるように入れてください。

3. 歯磨き剤の収納



50gまでの歯磨き剤が入ります。(薬用など特殊なかたちのものは50gでも入らない場合があります。)①図のように、ハードケースの奥部に電動歯ブラシ本体の底部に歯磨き剤のキャップの向きをあわせて入れてください。また、歯磨き剤の下部が電動歯ブラシ本体側にくるように、たおして入れてください。

4. 歯ブラシの収納

●歯磨き剤を入れる場合：①図のように、ハードケースのふた部のリブに歯ブラシの柄を差し込んでください。


●歯磨き剤を入れない場合：ハードケースの歯磨き剤収納スペースに設置することもできます。

②図のように、歯ブラシをケースのリブに差し込んでください。

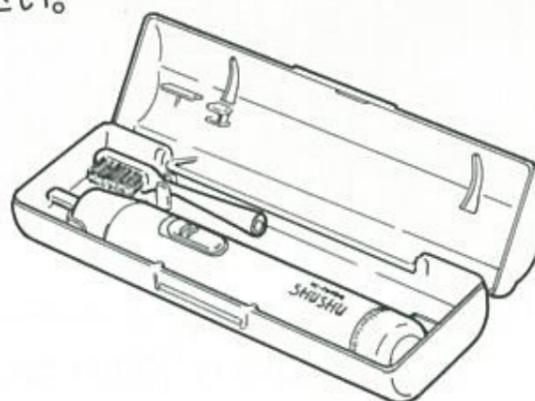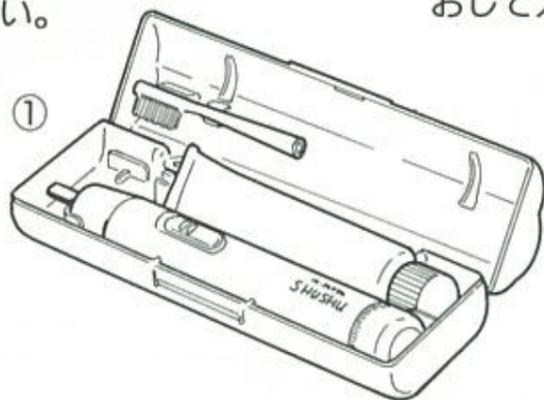

歯ブラシの使い方


1 歯ブラシを下図のように、シャフトに差し込んでください。
●本体のスイッチ側に歯ブラシ毛先を上に向けて差し込んでください。

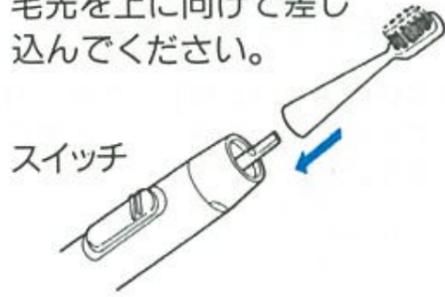

2 「歯みがき剤」をつけ、必ず歯ブラシを口の中に入れてからスイッチを入れてください。
●使用するときには下図の点線部より下を持って磨いてください。



3 ご使用后、歯ブラシと本体を洗ってください。
●本体、歯ブラシの水分をよく拭き取ってから、携帯用ハードケースへ収納してください。

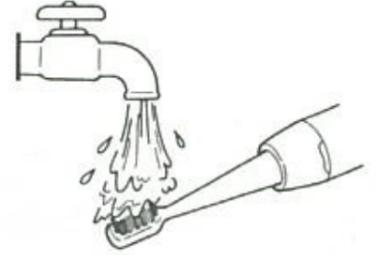

特にご注意いただきたいこと

●歯や歯ぐきの病気にかかっている方や、歯の治療を受けておられる方。
医師に相談の上ご使用ください。




●お子様の使用について。
正しい使い方を教えてあげてください。



●電動歯ブラシ本体は防水構造ですが、水中に放置しないでください。故障の原因になります。




●本体に強い衝撃を与えないでください。
故障の原因となります。

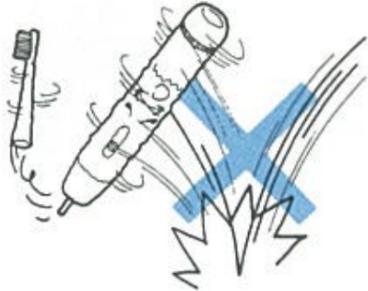

●水洗いは水道水かぬるま湯をご使用ください。
海水、熱湯は使わないでください。



●発熱体の近くに放置しないでください。
故障の原因となります。

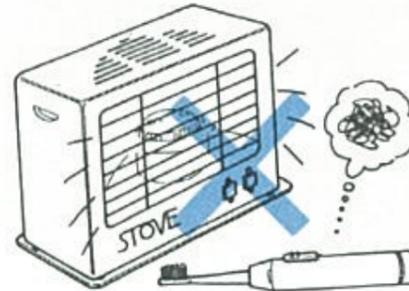


●本体を分解したり内部にふれたりしないでください。
故障の原因となります。




上手なみがき方1 (バス法)

歯と歯肉の境目(歯肉縁部)の歯垢を取り除くのに適した磨き方であり、同時に歯周病^{*}の予防に効果的です。
 ※歯周病…歯を支えているその周囲の組織の病気で歯槽膿漏とよく言われている。
 振幅3mmの前後振動で歯垢を除去。当て方により理想のバス磨きができます。


- 1** ブラシの毛先を歯と歯ぐきの境目に45度の角度で当て磨いてください。

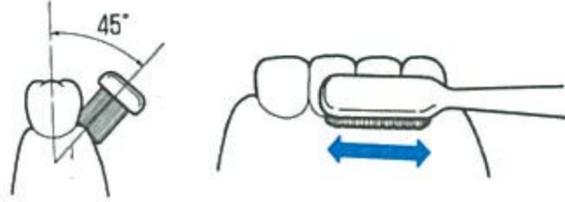

- 2** 歯ブラシを2~3歯ずつに当てて磨くようにしてください。

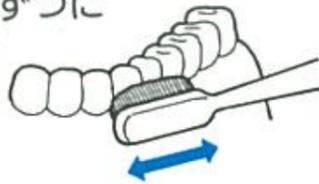

- 3** 上の歯と下の歯は別々に磨いてください。

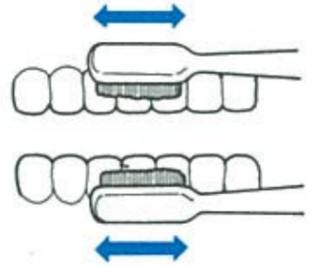

- 4** 歯の裏側、かみ合わせ面もていねいに磨いてください。




歯ブラシの毛先が広がると、交換の時期です。新しいブラシをお買い求めください。
 ※必ずハイパワーシュッシュ用と指定して購入するようにお願い申し上げます。


上手なみがき方2 (スクラッピング法)

歯の表面や、歯と歯の間の歯垢の除去率が高い磨き方です。いろいろな方向から角度をもたせて磨けば、この方法だけでもほぼ完全に歯垢が取れます。スイッチを入れて、当て方を工夫するとスクラッピング法ができます。

- 1** 歯の表側では毛先を歯の面に対し直角に当てます。歯の裏側では毛先を歯に対し45°に傾けて当てます。毛先は歯と歯肉の境目すれすれにきちんとくるようにします。歯ブラシは〈ふつう〉〈かため〉のものが適当です。

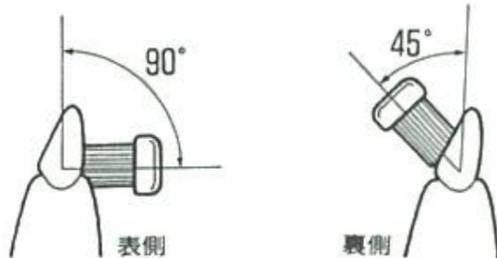


- 2** 歯ブラシを2~3歯ずつ当てて移動させて磨いて下さい。
 ※左右に長く引いて歯頸部(歯の根元)を傷つけないようにしましょう。

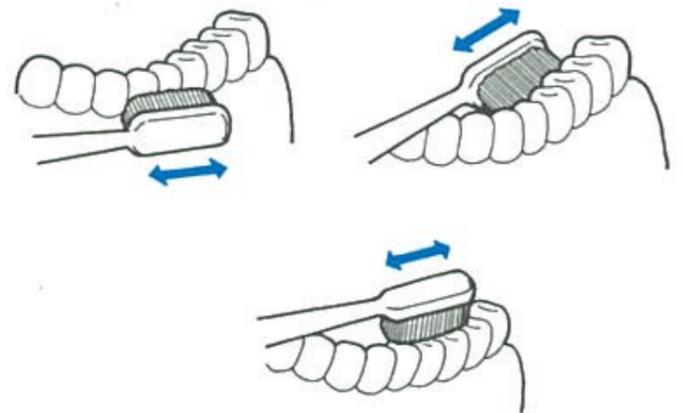

歯と歯ぐきのために、さまざまなアイデアが生かされています。

●歯面の磨き残しをなくすために、3列植毛にしました。

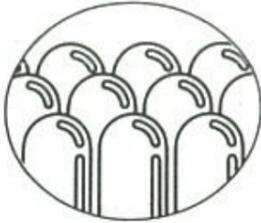

●歯と歯ぐきにやさしい丸加工の毛先で、しなやかに磨けます。

Mサイズ
(大人用)

ブラシ部 幅6.0×長さ18.4mm


Sサイズ
(婦人、子供用)

ブラシ部 幅5.5×長さ17.8mm

●歯と歯ぐきを痛めないソフトな素材のブラシです。

●毎分約3,000回のブラシの直線往復運動(約3mm)で歯と歯ぐきの境目のポケットにたまった歯垢をきれいにかきだします。

●手にピッタリの細めグリップ(径24mm)。

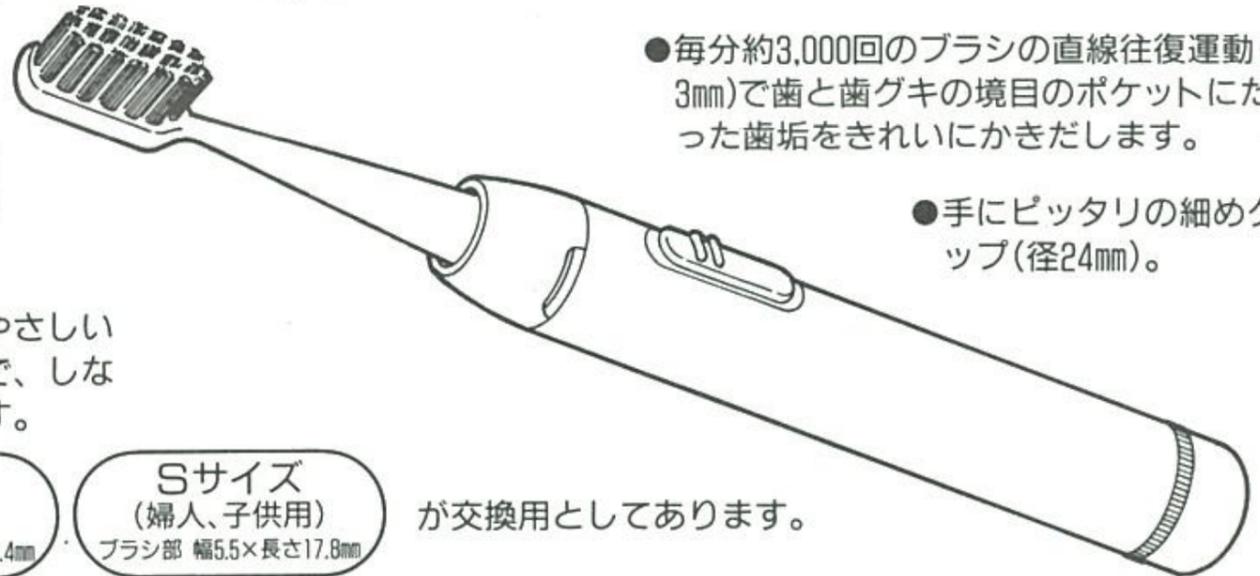

が交換用としてあります。


お手入れのしかた

●本体、キャップ等の汚れは、水洗いをしたあと、乾いた布でふきとってください。ベンジン、シンナーなど揮発性の薬品や熱湯は、プラスチックをいためますので、ご使用にならないでください。



●本体のキャップ内に溜まった「歯みがき剤」などの汚れは、キャップをはずして、水洗いをしてください。また、水気をよくふき取ってください。

※キャップは左右側面をもって上方向へ引いてはずしてください。

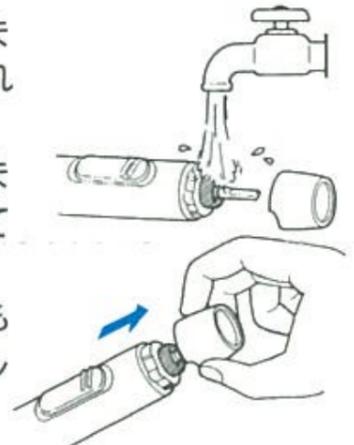

※本体の防水ゴムを回したり、引いたり、切ったりしないでください。本体内部に水気が入り、故障の原因になります。

スペア歯ブラシについて

スペア歯ブラシのお求めは、オムロン電動歯ブラシお買い上げの販売店でお求めください。

●別売スペア歯ブラシ
各2本入 ¥300(別売)

大きさ	かたさ	やわらかめ		ふつう		かため	
		ホワイト	ピンク	ホワイト	ピンク	ホワイト	ピンク
Mサイズ(大人用)		SB004-W	SB004-P	SB005-W	SB005-P	SB006-W	SB006-P
		イエロー	グリーン	イエロー	グリーン	イエロー	グリーン
		SB004-Y	SB004-G	SB005-Y	SB005-G	SB006-Y	SB006-G
Sサイズ (婦人・子供用)		SB001-W	SB001-P	SB002-W	SB002-P	SB003-W	SB003-P
		イエロー	グリーン	イエロー	グリーン	イエロー	グリーン
		SB001-Y	SB001-G	SB002-Y	SB002-G	SB003-Y	SB003-G

仕様

型式/HT-B010
電源電圧/DC1.5V(単3形アルカリ乾電池1コ/別売)
振動数/約3,000回/分(無負荷時)
振幅/約3mm
外形寸法/φ24×229mm(歯ブラシ装着時)
重量/75g(乾電池別)
付属品/歯ブラシ ふつうMサイズ(1)
携帯用ハードケース(1)

アフターサービスについて

不審な点、故障の場合は、内部機構をさわらずにお買い上げ販売店にご持参のうえ、ご相談ください。