

Wメリット電動歯ブラシ

歯つるるーん

オムロン電動歯ブラシ HT-B016A

機能・仕様	内容
電源電圧	DC 1.5 V (単3形アルカリ乾電池1本使用)
電池寿命	約1ヶ月(1回2分の使用で約35回使用できます)
外形寸法	長さ232×Φ26mm
質 量	70g


乾電池の入れ方



※電池は市販の単3形アルカリ電池が使用できます。(1回2分の使用で、約35回使用できます)

歯ブラシの取り付け方

本体スイッチ側に
歯ブラシの毛先を向け、
シャフトの形状と歯ブラシの
挿入口の形状を合わせて
差し込んでください。

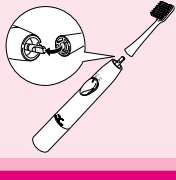

※歯ブラシは、毛先が開いてきたら
交換して下さい。

使 い 方

口の中に歯ブラシを入れてから、スイッチを「ON」にしてください。
ご使用後はスイッチ「OFF」に戻し、歯ブラシと本体を洗い、
水分をよくふき取ってください。

磨 き 方



図のように歯ブラシを歯に当てて磨くと、歯垢除去に効果的です。

スぺア歯ブラシのお求めは

スぺア歯ブラシをお求めの際は、オムロン電動歯ブラシ用「Wメリット歯ブラシ」
をご指定下さい。(ハイパワースッシュ専用スぺア歯ブラシもご使用できます。)

スぺア歯ブラシのお求めはお買い上げの販売店、または全国どこからでも
電話一本でご注文いただけます下記フリーダイヤルをご利用ください。

オムロンお客様サービスセンター
フリーダイヤル **0120-35-5066**

受付時間(祝日を除く月～金) 9:00～19:00

オムロンインターネットパーツセンター
<http://www.healthcare.omron.co.jp>

※通信料はお客様ご負担となります。

ケアセルフ商品に関するお問い合わせは

オムロン健康相談室

ダイヤルは正確に

フリーダイヤル **0120-30-6606** FAX **03-3436-7225**

受付(祝日を除く月～金) 10～12時/13～16時(都合によりお休みさせていただくことがあります。)

発売元 オムロン株式会社
東京都港区虎ノ門3-4-10

輸入元 オムロン松阪株式会社
三重県松阪市久保町1855-370



4 975479 467899

MADE IN CHINA

オムロン Wメリット電動歯ブラシ

HT-B016A 取扱説明書

- ・このたびはオムロン電動歯ブラシをお買い上げいただきまして、ありがとうございました。
- ・安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
- ・本書はいつもお手元においてご使用ください。
- ・本書は品質保証書を兼ねていますので、紛失しないように保管してください。

安全上のご注意

- ・ここに示した警告サインと図記号の例は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や、他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するものです。
- ・表示と意味は次のようになっています。

警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容を示します。

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

図記号の例

警告 記号は注意（警告・危険を含む）を示します。具体的な注意内容は、の中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は“破裂注意”を示します。

禁止 記号は禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、の中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は“分解禁止”を示します。

強制 記号は強制（必ず守ること）を示します。具体的な強制内容は、の中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は“一般的な強制”を示します。

警告

口腔または歯周手術を受けて間もない方や現在治療中の方は、本器のご使用を歯科医にご相談ください。

- ・ブラッシングの刺激により、傷口を悪化させる恐れがあります。

注意

本器をご使用になり出血が続く場合、または大量の出血がある場合は、歯科医にご相談ください。

- ・歯周病以外のほかの病気による出血が考えられます。

本器を幼児や病人が使用するとき、または幼児や病人に対して使用する場合は十分に気をつけてください。

- ・事故につながる恐れがあります。

乾電池を火中に投入しないでください。

- ・乾電池が破裂し、事故の原因になります。

ブラッシングの際は、ブラシの振動が停止するほど強く歯や歯ぐきに押しつけて使用しないでください。また、一回2分のブラッシング時間を目安として長時間のご使用を避けてください。

- ・強い押圧力でブラッシングすると、歯の損傷や歯ぐきの縮退の原因となります。また、本器の故障や破損の原因となります。

本器を水中に放置しないでください。

- ・故障の原因になります。

本器を分解しないでください。

- ・けがや故障の恐れがあります。

お願い

- ・本器を落としたり、衝撃を与えないでください。
- ・本体先端部の汚れは、鋭利なものでかき取るようなことはせずに水で濡らした布でふき取ってください。
- ・直射日光の当たるところや、火気のそば、暖房器具等の近くには放置しないでください。

使い方は裏面をご覧ください。

本体は通常使用で約1500回（1回2分）使用できます。

保証規定

持込修理

1. 取扱説明書にしたがった正常な使用状態でご購入後1年以内に故障した場合には、無償修理いたします。
2. 無償修理期間内に故障して修理を受ける場合は、商品に本書を添えてお買い上げの販売店、オムロン（株）の支店またはオムロンフィールドエンジニアリング（株）のネットワークに依頼または送付してください。なお、送付の場合はオムロン（株）の支店またはオムロンフィールドエンジニアリング（株）までの送料の負担をお願いします。
3. 無償修理期間内でも次の場合には有償修理になります。
（イ）使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
（ロ）お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常電圧による故障および損傷。（ニ）本書の提示がない場合。（ホ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。（ヘ）消耗部品。（ト）故障の原因が本製品以外に起因する場合。
4. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
5. この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

品質保証書

このたびは、オムロン健康機器を、お買い求めいただきありがとうございます。本機は厳重な検査を行ない高品質を確保しております。しかし通常のご使用において万一、不具合が発生しましたときは、保証規定によりお買い上げ後、一年間は無償修理いたします。

本機の保証は、日本国内での使用の場合に限りです。

This warranty is valid only in Japan.

品名 オムロン電動歯ブラシ
形式 HT-B016A
ご芳名
ご住所
TEL ()

以下につきましては、必ず販売店にて、記入捺印していただいてください。

お買い上げ店名 (印)
住所
TEL

お買い上げ年月日 年 月 日

発売元 オムロン株式会社
ヘルスケアビジネスカンパニー

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-10 TEL.03(3436)7092

