


上手なみがき方


細かい振動で、よごれを落とし、歯ぐきにマッサージ効果を与え、血行をよくします。

- 1** ブラシの毛先を歯と歯ぐきの境目45度の角度で当て左右に動かし磨いてください。

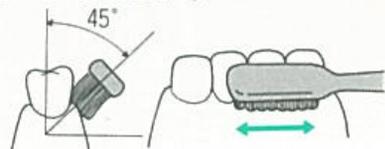

- 2** 歯ブラシを2~3歯ずつに当てて磨くようにしてください。

- 3** 上の歯と下の歯は別々に磨いてください。

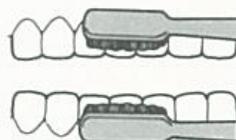

- 4** 歯の裏側、かみ合わせ面もていねいに磨いてください。



歯ブラシの毛先が広がると、交換の時期です。新しいブラシをお買い求めください。


シュシュで毎日、笑顔に磨きをかけましょう。

虫歯やお口の臭いが気になっては、笑顔にも自信がもてませんね。きょうからシュシュで、「食べたら磨く」を実行しましょう。オムロンのシュシュは、毎分5,000回転のソフトな微振動によるバス法ブラッシング。歯と歯ぐきの間にひそんでいる食べカスや歯垢をきれいにお掃除して、虫歯やお口の臭いを防いでくれます。また、早ければ10代から始まるといわれている歯ぐきの恐ろしい病気、歯槽膿漏の予防にも効果的です。



歯と歯ぐきのために、さまざまなアイデアが活かされています。

- 歯面の磨き残しをなくすために、3列植毛(10mm)にしました。
- 歯と歯ぐきを痛めないソフトな素材のブラシです。
- 偏心カムパイプレーション方式で、バス磨きに適した細かい振動をつくります。
- 植毛部の長さは、お口の中で動かしやすい20mmサイズ。
- パイプレーションは、手にやさしい5,000回転。
- 振動を歯ぐきに確実に伝達するため、毛足は10mmの短かめ。
- 手にピッタリの細めグリップ(径22mm)。

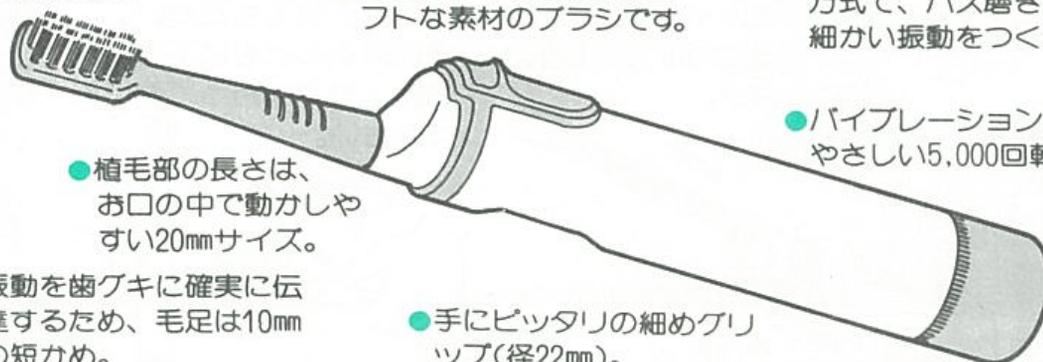

お手入れのしかた

本体、キャップ等の汚れは、中性洗剤や水で湿らせた布で落とし、乾いた布でふきとってください。ベンジン、シンナーなど揮発性の薬品や熱湯は、プラスチックをいためますので、ご使用にならないでください。



仕様

型式 / HT-B04
 電源 / DC1.5V(単3形乾電池1コ)
 振動数 / 5,000回(分)
 外形寸法 / φ22×194mm(キャップを含む)
 重量 / 63g(乾電池別)
 付属品 / 歯ブラシ(1)・携帯用ポーチ(1)

スペアブラシについて


スペアブラシのお求めは、オムロン電動歯ブラシお買い上げの販売店でお求めください。

- スペア歯ブラシ(4本入)¥500

アフターサービスについて


不審な点、故障の場合は、内部機構をさわらずにお買い上げ販売店にご持参のうえ、ご相談ください。

各部のなまえとその使い方

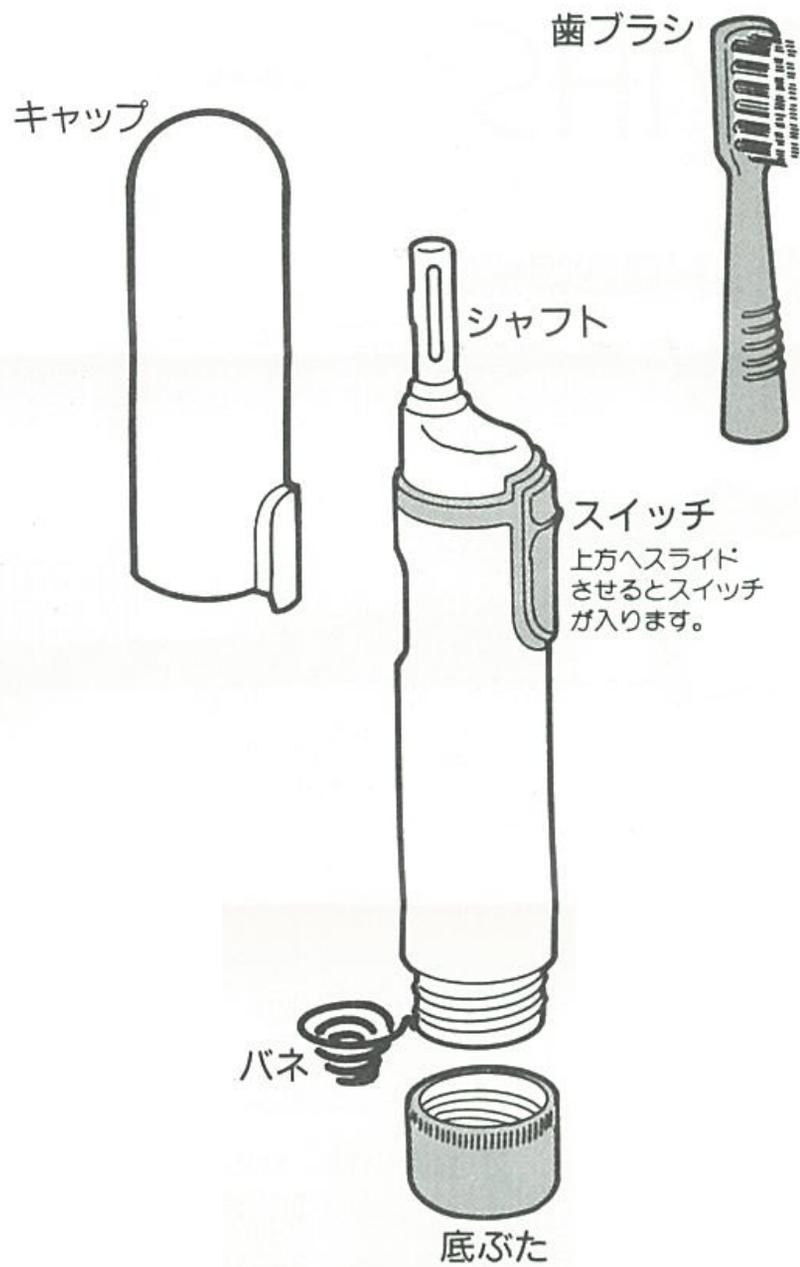

乾電池の入れ方

- 1 底ぶたを左に回してはずし、バネを出して乾電池の⊕⊖に注意して入れる。

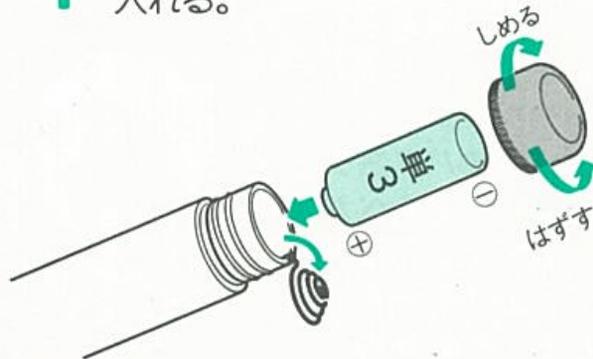

- 2 底ぶたを右に回して最後まで確実にしめてください。


底ぶたが確実にしまっていない場合は、水が内部に入り故障の原因となります。

- ★ 乾電池をお取替えのときは、ボディの水気をよく拭き取って、水滴が中に入らないようご注意ください。
- ★ 乾電池は別売りです。
単3形マンガン乾電池をご使用の場合、1回3分お使いになるとして約20回使えます。
- ★ 1カ月以上使わないときは、乾電池を取出しておいてください。

歯ブラシの使い方


1 歯ブラシを下図のように、シャフトに差し込んでください。

●本体のスイッチ側に歯ブラシ毛先を向けて差し込んでください。

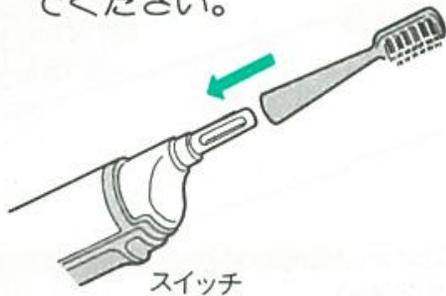

2 「歯みがき」をつけ、必ず歯ブラシを口の中に入れてからスイッチを入れてください。

●使用するときには下図の点線部より下を持って磨いてください。

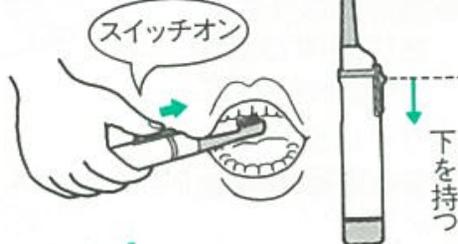

3 ご使用后、歯ブラシと本体を洗ってください。

●本体、歯ブラシの水分をよく拭き取ってから、携帯用ポーチへ収納してください。



特にご注意いただきたいこと

●お子様の使用について。




正しい使い方を教えてあげてください。

●水中に放置しないでください。



故障の原因になります。

●水洗いは水道水かぬるま湯をご使用ください。

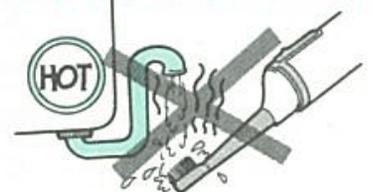


海水、熱湯は使わないでください。



●本体に強い衝撃を与えないでください。

故障の原因となります。

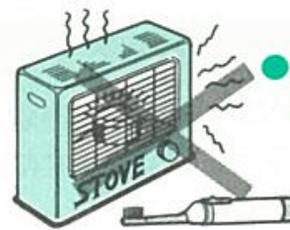

●発熱体の近くに放置しないでください。

故障の原因となります。