


**OMRON** 電動歯ブラシ

HT-B10

**エレテント**

取扱説明書

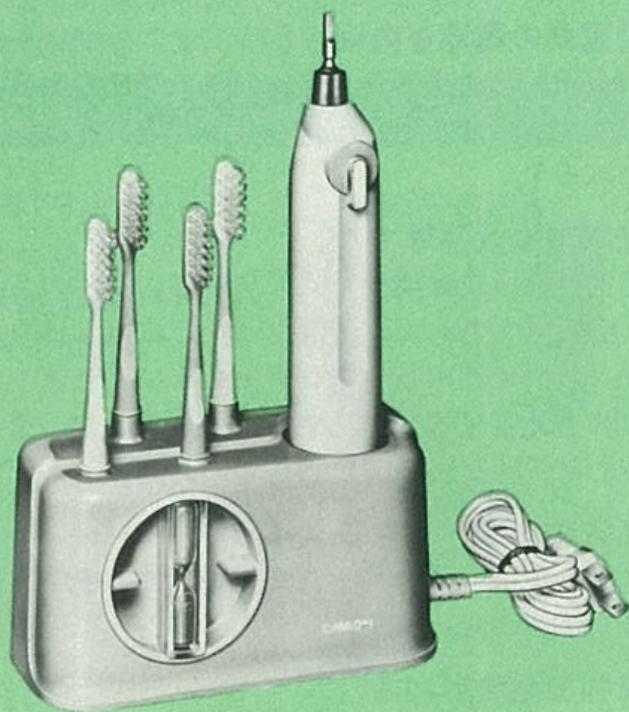

このたびは、OMRON電動歯ブラシをお買い上げいただき、ありがとうございます。

この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくご愛用ください。お読みになりましたら、大切に保存しておいてください。

## こんな特長があります

### ①歯の内側、奥歯も、簡単にみがけます

歯ブラシのブラシ部が小さくなっており、しかも1分間に1,600回ローリングしますので、歯の内側、奥歯も簡単にみがけます。

### ②充電式の電池を内蔵

OMRON電動歯ブラシは、充電式電池を内蔵していますので、強力な回転が得られるうえ、維持費も安くてすみます。

### ③充電方法は簡単です

充電方法は電磁誘導方式ですので、本体のスイッチを「OFF」の位置にして充電スタンドに差し込み、充電スタンドの電源プラグをコンセントに差し込みます。本体を充電スタンドに立てているあいだ、充電されますので、手軽で快適にご使用いただけます。

### ④2方向に操作できるスイッチ

スイッチはロータリー式を採用。使いやすい方向に操作していただけます。

### ⑤便利な砂時計つき

充電スタンドに砂時計がついていますので、歯みがき時間がお子さまでも容易に確認できます。

## これだけは絶対におやめください

- ①本体上部に取りつけてある防水ゴムに歯をあてたり、先のとがったものでキズをつけたりしないでください。穴があきますと内部に水が入り、故障の原因となります。
- ②製品を分解したり、乱暴に取り扱ったりしないでください。
- ③充電電源はAC100Vをご使用ください。110Vをこえる高い電圧では絶対にご使用にならないでください。
- ④電動歯ブラシをお子さまがお使いになるときは、正しい使い方を教えてください。おもちゃにしたり、誤った使い方をされると危険です。
- ⑤充電スタンドのお手入れをするときは、必ず電源プラグをコンセントからぬいてください。汚れ落としは、中性洗剤や水を湿らせた布でふいてから、十分に水分をふきとり、乾かしてからふたたびコンセントに差し込んでください。
- ⑥ブラシは熱湯で洗わないでください。

## ご使用前の注意


- ①充電するときは必ず本体のスイッチを「OFF」にしてください。スイッチが「ON」では充電できません。
- ②電池が放電しおわって本体が動かなくなったときは、スイッチを入れたまま放置しないで必ず切ってください。
- ③電源プラグをコンセントからぬくときは、電源コードをひっぱらないで、必ずプラグ部分を持ってぬいてください。
- ④充電中、本体が多少あたたかくなりますが、異常ではありませんので、そのままご使用ください。
- ⑤充電スタンドの本体を差し込む凹部に歯みがき粉やホコリがつきますと、充電状態が悪くなる場合がありますので、つねに清掃するようにしてください。
- ⑥はじめてご使用になるとき、または長期間充電せずに放置されていたときは、電池が自己放電し、力が弱いことがありますので、必ず充電してからお使いください。
- ⑦まったく動かなくなってから、満充電までの標準充電時間は30時間です。

## ご使用方法

この電動歯ブラシは常時充電された状態でお使いいただくために、ご使用時以外はたえず充電していただける方式になっています。

### ■充電のしかた

- ①充電スタンドの電源プラグをコンセントに接続してください。(図①)
- ②OMRON電動歯ブラシ本体のスイッチを「OFF」の位置にして、充電スタンドに差し込んでいただくと充電できます。(図②)
- ③充電方法は電磁誘導方式です。つねに確実な充電状態がえられます。
- ④充電スタンドの電源プラグはいつもコンセントに差し込んでおきますと歯ブラシを使わないときも、つねに確実な充電状態がえられます。
- ⑤充電スタンドの電源プラグはいつもコンセントに差し込んでおき、歯ブラシを使わないときも、つねに充電するようにしてください。快適にご使用いただけます。
- ⑥専用の充電スタンド以外での充電はできません。

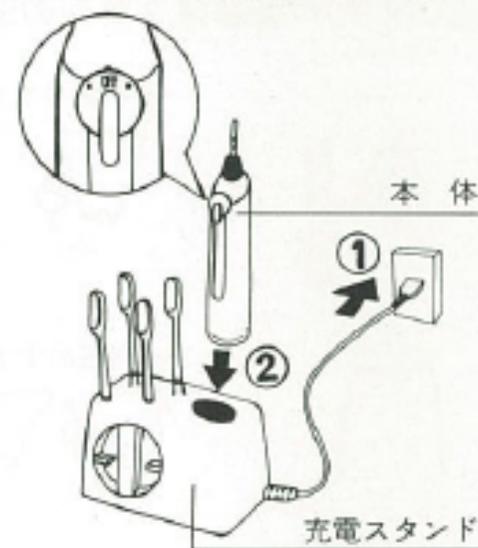


## ■本体のご使用方法

- ①充電スタンドより本体およびブラシをとり、本体上部のシャフトにブラシを差し込んでください。このときブラシの毛がシャフトの平たい面に直角になるようにし、「パチッ」と音のするまで差し込んでください。
- ②歯みがき粉をブラシにつけ、ブラシを歯にあててからスイッチをいれてください。ブラシを歯にあてずにスイッチを入れますと、歯みがき粉がとびちりますのでご注意ください。
- ③歯のみがき方は「上手なOMRON電動歯ブラシの使用法」をごらんください。
- ④みがき終わりましたら、ブラシおよび本体を水できれいに洗って、水滴を除いてから、充電スタンドに差し込み充電してください。

## 充電するときのご注意

- ①暖房器具などの近くや、強い直射日光の当る場所での充電は、さけてください。
- ②正しい充電をされても、使用時間が著しく低下してきた場合は、電池の寿命がきたものとお考えいただきもよりの販売店に修理の依頼をしてください。  
(この修理は有償です)
- ③充電スタンドの設置場所によってはブーンという充電音がすることがありますが異常ではありませんので、そのままご使用ください。

## 各部の名称

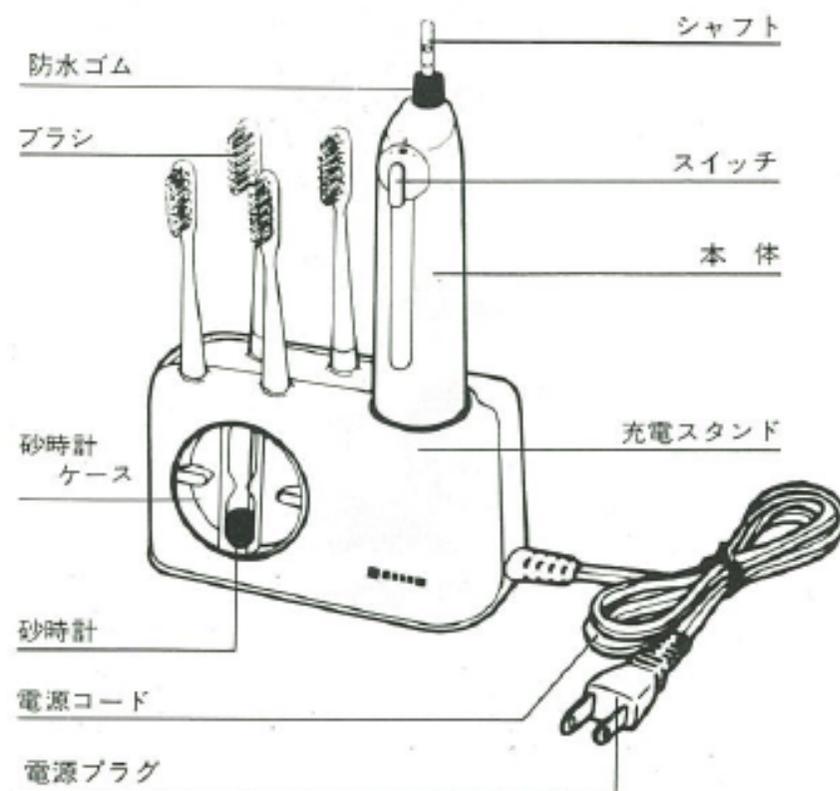

## 上手なOMRON電動歯ブラシの使用方法

お買い上げいただいたOMRON電動歯ブラシは、振動角度30度のローリング方式です。これは、歯そうのうろろうの患者に歯科医がすすめる回転法、チャーターズ法と同様の運動であり、しかも振動数が多いため、歯みがきと同時に歯ぐきのマッサージもおこなえます。


### ■OMRON電動歯ブラシの使い方

- ①歯ブラシの毛先でみがくのではなくて、歯ブラシの毛の脇でみがくようになっています。
- ②回転法では、歯ぐきに毛の脇をあてて、歯先に向かって歯ブラシを移動させます。
- ③チャーターズ法では、歯先に毛の脇をあてて、歯ぐきに向かって歯ブラシを移動させます。
- ④回転法およびチャーターズ法では、毛先が歯と歯のあいだに入り、この部分にたまっているものを取り除くことができるとともに、歯ぐきをマッサージして適度な刺激を与えます。


### ■OMRON電動歯ブラシの運動



〈歯科医のすすめる回転法〉

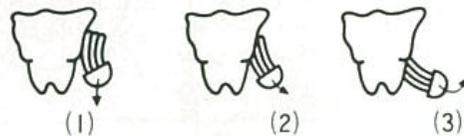

〈歯科医のすすめるチャーターズ法〉

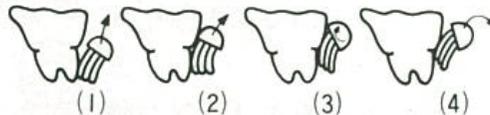

## お手入れのしかた

本体、充電スタンドの汚れは、中性洗剤や水で湿らせた布で落とし、乾いた布でふきとってください。  
ベンジン、シンナーなど揮発性の薬品や熱湯は、プラスチックをいためますのでご使用にならないでください。

## アフターサービスについて

不審な点、故障の場合は、内部機構をさわらずに本体と充電スタンドをあわせて、お買い上げ販売店にご持参のうえ、ご相談ください。

## スペア歯ブラシについて

スペア歯ブラシのお求めは、OMRON電動歯ブラシお買い上げの販売店でお求めください。

## 姉妹器として


歯ブラシだけではいき届かないところの食べカスなどもきれいにおとすOMRON口腔洗浄器「エレピック」もあります。



OMRON口腔洗浄器 **エレピック**

## ■砂時計のご使用方法

- ①充電スタンドの砂時計ケースを 180度回転させてご使用ください。砂時計ケースは左右どちらへも回せます。

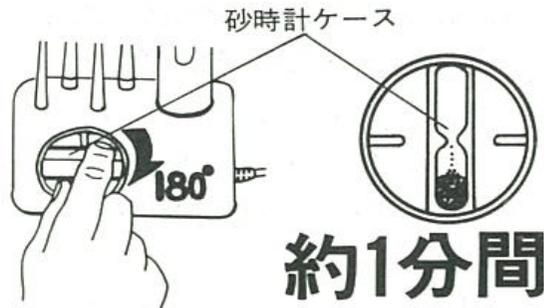


- ②砂時計は約1分です。
- ③砂時計ケースは歯みがき粉やゴミがつくと回転が重くなることがありますので、ときどき充電スタンドからはずして、きれいに清掃してください。砂時計ケースのはずしかたは、砂時計を垂直にして砂時計ケースを手前に引くとはずれます。取りつける場合は、この逆の要領でおこなってください。



## ■充電スタンド固定方法



### 木製の壁面や柱面にかける場合(垂直に固定する場合)

- ①充電スタンド後面にあるロックアウト(2カ所の〇形状部)をドライバーなどの先端で突き破ってください。

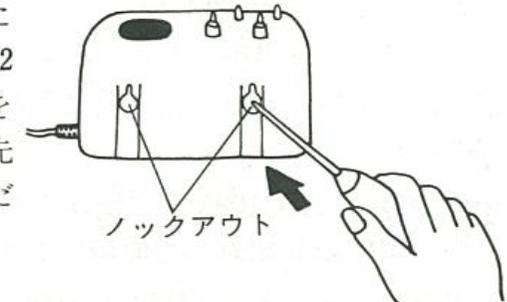

- ②充電スタンドの底面のネジ2本をはずし、壁に締めつけてください。ネジは完全に締めつけずに、図のように少し浮かしてください。


### 充電スタンド固定用ネジ

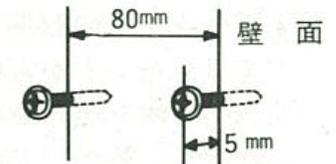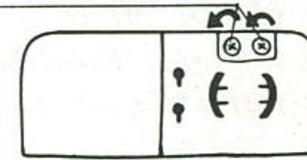

- ③充電スタンドの後面ロックアウトを上記のネジに差し込み、下方向に移動させて固定してください。

### 木製の棚に固定する場合(水平面に固定する場合)

- ①充電スタンド底面のネジ2本をはずし、棚に締めつけてください。ネジは完全に締めつけずに、図のように少し浮かしてください。

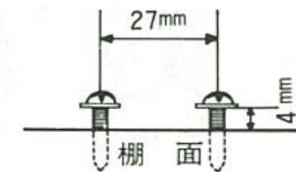

- ②充電スタンド底面の〇穴を上記のネジに差し込み、前方向に引いて固定してください。

※固定のさいは、個装箱内側に印刷してあります原寸大の型紙をご利用ください。

## 仕 様

入 力 電 源	A C 100 V 50 / 60 Hz
内 蔵 電 池	サンヨーカドニカ電池 D C 1.2 V 公称容量 600 m A h × 1 個
連続使用時間	約 20 分 (室温 20℃ 中にて満充電後)
ス イ ッ チ	2 方向ロータリー式スイッチ
ブ ラ シ	4 本 (ナイロン植毛)
外 形 寸 法	214 (高さ) × 140 (幅) × 60 (奥行) mm
重 量	410 g
形式認可番号	▽91-11473



立石電機株式会社 汎用機器事業本部/健康機器部  
大阪市東区北久太郎町4-68 大阪センタービル9階  
TEL 06(253)0481代

札幌支店 011(271)7821代	名古屋支店 052(571)6461代
仙台支店 0222(22)4761代	富山支店 0764(41)4391代
北関東支店 0486(42)1650代	京都支店 075(211)5491代
東京支店 03(436)7092	大阪支店 06(253)0481代
横浜支店 045(314)3011代	神戸支店 078(241)0811代
静岡支店 0542(53)6181代	岡山支店 0862(31)3201代
長野支店 0263(32)6561代	広島支店 0822(28)4101代
豊田支店 0564(23)5181代	福岡支店 092(411)6575代