


各部の名称

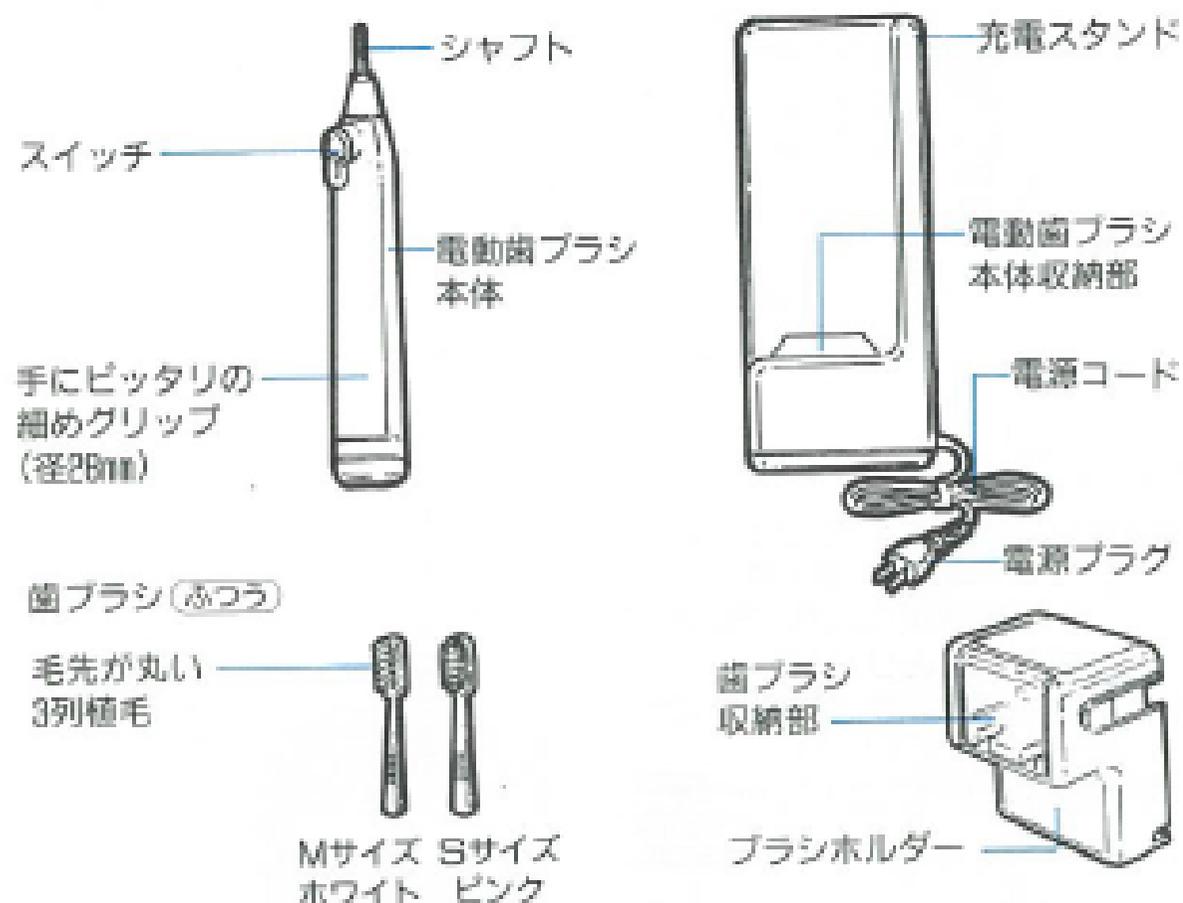

スペア歯ブラシ



毛先が広がってきたら、オムロン電動歯ブラシお買い上げの販売店で新しいスペア歯ブラシをお買い求めの上、交換してください。
※別売スペア歯ブラシ各2本入 ¥300 (税別)

大きさ	かたさ	やわらかめ		ふつう		かため	
		ホワイト	ピンク	ホワイト	ピンク	ホワイト	ピンク
Mサイズ(大人用)		イエロー	グリーン	イエロー	グリーン	イエロー	グリーン
		ホワイト	ピンク	ホワイト	ピンク	ホワイト	ピンク
Sサイズ(婦人・子供用)		イエロー	グリーン	イエロー	グリーン	イエロー	グリーン
		ホワイト	ピンク	ホワイト	ピンク	ホワイト	ピンク

※別売ブラシホルダー ¥800 (税別) もご用意しています。

オムロン電動歯ブラシハイパワーシュシュの特長

- 1 ブラシの動きは、歯垢を取りのぞき、虫歯予防に効果的な〈ローリング法〉です。ブラシ回転数の強弱 (HIGH/LOW) が調整でき、お子様から大人の方までご使用になれます。
- 2 充電スタンドとブラシホルダーを取りはずし、設置スペースに合わせて自由に取り付けられる便利なセバレート型の電動歯ブラシです。
- 3 無接点の電磁誘導充電方式のため、充電ミスがありません。
- 4 防水仕様のため、電動歯ブラシ本体を丸洗いすることができます。

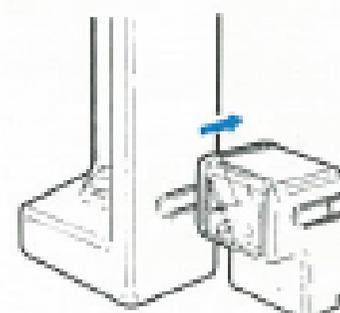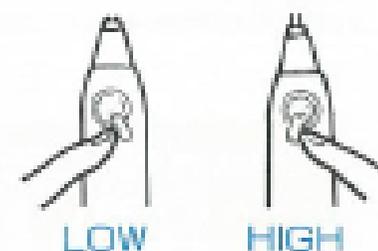

仕様

電源電圧/AC100V 50/60Hz
消費電力/2.5W
内蔵電池/500mAh×1個
充電方式/電磁誘導方式
充電時間/常時充電(100mA電流)
連続使用時間/20分(満充電時)
振動数(無負荷時)/
強(HIGH)…約3000回/分
弱(LOW)…約2000回/分

歯ブラシ/ふつう 2本
(Mサイズ1本、Sサイズ1本)
電動歯ブラシ本体…φ28×174
充電スタンド…76(W)×180(H)×55(D)
ブラシホルダー…64(W)×90(H)×55(D)
単位:mm
総重量/約450g(電動歯ブラシ本体…約140g)
※別売スペア歯ブラシ各2本入 ¥300 (税別)
※別売ブラシホルダー ¥800 (税別)

ご使用方法

充電のしかた

- 1** 充電スタンドの差し込みプラグをコンセントに差し込んでください。



- 2** 電動歯ブラシ本体のスイッチを「OFF」にして、充電スタンドの収納部にセットしてください。



- 3** 電動歯ブラシ本体をはずすときは、充電スタンドに手をそえてまっすぐ上に抜いてください。



※スイッチが「OFF」の状態になっていないと充電できません。※充電中は、電動歯ブラシ本体と充電スタンドが少しあたたかくなりますが、異常ではありません。

- 常時充電方式ですので、ご使用後はつねに、電動歯ブラシ本体を充電スタンドにセットしておいてください。
- 14時間の充電で約20分の連続使用ができます。(1回3分として、約6回使用できます)
- ご使用になる時は、必ず充電してからご使用ください。お買い求めの時や、長時間充電せずに放置されますと、自己放電のため力が弱くなります。


充電するときの注意

- 1** 暖房器具などの近くや、強い直射日光の当たる場所での充電はさけてください。
- 2** 14時間以上充電してもすぐに動かなくなる場合は、内蔵蓄電池の交換が必要です。必ずお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。(有償修理)




歯ブラシの使い方

- 1** 歯ブラシを右図のように、シャフトに差し込んでください。
●本体のスイッチの向きに歯ブラシ毛先の向きを合わせて差し込んでください。

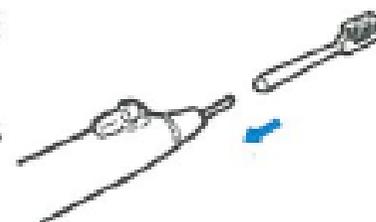

- 2** 「歯みがき」をつけ、必ず歯ブラシを口の中に入れてからスイッチを入れてください。
●使用するときには下図の点線部より下を持って磨いてください。

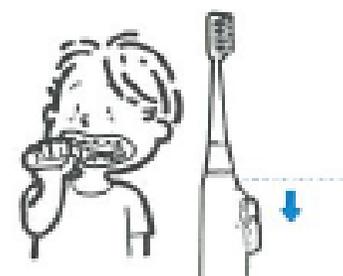

- 3** 歯ブラシは、歯と歯ぐきに軽く当てて磨きましょう。
●高速回転で効率よく磨けますので、力を入れる必要はありません。



- 4** スwitchをQにすると弱(LOW)、Dにすると強(HIGH)で磨けます。
●お子様、歯周病の方は弱(LOW)、大人の方は強(HIGH)というようにお好みの強さに切り替えてください。



- 5** ご使用後、歯ブラシは洗って、水気をきってからブラシホルダーに保管してください。電動歯ブラシ本体は洗ってから、水気をよく拭き取り、充電スタンドにセットしてください。
●無接点の電磁誘導充電方式で防水仕様ですから、電動歯ブラシ本体ごと丸洗いができます。



ご使用上の注意

- 1 歯や歯ぐきの病気で治療中の方は、あらかじめ歯科医にご相談のうえご使用ください。
- 2 電動歯ブラシ本体や充電スタンドを落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- 3 分解したり、内部にふれたりしないでください。
- 4 充電電源はAC100Vをご使用ください。100Vをこえる高い電圧では絶対にご使用にならないでください。
- 5 長時間ご使用にならないときは、電源プラグを抜いてください。電源コードをひっぱらずに、必ずプラグ部分を持って抜いてください。
- 6 電動歯ブラシ本体は完全防水ですが、水中に放置しないでください。また、充電スタンドは浴室など水気の多い場所に設置しないでください。




- 7 直射日光の当たるところや、火気のそば、暖房器具等の近くでの充電、放置はおやめください。



- 8 充電スタンドの収納部(凹部)に、歯みがき剤やホコリがつかますと充電状態が悪くなる場合があります。つねに清掃するようにしてください。
(水洗いは、おさげください)



- 9 充電スタンドのお手入れをするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

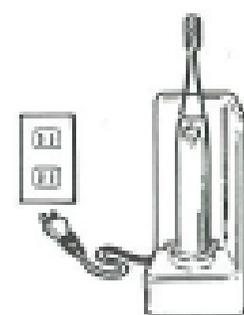

- 10 充電スタンドの収納部には、電動歯ブラシ本体以外のものは差し込まないでください。

- 11 お子様がお使いになるときは、正しい使い方を教えてください。おもちゃにしたり、誤った使い方をされると危険です。



アフターサービスについて

ご不審な点がある場合、故障の場合は、内部機構をさわらずに電動歯ブラシ本体と充電スタンドをあわせて、お買い上げ販売店にご持参のうえご相談ください。


設置場所に合わせたディスプレイ

オムロン電動歯ブラシハイパワーシュッシュは、充電スタンドとブラシホルダーが取りはずせ、自由に組み立てられるセパレートタイプです。設置スペース、ご家族の人数に合わせてお使いください。

ブラシホルダーの組み立て方法

●充電スタンドにブラシホルダーを取り付ける場合は、図のようにブラシホルダーをスライドさせてください。


●同様にスライドさせて、ブラシホルダーとおしを左右にユニットすることもできます。
※この場合は、別売ブラシホルダーをお買い求めください。

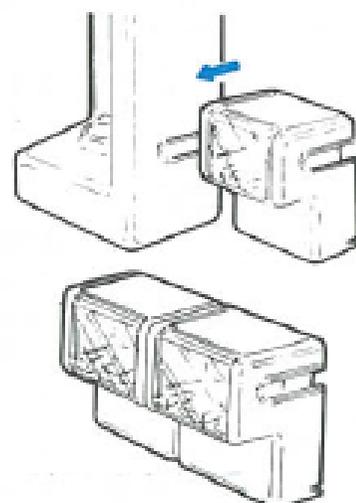

据え置き使用

充電スタンドとブラシホルダーを右図のようにユニットしてお使いください。

※2ヶ以上ユニットする場合は、別売ブラシホルダーをお買い求めください。

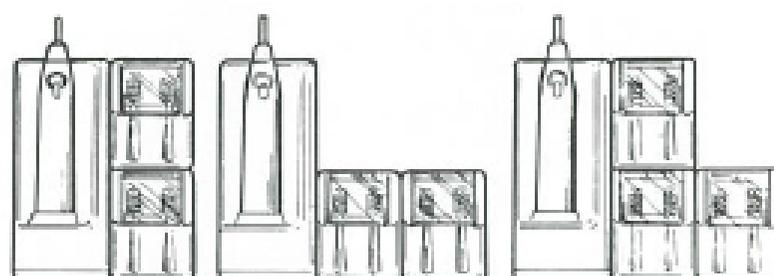


■壁かけ使用

洗面台スペースに余裕がない場合は、充電スタンド及びブラシホルダーを壁に取り付けることもできます。

●充電スタンドの固定


①充電スタンド底面のビス2本をはすし、木製壁面や柱面に取り付けます。(ビスは完全にしめつけず、少し浮かせてください)

②充電スタンド後面の穴を①のビスにさしこみ、下方方向に移動させます。

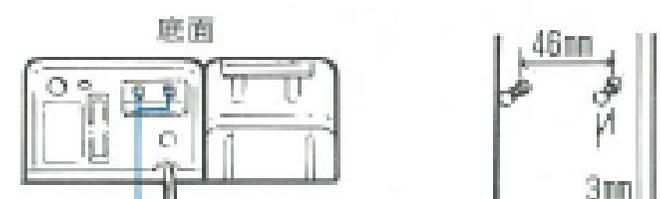


ビス2本をはすす

ビスの位置を決める際に、個装箱内部に印刷してあります原寸大の型紙をご利用ください。

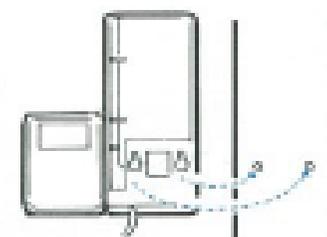

●ブラシホルダーの固定

ブラシホルダーの裏側の両面テープをはがし、壁に取り付けます。

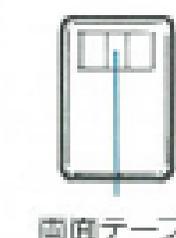


両面テープ

※壁につける場合は、矢印の場所に電源コードを通してください。(電源コードは充電スタンドの左右どちらからも通すことができます。)

日常のお手入れ

●充電スタンド、電動歯ブラシ本体、ブラシホルダーの汚れは、中性洗剤や水で浸らせた布で落とし、乾いた布でふきとってください。ベンジン、シンナーなど揮発性の薬品や熱湯は、プラスチックをいためますので、ご使用にならないでください。

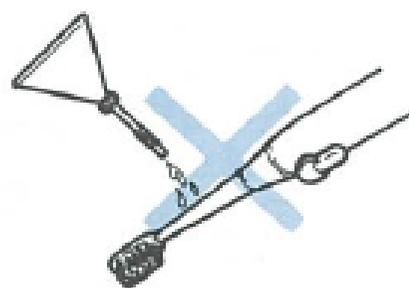

7

●歯ブラシのシャフト差し込み口は、汚れが溜まりやすいので、ご使用後、よく水洗いをしてください。




8

じょうずな歯の磨き方

ローリング法ブラッシング

磨きにくい奥歯のかみ合わせや、歯と歯の間の歯垢を取りのぞき、虫歯を予防します。

毎分約3,000回(強)／約2,000回(弱)の速さでブラシが往復ローリング運動。歯と歯の間の食べカスや歯垢を効果的に除去して、虫歯の原因をシャットアウトしてくれます。

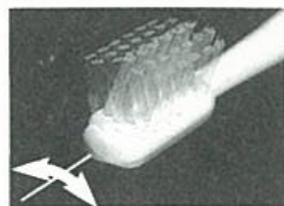


1 ブラシの側面を歯と歯ぐきに当てると上下に回転するように磨けます。



2 歯ブラシを2～3歯ずつ当てて磨くようにしてください。



3 上の歯と下の歯は別々に磨き、かみ合わせ面もていねいに磨いてください。

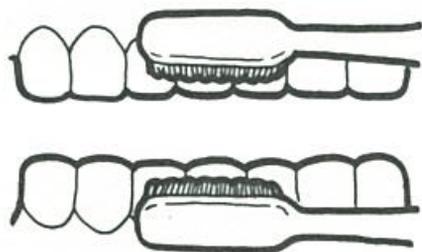

4 ブラシの毛先を歯と歯の間にさしこむと、奥歯の間もきれいに磨けます。



- 磨く場所と症状に合わせて、強(HIGH)、弱(LOW)を使い分けると効果的です。
- 歯ぐきをマッサージするときは、歯ブラシを強く当てすぎないように注意しましょう。
- 3分以上をめやすに、磨き残しがないようにていねいにブラッシングしましょう。