

OMRON

オムロン 電動歯ブラシ ハイパワーシュッシュHT-B142

ハイパワーシュッシュ


OMRON ELECTRIC TOOTHBRUSH

取扱説明書





- お買い上げありがとうございます。
この「取扱説明書」を必ず
お読みいただき、正しくご使用
ください。
- また保証書を兼ねていますので
大切に保管してください。

目次

- 各部の名称……………1
- オムロン電動歯ブラシ
ハイパワーシュッシュの特長……………2
- 正しくご使用いただくために
充電のしかた……………3
- ご使用方法
歯ブラシの使い方……………4・5
- ご使用上の注意……………6・7
- 設置場所に合わせた
ディスプレイ……………8
- お手入れのしかた……………9
- じょうずな歯の磨き方……………10・11・12
- 仕 様……………13

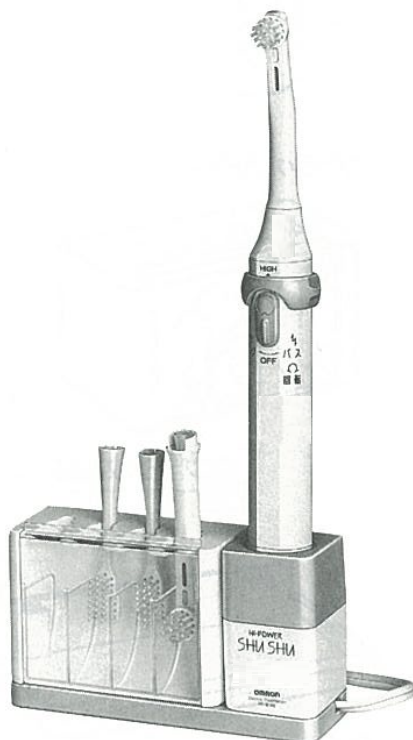

各部の名称

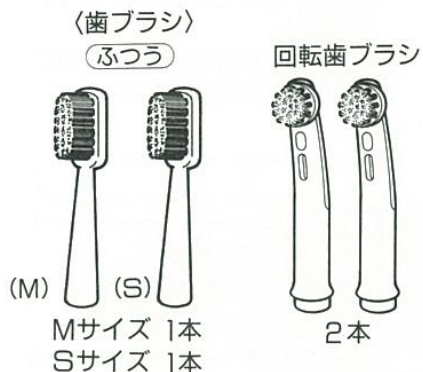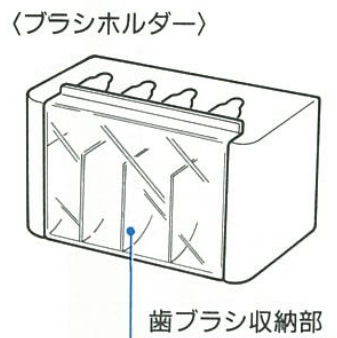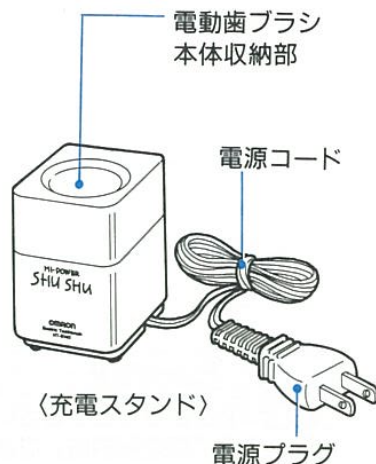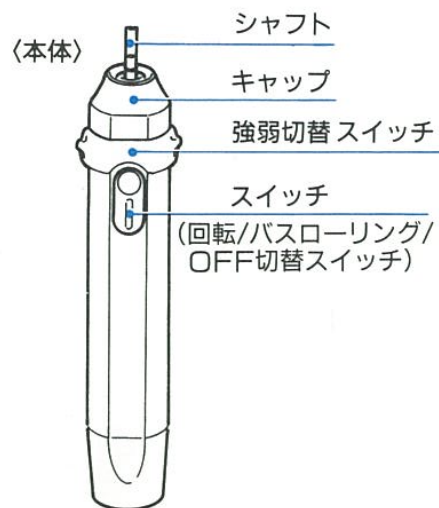

※別売スベア歯ブラシとして、
(やわらかめ)、(かため)が、
ございます。

〈壁取付け用ビス〉4本




〈トレイ〉

1

オムロン電動歯ブラシハイパワースーシュの特長

1 回転歯ブラシで1本1本ていねいに磨きあげ、磨きのこしを防ぎます。


2 歯周病予防に効果的な〈バス法〉と、虫歯予防に効果的な〈ローリング法〉が、スイッチひとつで切替えられます。●回転歯ブラシはバス法のみで使えます。

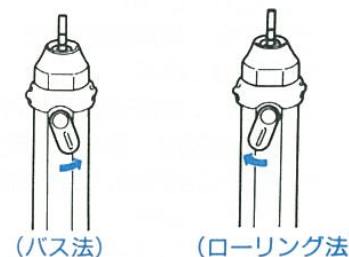

3 ブラシ回転数の強弱 (High/Low) が調整でき、お子様から大人まで使用できます。



4 設置スペースに合わせて、充電スタンドとブラシホルダーを取りはずし自由に付けられます。

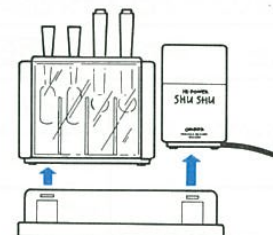

5 防水仕様のため、電動歯ブラシ本体を丸洗いすることができます。




2

正しくご使用いただくために

充電のしかた

1 充電スタンドの電源プラグをコンセントに差し込んでください。

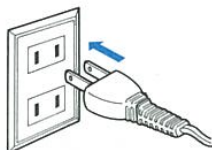


2 電動歯ブラシ本体のスイッチを「OFF」にして、充電スタンドの収納部にセットしてください。



※スイッチが「ON」の状態になっていると充電できません。

※充電中は、電動歯ブラシ本体と充電スタンドが少しあたたかくなりますが、異常ではありません。

3 電動歯ブラシ本体をはずすときは、まっすぐ上に抜いてください。

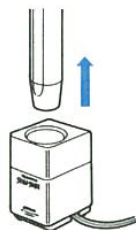

●オムロン電動歯ブラシハイパワーシュッシュは常時充電方式です。ご使用後はつねに、電動歯ブラシ本体を充電スタンドにセットしておいてください。

●14時間の充電で約20分の連続使用ができます。(1回2分として、約10回使用

できます。)

●ご使用になる時は、必ず充電してからご使用ください。お買い求めの時や、長時間充電せずに放置されますと、自己放電のため力が弱くなります。

充電するときの注意

1 暖房器具などの近くや、強い直射日光の当たる場所での充電はさけてください。



2 14時間以上充電してもすぐに動かなくなる場合は、充電電池の交換が必要です。必ずお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。(有料修理)




ご使用方法

回転歯ブラシの使い方

1 回転歯ブラシを右図のように差し込んでください。

●キャップの凹部を回転歯ブラシの凸部に合わせて差し込んでください。

●はずす時は右図のように背側を毛先方向へ押し下げてはずしてください。

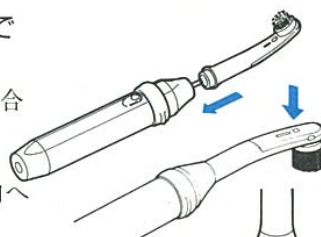

2 「バス」のスイッチを入れてください。


●強弱切替スイッチは(強)で使用するのが適当です。



3 ご使用後、回転歯ブラシと本体を水洗いしてください。

4 回転歯ブラシをブラシホルダーへ収納してください。

●回転歯ブラシの水分をよく切ってからブラシホルダーへ収納してください。

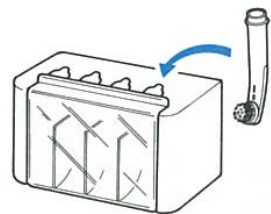

歯ブラシの使い方

1 歯ブラシを右図のように、シャフトに差し込んでください。

●本体のスイッチ側に歯ブラシ毛先を向けてしっかり根元まで差し込んでください。




- 2 「歯みがき剤」をつけ、必ず歯ブラシを口の中に入れてからスイッチを入れてください。



- 3 歯ブラシは、歯と歯ぐきに軽く当てて磨きましょう。
●高速回転で効率よく磨けますので、力を入れる必要はありません。



- 4 スwitchをにすると〈バス法〉、にすると〈ローリング法〉で磨けます。
●磨く場所、目的に合わせて駆動方式をお選びください。効果の高い歯磨きができます。

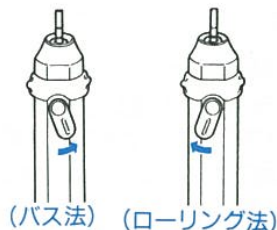

- 5 強弱切替スイッチを、上下に動かし回転数の強弱 (High/Low) を調節します。
●お子様、歯周病の方は、弱 (Low)、大人の方は強 (High) といったように調節してください。




- 6 ご使用後、歯ブラシを洗い、水気をきってからブラシホルダーに保管してください。電動歯ブラシ本体は洗ってから、水気をよく拭き取り、充電スタンドにセットしてください。



●無接点の電磁誘導充電方式ですから、電動歯ブラシ本体ごと丸洗いです。

ご使用上の注意

- 1 歯や歯ぐきの病気で治療中の方は、あらかじめ歯科医にご相談のうえご使用ください。

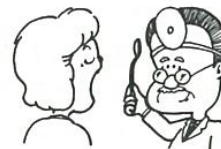

- 2 電動歯ブラシ本体や充電スタンドを落としたり、強い衝撃を与えないでください。



- 3 分解したり、内部にふれたりしないでください。



- 4 充電電源はAC100Vをご使用ください。100Vをこえる高い電圧では絶対にご使用にならないでください。



- 5 長時間で使用にならないときは、電源プラグを抜いてください。電源コードをひっぱらずに、必ずプラグ部分を持って抜いてください。



- 6 電動歯ブラシ本体は防水構造ですが、水中に放置しないでください。また、充電スタンドは浴室など水気の多い場所に設置しないでください。



- 7 直射日光の当たるところや、火気のそば、暖房器具等の近くでの充電、放置はおやめください。



- 8 充電スタンドの収納部（凹部）に、歯みがき剤やホコリがつきますと充電状態が悪くなることがあります。つねに清掃するようにしてください。（水洗いは、おさげください。）



- 9 充電スタンドのお手入れをするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



- 10 充電スタンドの収納部には、電動歯ブラシ本体以外のものは差し込まないでください。



- 11 お子様がお使いになるときは、正しい使い方を教えてください。おもちゃにしたり、誤った使い方をされると危険です。




設置場所に合わせたディスプレイ

オムロン電動歯ブラシハイパワーシュッシュは、充電スタンドとブラシホルダーが取りはずせ、自由に組み立てられるセパレートタイプです。設置スペース、ご家族の人数に合わせてお使いください。

据え置き使用

ブラシホルダー、充電スタンドを右図のようにユニットとしてお使いください。

※2ヶ以上ユニットにする場合は別売ブラシホルダーをお買い求めください。

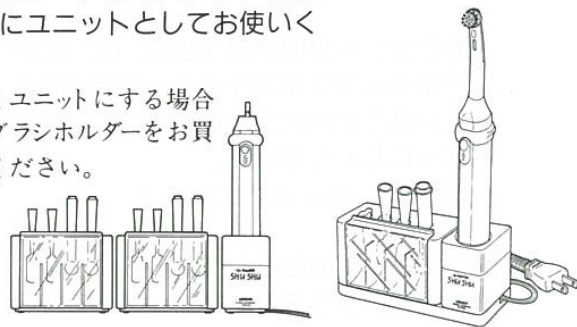

壁かけ使用


洗面台スペースに余裕がない場合は、充電スタンド、及びブラシホルダーを壁に取り付けることもできます。

●充電スタンドの固定


- ①付属のビス2本を木製壁面や柱面に取り付けます。この時ビスは完全にしめつけず、少し浮かせてください。
- ②充電スタンド後面の穴を①のビスに差し込み、下方向に移動させます。

●ブラシホルダーの固定

充電スタンドと同じ方法で固定してください。

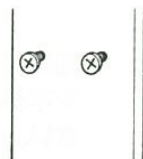

ビスの位置を決める際に、個装箱内部に印刷してあります原寸大の型紙をご利用ください。

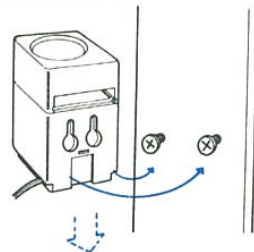


お手入れのしかた

1 電動歯ブラシ本体、ブラシホルダーの汚れは、水で湿らせた布で落とした後、乾いた布で水気をよくふきとってください。ベンジン、シンナーなど揮発性の薬品や熱湯は、プラスチックをいためますので、ご使用にならないでください。




2 歯ブラシのシャフト差し込み口は、汚れが溜まりやすいので、ご使用後、よく水洗いをしてください。

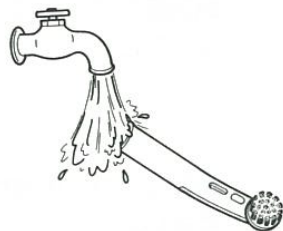

3 本体シャフト部は、汚れが溜まりやすいので1～2週間に1回キャップをはずし、水洗いをしてください。

●キャップは右図のように反時計まわりに回して外してください。

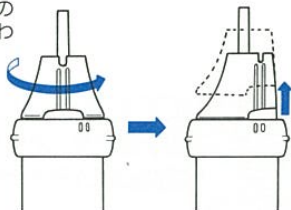

4 充電スタンドは、上部(ブルーの部分)を手前にスライドさせて取り、表面をぬれた布などでふいてください。
※水洗いはおさげください。



5 強弱切替スイッチと本体の間は、汚れが溜まりやすいので1～2週間に1回強弱切替スイッチを本体からはずし、水洗いをしてください。



じょうずな歯の磨き方


ローリング法ブラッシング

〈スイッチをローリング法にして〉

歯と歯の間の食べカスや歯垢を取り除き虫歯を予防します。また、マッサージによる歯周病の予防にも効果的な磨き方です。

1 ブラシの当て方のポイント

歯ブラシの側面を歯の表面に当てます。毛先は歯肉に約2～3mm当てます。歯ブラシは〈ふつう〉〈かため〉のものが良いです。

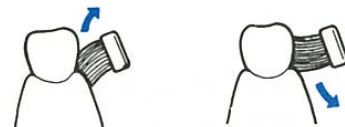

バス法ブラッシング

〈スイッチをバス法にして〉

歯と歯肉の境目(歯肉縁部)の歯垢を取り除くのに適した磨き方であり、同時に歯周病*の予防に効果的です。

※歯周病…歯を支えているその周囲の組織の病気で歯槽膿漏*とよく言われている。

振幅3mmの前後振動で歯垢を除去。当て方により理想のバス磨きができます。

1 ブラシの当て方のポイント

ブラシを歯に対し、45°に傾けて当てます。毛先は歯肉溝に軽く挿入されるような感じにします。歯ブラシは〈やわらかめ〉のものが良いです。




スクラッピング法ブラッシング

〈スイッチをバス法にして〉

歯の表面や、歯と歯の間の歯垢の除去率が高い磨き方です。いろいろな方向から角度をもたせて磨けば、この方法だけでもほぼ完全に歯垢が取れます。スイッチを「バス法」にし、当て方を工夫するとスクラッピング法ができます。

1 ブラシの当て方のポイント

歯の表側では毛先を歯の面に対し直角に当てます。歯の裏側では毛先を歯に対し45°に傾けて当てます。毛先は歯と歯肉の境目すれすれにきちんとくるようにします。歯ブラシは〈ふつう〉〈かため〉のものが良いです。

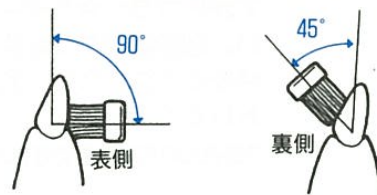

2 磨き方のポイント


歯ブラシを2～3歯ずつ当てて移動させて磨いて下さい。



2 磨き方のポイント

歯ブラシを2～3歯ずつ当てて移動させて磨いて下さい。
加圧振動させるようなイメージです。

* 現在歯周病の方は〈やわらかめ〉のブラシを使用し、
スピードは「弱」で行いましょう。

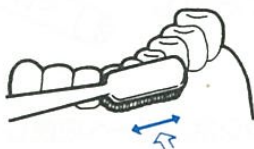

2 磨き方のポイント

歯ブラシを2～3歯ずつ当てて移動させて磨いて下さい。

* 左右に長く引いて歯頸部（歯の根元）を傷つけない
ようにしましょう。





回転歯ブラシ磨き 〈スイッチを回転にして〉

1 回転歯ブラシを図のように歯の噛み合わせ部分に沿って動かします。



2 回転歯ブラシヘッド部を90°の角度に持って歯ぐきのカーブに沿って1本1本歯の表面と内側を磨きます。

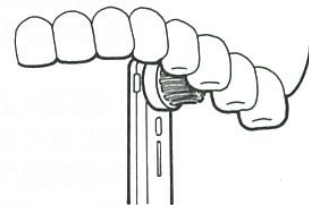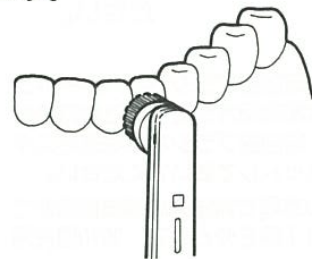

仕 様

電源電圧：AC100V 50/60Hz

消費電力：2.5W

充電方式：電磁誘導方式

充電電流：45mA

充電時間：常時充電(14時間充電)

連続使用時間：約20分(満充電時)

振動数(無負荷時)：強 約3000回/分 弱 約2000回/分

歯ブラシ：Mサイズ (ふつう) 1本

Sサイズ (ふつう) 1本

回転歯ブラシ (ふつう) 2本

大 き さ：電動歯ブラシ本体…φ26×169

(単位mm) 充電スタンド……………幅40×奥行45×高さ71

ブラシホルダー……………幅95×奥行45×高さ73

トレイ……………幅137×奥行48×高さ25

総 重 量：約482g (電動歯ブラシ本体…約150g)

※別売りスペア歯ブラシ各2本入 ¥300(税別)

大 き さ	かたさ	(やわらかめ)		(ふつう)		(かため)	
Mサイズ(大人用)		ホワイト	ピン ク	ホワイト	ピン ク	ホワイト	ピン ク
		イエロー	グリーン	イエロー	グリーン	イエロー	グリーン
Sサイズ(婦人・子供用)		ホワイト	ピン ク	ホワイト	ピン ク	ホワイト	ピン ク
		イエロー	グリーン	イエロー	グリーン	イエロー	グリーン

※別売りスペア回転歯ブラシ2本入 (ふつう) ¥2,300(税別)

※別売りブラシホルダー