

オムロン 電動歯ブラシ ハイパワーシュシュ HT-B143

ハイパワーシュシュ


OMRON ELECTRIC TOOTHBRUSH

取扱説明書



- お買い上げありがとうございます。この「取扱説明書」を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。
- また保証書を兼ねていますので大切に保管してください。

目次


- 各部の名称.....1
- オムロン電動歯ブラシ
ハイパワーシュシュの特長.....2
- 正しくご使用いただくために
充電のしかた.....3
- ご使用方法
歯ブラシの使い方.....4・5
- ご使用上の注意.....6・7
- 設置場所に合わせた
ディスプレイ.....8・9
- お手入れのしかた.....10
- じょうずな歯の磨き方.....11・12
- 仕 様.....13

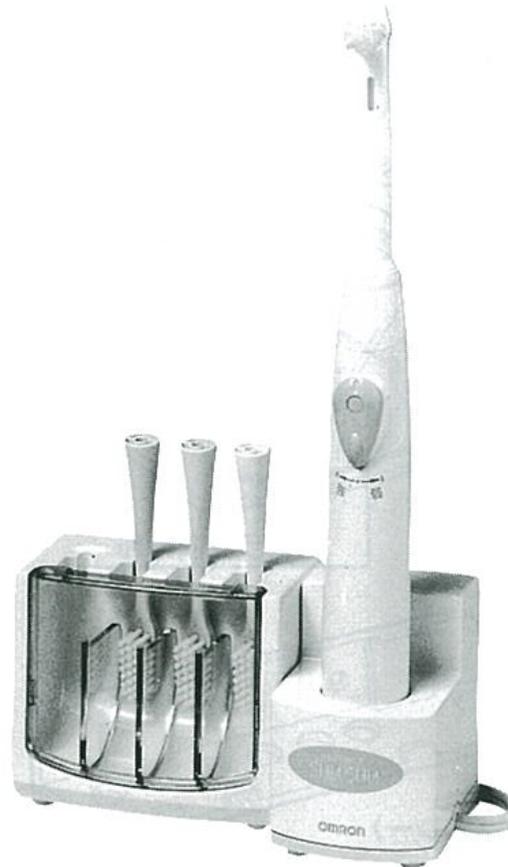

各部の名称

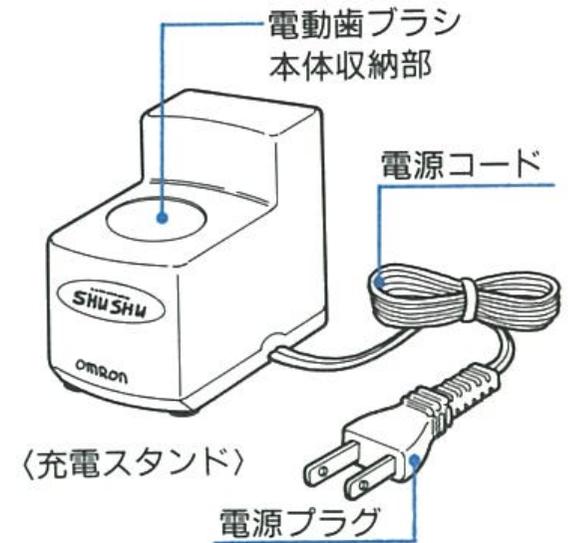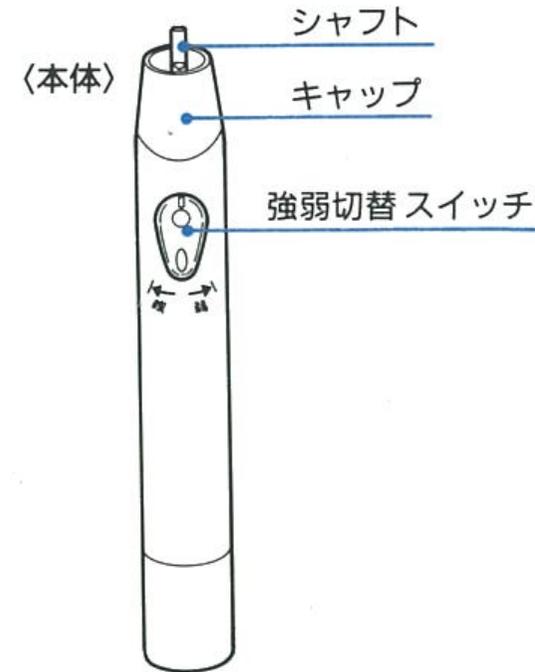

〈ブラシホルダー〉

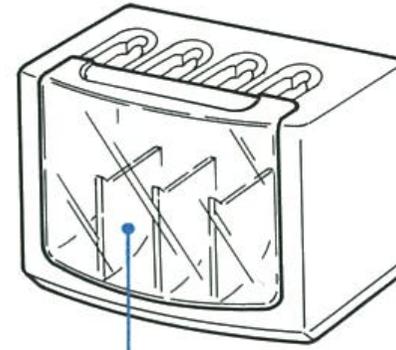


歯ブラシ収納部

〈歯ブラシ〉 (ふつう) 回転歯ブラシ



Mサイズ 3本
(白、ピンク、グリーン) 各1本

※別売スペア歯ブラシとして、
(やわらかめ)、(かため)が、ございます。

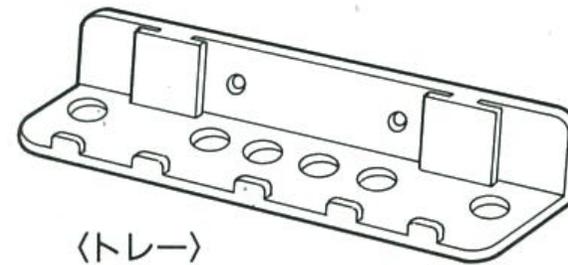

〈トレー〉

〈取付け用板〉 〈壁取付け用ビス〉



ナベビス2本 皿ビス2本

オムロン電動歯ブラシハイパワーシュシュの特長



1 回転歯ブラシで1本1本ていねいに磨きあげ、磨きのこしを防ぎます。

2 歯周病予防に効果的なバス法を採用しています。

3 ブラシ回転の強弱が調整でき、お子様から大人まで使用できます。

4 設置スペースに合わせて、充電スタンドとブラシホルダーを取りはずし自由に取り付けられます。

5 防水仕様のため、電動歯ブラシ本体を丸洗いすることができます。

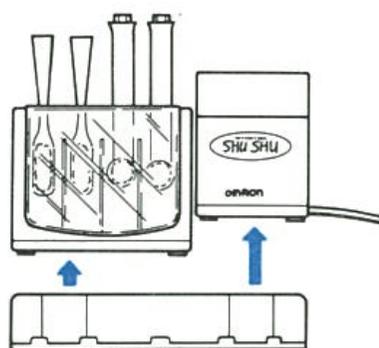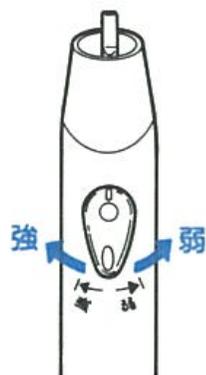

正しくご使用いただくために

充電のしかた


1 充電スタンドの電源プラグをコンセントに差し込んでください。

2 電動歯ブラシ本体のスイッチを「OFF」にして、充電スタンドの収納部にセットしてください。

※スイッチが「ON」の状態になっていると充電できません。

※充電中は、電動歯ブラシ本体と充電スタンドが少しあたたかくなりますが、異常ではありません。

3 電動歯ブラシ本体をはずすときは、まっすぐ上に抜いてください。

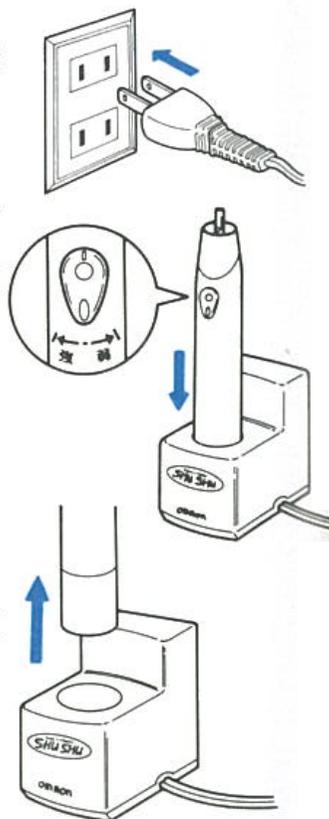


- オムロン電動歯ブラシハイパワーシュシュは常時充電方式です。ご使用後はつねに、電動歯ブラシ本体を充電スタンドにセットしておいてください。
- 10時間の充電で約20分の連続使用ができます。(1回2分として、約10回使用

できます。) ● ご使用になる時は、必ず充電してからご使用ください。お買い求めの時や、長時間充電せずに放置されますと、自己放電のため力が弱くなります。

充電するときのご注意

暖房器具などの近くや、強い直射日光の当たる場所での充電はさけてください。

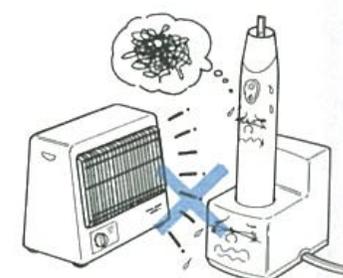


ご使用方法

回転歯ブラシの使い方

1 回転歯ブラシを右図のように差し込んでください。

- 本体キャップ背面の凹部に回転歯ブラシ下の凸部が合うようにして、しっかり差し込みます。

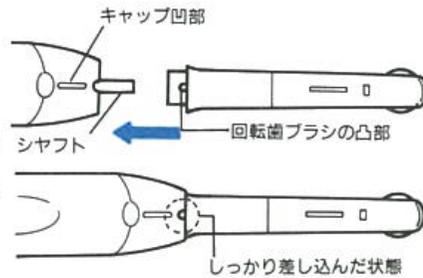


2 ご使用後、回転ブラシと本体を水洗いして、水気を拭き取ってください。

3 本体キャップ背面の凹部を上にして回転歯ブラシを押し下げながら引き抜きます。(まっすぐ引き抜くと歯ブラシの固定フックに引っかかり抜けません)

4 回転歯ブラシをブラシホルダーへ収納してください。

- 回転歯ブラシの水分をよく切ってからブラシホルダーへ収納してください。


5 電動歯ブラシ本体は水気をよく拭き取り、充電スタンドにセットしてください。

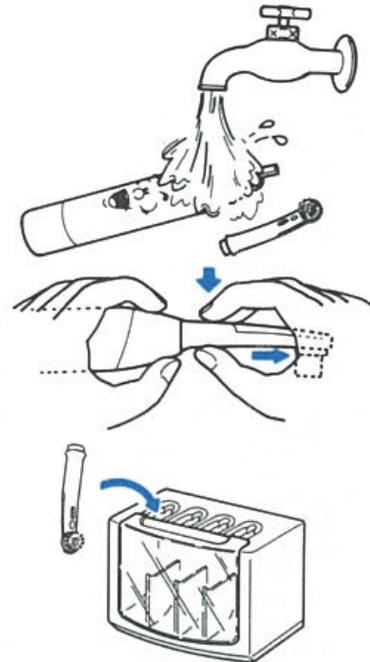

歯ブラシの使い方

1 歯ブラシを右図のように、シャフトに差し込んでください。

- 本体のスイッチ側に歯ブラシ毛先を向けて、しっかり根元まで差し込んでください。

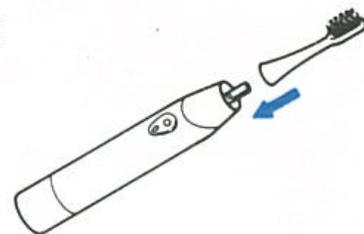

2 「歯みがき剤」をつけて磨くときは、必ず歯ブラシを口の中に入れてからスイッチを入れてください。



3 歯ブラシは、歯と歯ぐきに軽く当てて磨きましょう。

- 高速運動で効率よく磨けますので、力を入れる必要はありません。




4 強弱切替スイッチを、 にすると強、 にすると弱に調節できます。

- 歯と歯ぐきの状態に合わせてお子様や歯周病の方は弱、大人の方は強といったように調節してください。




5 ご使用後、歯ブラシを洗い、水気をきってからブラシホルダーに保管してください。電動歯ブラシ本体は洗ってから、水気をよく拭き取り、充電スタンドにセットしてください。

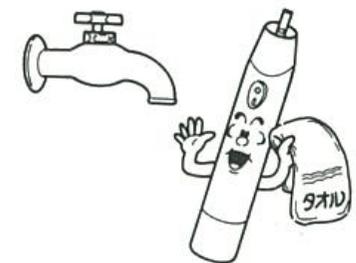


- 無接点の電磁誘導充電方式ですから、電動歯ブラシ本体ごと丸洗いできます。

ご使用上の注意

1 歯や歯ぐきの病気で治療中の方は、あらかじめ歯科医にご相談のうえご使用ください。

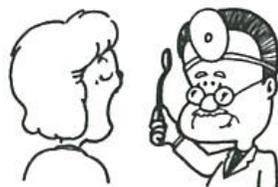


2 電動歯ブラシ本体や充電スタンドを落としたり、強い衝撃を与えないでください。

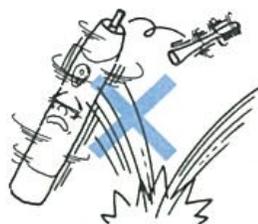

3 分解したり、内部にふれたりしないでください。



4 充電電源はAC100~120Vをご使用ください。120Vをこえる高い電圧では絶対にご使用にならないでください。

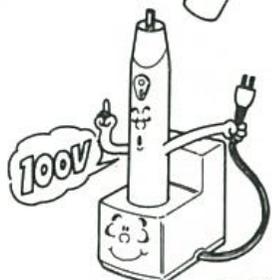

5 長時間ご使用にならないときは、電源プラグを抜いてください。電源コードをひっぱらずに、必ずプラグ部分を持って抜いてください。



6 電動歯ブラシ本体は防水構造ですが、水中に放置しないでください。また、充電スタンドは浴室など水気の多い場所に設置しないでください。



7 直射日光の当たるところや、火気のそば、暖房器具等の近くでの充電、放置はおやめください。



8 充電スタンドの収納部（凹部）に、歯みがき剤やホコリがつかますと充電状態が悪くなる可能性があります。つねに清掃するようにしてください。（水洗いは、おさげください。）



9 充電スタンドのお手入れをするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



10 充電スタンドの収納部には、電動歯ブラシ本体以外のものは差し込まないでください。



11 お子様がお使いになるときは、正しい使い方を教えてください。おもちゃにしたり、誤った使い方をされると危険です。



12 充電スタンドは鉄板の上に設置しないでください。

13 歯に電動歯ブラシを長時間強く押しあてると、歯ぐきに損傷をあたえるおそれがあります。また、電動歯ブラシ本体の破損の原因となりますので、ムリな力を入れて磨かないようにしてください。

設置場所に合わせたディスプレイ

オムロン電動歯ブラシハイパワーシュシュは、充電スタンドとブラシホルダーが取りはずせ、自由に組み立てられるセパレートタイプです。設置スペース、ご家族の人数に合わせてお使いください。


据え置き 使用

ブラシホルダー、充電スタンドを右図のようにユニットとしてお使いください。



充電スタンドの下側からでた電源コードは、お好みの方向の溝にそわせて、フックでとめてください。

トレーの凸部にブラシホルダー、充電スタンドの背面をしっかりと差し込み、左図のユニットとしてお使いください。

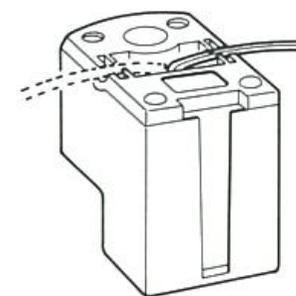

壁かけ 使用

洗面台スペースに余裕がない場合は、充電スタンド、及びブラシホルダーを壁に取り付けることもできます。


●充電スタンド及びブラシホルダーの固定

充電スタンドの固定

①付属の取付け板を皿ビス2本で木製壁面や柱面にしっかり取り付けます。この時、取付け板は平らな面を表にし、幅の狭い方を上にして取り付けてください。



②充電スタンドの後面を取付け板上から下へしっかり差し込みます。

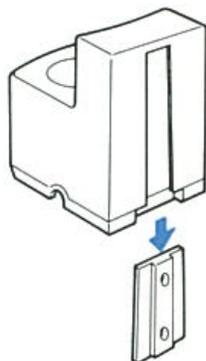


ブラシホルダーの固定

- ①付属のナベビス2本を木製壁面や柱面に約3mmくらいまでねじ込みます。
- ②ブラシホルダーの後面の穴をナベビスにひっかけて固定します。



●トレーを使用して固定する場合

- ①トレーを付属の皿ビス2本で木製壁面や柱面にしっかり取り付けます。
- ②トレーの凸部に充電スタンドとブラシホルダーの背面をしっかりと差し込みます。

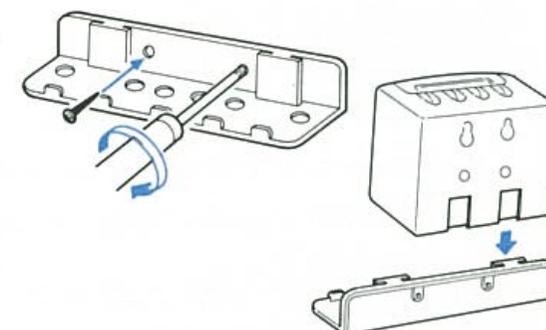


お手入れのしかた

1 電動歯ブラシ本体、ブラシホルダーの汚れは、水で洗った後、乾いた布で水気をよくふきとってください。ベンジン、シンナーなど揮発性の薬品や熱湯は、プラスチックをいためますので、ご使用にならないでください。




2 歯ブラシのシャフト差し込み口は、汚れが溜まりやすいので、ご使用後、よく水洗いをしてください。

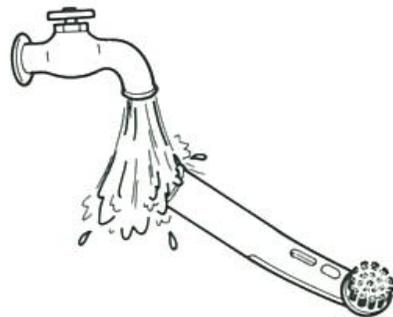


3 本体シャフト部は、汚れが溜まりやすいので1~2週間に1回キャップをはずし、水洗いをしてください。

●キャップは右図のように反時計まわりに回して外してください。

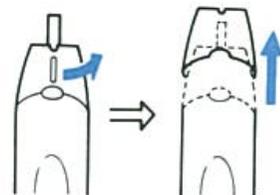

4 充電スタンドは、表面をぬれた布などでふいてください。
※水洗いはおさげください。

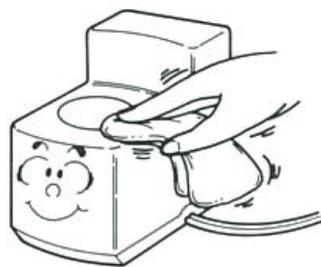


じょうずな歯の磨き方

回転歯ブラシ磨き

1 回転歯ブラシを図のように歯の噛み合わせ部分に沿って動かします。



2 回転歯ブラシヘッド部を90°の角度に持って歯ぐきのカーブに沿って1本1本歯の表面と内側を磨きます。

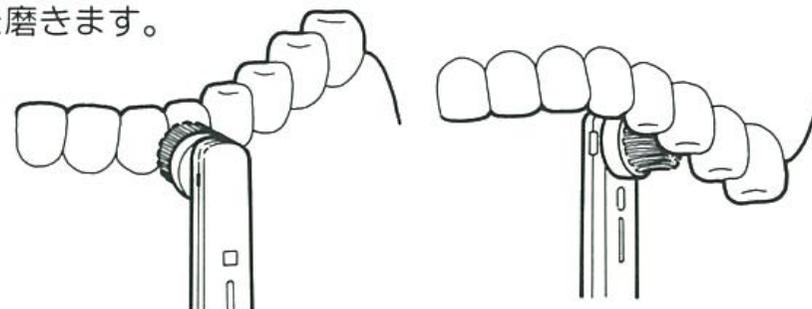


バス法ブラッシング

歯と歯肉の境目(歯肉縁部)の歯垢を取り除くのに適した磨き方であり、同時に歯周病*の予防に効果的です。

*歯周病…歯を支えているその周囲の組織の病気で歯槽膿漏とよく言われている。


振幅3mmの前後振動で歯垢を除去。当て方により理想のバス磨きができます。

1 ブラシの当て方のポイント
ブラシを歯に対し、45°に傾けて当てます。毛先は歯ぐきの溝に軽く挿入させるような感じにします。歯ブラシは〈やわらかめ〉のものをおすすめします。

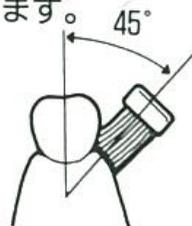

2 磨き方のポイント
歯ブラシを2〜3歯ずつ当て、次の歯に移動させて磨いて下さい。加圧振動させるようなイメージです。


*現在歯周病の方は〈やわらかめ〉のブラシを使用し、スピードは「弱」で行いましょう。

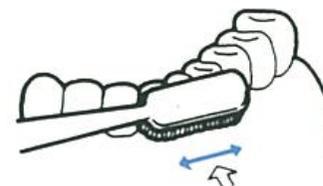

スクラッピング法ブラッシング

歯の表面や、歯と歯の間の歯垢の除去率が高い磨き方です。いろいろな方向から角度をもたせて磨けば、この方法だけでもほぼ完全に歯垢が取れます。


1 ブラシの当て方のポイント
歯の表側は毛先を歯の面に対し直角に当てます。また、歯の裏側は毛先を歯に対し45°に傾けて当てます。毛先は歯と歯ぐきの境目すれすれにきちんとくるようにします。歯ブラシは〈ふつう〉〈かため〉のものをおすすめします。

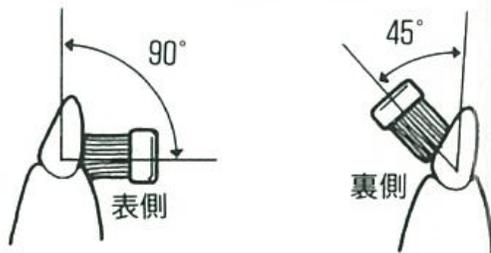

11

2 磨き方のポイント
歯ブラシを2〜3歯ずつ当て、次の歯に移動させて磨いて下さい。

*左右に長く引いて歯頸部(歯の根元)を傷つけないようにしましょう。

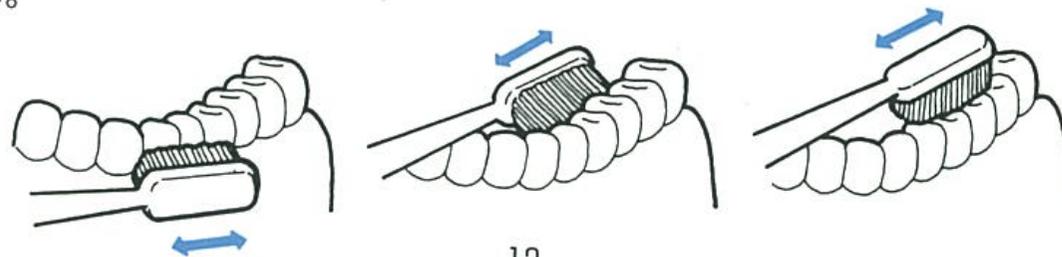

12

仕様

電源電圧：AC100～120V 50/60Hz

消費電力：3.0W

充電方式：電磁誘導方式

充電時間：常時充電(10時間充電)

連続使用時間：約20分(満充電時)

振動数(無負荷時)：強 約3000回/分 弱 約2000回/分

歯ブラシ：Mサイズ (ふつう) 3本

回転歯ブラシ (ふつう) 1本

大きさ：全体寸法…幅136×奥行67×高さ225

(単位mm) 電動歯ブラシ本体…φ26×169

充電スタンド……………幅50×奥行67×高さ70

ブラシホルダー……………幅86×奥行50×高さ70

トレイ……………幅136×奥行26×高さ24

総重量：約470g (電動歯ブラシ本体…約110g)

※別売りスペア歯ブラシ 各2本入 ¥300(税別)

大きさ	かたさ	(やわらかめ)		(ふつう)		(かため)	
		ホワイト	ピンク	ホワイト	ピンク	ホワイト	ピンク
Mサイズ(大人用)		ホワイト	ピンク	ホワイト	ピンク	ホワイト	ピンク
		イエロー	グリーン	イエロー	グリーン	イエロー	グリーン
Sサイズ(婦人・子供用)		ホワイト	ピンク	ホワイト	ピンク	ホワイト	ピンク
		イエロー	グリーン	イエロー	グリーン	イエロー	グリーン

※別売りスペア回転歯ブラシ2本入 (ふつう) ¥2,300(税別)

※改良のため仕様および外観を予告なく変更することがあります。