


取扱説明書

OMRON

オムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B201-T73

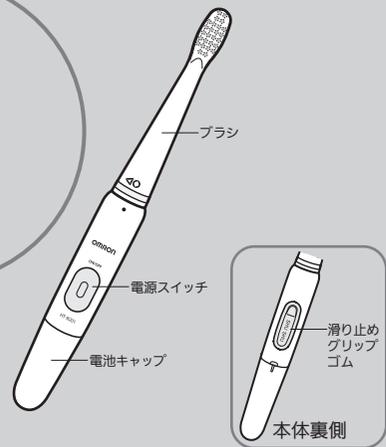

All for Healthcare

使用方法是裏面をご覧ください。

お手入れと保管について

本体はいつも清潔にしてお使いください。汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。汚れがひどいときは、水または薄めた中性洗剤をしみこませた布をかたく絞って拭き取り、やわらかい布で拭き取ってください。

■お手入れのお願い

- 本体を長時間水につけたままにしないでください。
- 本体をアルコール・塩素系殺菌剤・漂白剤・熱湯（40℃を超える湯）につけないでください。
- 本体内部に水などが入らないようにしてください。
- 汚れを落とすとき、ベンジン、シンナー、エタノールなどを使用しないでください。



■保管時のお願い

- 次のようなところに保管しないでください。水のかかるところ／高温・多湿、直射日光、ほこり、塩分などを含んだ空気の影響を受けるところ／傾斜、振動、衝撃のあるところ／化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生するところ／火気の近く
 - 乳幼児の手の届かないところに置いてください。
 - 長期間（3カ月以上）ご使用にならない場合は、電池を取り出して保管してください。
- ※上記の注意事項、その他の正しい使用方法をお守りいただけない場合は、品質に責任を負いかねます。

- このたびは、オムロン商品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
- 安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
- 本書は、いつもお手元においてご使用ください。
- 本書は品質保証書を兼ねています。紛失しないように保管してください。

■ 記載しているイラストはイメージ図です。

乾電池式・音波式

静音

低振動

軽量

安全上のご注意 お使いになる前に必ずお読みください。

- ここに示した内容は、商品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や、他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。
- 表示と意味は次のようになっています。

警告、注意について

- ⚠ **警告** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示します。
- ⚠ **注意** 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容を示します。

* 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

図記号の例

- ⚠ ●記号は強制（必ず守る）を示します。（左図は“必ず守る”）
- ⊘ ○記号は禁止（してはいけない）を示します。（左図は“禁止”）

⚠警告

ブラシは乳幼児の手の届かないところに置いてください。お子様だけでのご使用は避けてください。
・乳幼児が飲み込む原因になります。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。

ブラシは複数人で併用しないでください。

- ・病原菌に感染する原因になります。

次の方は使用しないでください。または使用を歯科医にご相談ください。
□内の感覚が敏感な方／口腔または歯周手術の直後や治療中の方／口腔内に気になる症状（治療中の歯、不安定な入れ歯など）のある方／歯ぐきからの出血が続く、または大量の出血がある方
・傷口を悪化させたり、けがの原因になります。

浴室内などの水のかかる場所で使用しないでください。

- ・感電や故障の原因になります。

⚠注意

電池の⊕⊖極を正しく入れてください。

- ・発熱や液漏れ、破裂などにより本体の破損や、けがの原因になります。

指定の電池を使ってください。

- ・発熱や液漏れ、破裂などにより本体の破損や、けがの原因になります。

長時間（3カ月以上）使用しないときは、電池を取り外してください。また、使用済みの電池はすぐに取り外し、新しいものと交換してください。

- ・液漏れなどにより、本体の破損や、けがの原因になります。

歯や歯ぐきにブラシを強く押しあてたり、毛先以外のプラスチック部分をあてないでください。また、長時間同じ箇所をみがかないでください。
・歯や歯ぐきに損傷を与えたり、故障の原因になります。

人以外に使用しないでください。

また、歯みがきや歯ぐきのブラッシング以外には使用しないでください。

- ・事故やトラブルの原因になります。

本体を踏んだり、落としたり、強い衝撃を与えないでください。

- ・けがや故障の原因になります。

自分で意思表示ができない人は使用しないでください。

- ・事故やトラブルの原因になります。

分解や修理・改造をしないでください。

- ・けがや故障の原因になります。

Ⓞお願い

- 歯みがき以外の目的には、使用しないでください。
- ヤニ取り用・美白用などの歯みがき粉は、研磨剤により歯を研磨する作用が大きいといわれています。歯や歯ぐきを傷める原因になりますので、おすすめできません。
- 個人差はありますが、初めてご使用になる際、独特な刺激を感じることがあります。これは音波式電動歯ブラシ特有の音波振動によるものです。
- ブラシと本体の間にあるゴム部を傷つけないでください。ゴム部
・内部に水が入り、故障の原因になります。



仕様

※お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

販売名	オムロン音波式電動歯ブラシ HT-B201-T73
使用電源	単3形アルカリ乾電池 1個（DC1.5V）
消費電力	約0.75W
振動数	約20,000回/分（無負荷時）
使用環境条件	+5～+35℃/30～85% RH
保管環境条件	-20～+60℃/10～95% RH
質量	本体：約61g（電池含む）、ダブルメリットブラシ：約39g
寸法	全長約224×直径約24mm（ブラシ含む）
付属品	ダブルメリットブラシ（1本）、お試し用電池（単3形アルカリ乾電池 1個）、取扱説明書（品質保証書付き）

別売品

別売品のお求めは、下記オムロンお客様サービスセンターまでお問い合わせください。

品名	型式	品名	型式
トリプルクリアブラシ（2本）	SB-070	ダブルメリットブラシ（1本）	SB-050
極細マイルドブラシ（2本）	SB-080	歯ぐきマッサージブラシ（1本）	SB-060
すき間みがきブラシ（2本）	SB-090		

※ブラシの種類によっては、振動が変化する場合がありますが故障ではありません。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きにしたがった正常な使用状態で、お買い上げ後1年以内に故障した場合には無償修理または交換いたします。
- 無償保証期間内に故障して修理を受ける場合は、オムロンお客様サービスセンターにご連絡ください。
- 無償保証期間内でも次の場合には有償修理となります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地災、公害や電源の異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷。
 - (ニ) 品質保証書の提示がない場合。
 - (ホ) 品質保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - (ヘ) 消耗部品。
 - (ト) 故障の原因が本商品以外に起因する場合。
 - (チ) その他取扱説明書（本書）に記載されていない使用方法による故障および損傷。
- 品質保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- 品質保証書は本規定に明示した期間、条件のもとにおいて無償保証をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 補修用部品は製造打ち切り後、最低5年間保有しています。

品質保証書

このたびは、オムロン商品をお買い求めいただきありがとうございました。商品は厳重な検査をおこない高品質を確保しております。しかし通常のご使用において万一、不具合が発生したときは、保証規定によりお買い上げ後、1年間は無償修理または交換いたします。
※商品の保証は、日本国内での使用の場合に限りです。This warranty is valid only in Japan.

販売名	オムロン音波式電動歯ブラシ HT-B201-T73
ご芳名	
ご住所	
TEL	()
※以下につきましては、必ず販売店にて、記入捺印していただいでください。	
お買い上げ店名	(印)
住所	TEL
お買い上げ年月日	年 月 日
発売元	オムロンヘルスケア株式会社
	〒617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪53番地

製品のお問い合わせ、別売品や消耗部品の求め、修理のご依頼

オムロン お客様サービスセンター

TEL 通話料無料 0120-30-6606

FAX 通話料無料 0120-10-1625


受付時間
(祝日を除く月～金)9:00～19:00
都合により、お休みをいただいたり、受付時間を変更させていただいたりすることがあります。
あらかじめご了承ください。

〒515-8503 三重県松阪市久保町1855-370
ホームページ <http://www.healthcare.omron.co.jp/>
通話料はお客様ご負担となります。(別売品・消耗部品は、インターネットでもお求めいただけます。)

準備


電池を入れる

1 電池キャップを左に回して外す

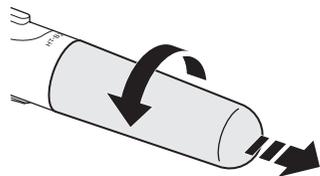

※本体や手が乾いた状態で電池を入れてください。


2 電池を入れる

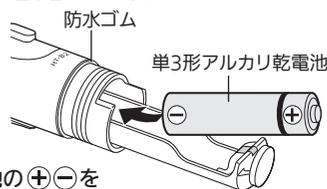

電池の \oplus \ominus を図のように入れてください。

※防水ゴムを取り外さないでください。防水性が損なわれ水洗いの際に水が本体に浸入し、故障の原因になります。

3 電池キャップを右に回して閉める

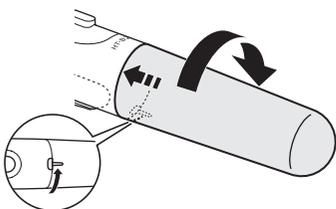

本体裏側のマークがT字形になるような位置まで回してください。

注意

ゆるんだまま使用すると、水が入り、故障の原因になります。

※強く回しすぎないようにしてください。無理に回すと破損する場合があります。

◎単3形アルカリ乾電池1個で約2カ月間*ご使用になれます。
(*振動数20,000回/分以上、室温23℃、1回2分、1日2回使用の場合)

※使用する電池の銘柄、使用時間、使用時のブラッシング圧などにより異なりますので、ブラシの動きが弱くなったら、早めに電池を取り替えてください。

※付属の電池はお試し用です。2カ月以内に寿命が切れることがあります。

※単3形アルカリ乾電池以外は使用しないでください。

※使用済み電池の廃棄方法は、お住まいの市区町村の指導に従ってください。

使い方

個人差はありますが、初めてご使用になる際、独特な刺激を感じることがあります。これは音波式電動歯ブラシ特有の音波振動によるものです。

歯ブラシの使い方

1 口の中にブラシを入れる

※歯みがき粉は適量をつけてください。
※毛先を水で湿らすと効果的です。
※飛び散りを防ぐために、ブラシを口の中に入れてままで電源を入/切ってください。



2 電源スイッチを押す

電源が入ってブラシが振動します。
ブラシをこきざみに動かして歯をみがいてください。



3 みがき終わったら、口の中にブラシを入れたまま電源スイッチを押し、電源を切る

みがき終わったら、口の中にブラシを入れたまま電源スイッチを押し、電源を切る

4 ブラシを本体から外す

ブラシを矢印の方向に軽く回して、ブラシを本体から引き抜きます。
※強く回しすぎないでください。無理に回すと破損する恐れがあります。



5 ブラシを水で洗う

流水で歯みがき粉を落とし、よく振って水気を切ってください。
※本体に付着した水滴は、乾いたやわらかい布で拭き取ってください。




●ブラシの交換

ブラシは消耗部品です。毛先が開いてきたら交換時期です。
※別売品のお求めは裏面をご参照ください。



1 ブラシを外す


①ブラシを矢印の方向に回す

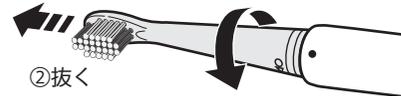

②抜く


2 新しいブラシを取り付ける

①ブラシの凹部と本体の凸部を図のように合わせ、ブラシを本体に差し込む

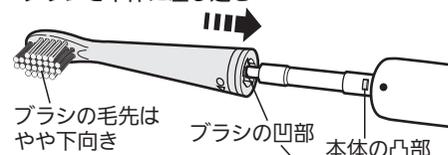


ブラシの毛先はやや下向き


ブラシの凹部 本体の凸部

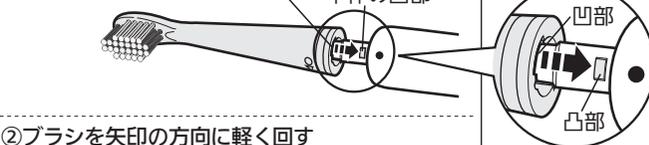

②ブラシを矢印の方向に軽く回す

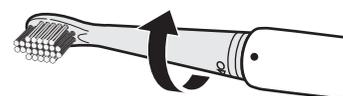

③ブラシの○印と本体の○印を合わせる

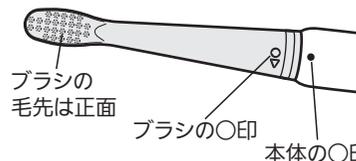

ブラシが固定されます。

※ブラシの凹部と本体の凸部を合わせないと、ブラシは固定できません。また、向きを合わせないで無理に差し込むとブラシが破損する場合があります。

◎単3形アルカリ乾電池1個で約2カ月間*ご使用になれます。
(*振動数20,000回/分以上、室温23℃、1回2分、1日2回使用の場合)

※使用する電池の銘柄、使用時間、使用時のブラッシング圧などにより異なりますので、ブラシの動きが弱くなったら、早めに電池を取り替えてください。

※付属の電池はお試し用です。2カ月以内に寿命が切れることがあります。

※単3形アルカリ乾電池以外は使用しないでください。


※使用済み電池の廃棄方法は、お住まいの市区町村の指導に従ってください。

上手なみがき方

ブラシの毛先が歯や歯ぐきに触れるように軽くあててください。


歯面やかみ合わせ面

歯に対してブラシを90°にあて、1~2歯ずつヨコ方向に動かしてみがいてください。

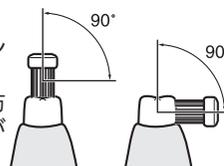

歯と歯ぐきの境目

毛先が歯ぐきの溝に入るよう45°に傾けてください。

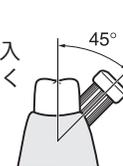

歯面の裏や歯並びの悪いところ

歯ブラシをタテにあて、歯面に沿って1本ずつみがいてください。

