

# 取扱説明書

オムロン 音波式電動歯ブラシ

HT-B2140  
HT-B2160



このたびは、オムロン製品をお買い上げいただきありがとうございます。

- 安全に正しくお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。
- 本書はいつもお手元においてご使用ください。
- 本書は品質保証書を兼ねています。紛失しないように保管してください。
- 本書に記載しているイラストはイメージ図です。

## 1 安全上のご注意

お使いになる前に必ずお読みください。ここに示した内容は、製品を安全に正しくご使用いただき、使用者や他の人々への危害、財産への損害を未然に防止するためのものです。

### 警告、注意について

	<b>警告</b> 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定されます。
	<b>注意</b> 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う、または物的損害*の発生が想定されます。

\* 物的損害とは、家屋や家財および家畜やペットに関わる拡大損害を示します。

### 保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きにしたがった正常な使用状態で、お買い上げ後1年以内に故障した場合には無償にて修理、また故障内容や製品によっては、交換あるいは他機種との交換をいたします。
  - 無償保証期間内に故障して修理を受ける場合は、オムロンお客様サービスセンターまたはご購入の販売店にご連絡ください。
  - 無償保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
    - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
    - (ロ) お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
    - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷。
  - 品質保証書の提示がない場合。
  - 品質保証書にお買い上げ年月日、販売店名の記入のない場合、または販売店で発行されたお買い上げを証明するものがない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - 消耗部品。
  - 故障の原因が本製品以外に起因する場合。
  - その他取扱説明書に記載されていない使用方法による故障および損傷。
- 品質保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- 品質保証書は本規定に明示した期間、条件のもとにおいて無償保証をお約束するものではありません。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
6. 補修対応期間は製造打ち切り後5年となります。

### 品質保証書

このたびは、オムロン製品をお買い求めいただきありがとうございます。製品は厳重な検査を行い高品質を確保しております。しかし通常のご使用において万一、不具合が発生しましたときは、保証規定によりお買い上げ後、1年間は無償にて修理、また故障内容や製品によっては、交換あるいは他機種との交換をいたします。

※ 製品の保証は、日本国内での使用の場合に限ります。 ※ 以下のいずれかを必ず行ってください。  
・販売店で以下に記入、捺印していただく。  
・販売店で発行されたお買い上げを証明するもの（シールやシールでも可）を本品質保証書に貼付または保管いただく。

販売商品コード HT-B2140-G/PK、HT-B2160-G

お買い上げ店名

発売元  
オムロンヘルスケア株式会社  
〒617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪53番地

## OMRON

3153462-8A

## 警告

次の方は使用しないでください。または使用前に歯科医にご相談ください。

- □内の感覚が敏感な方
- □腔または歯周の手術の直後や治療中の方
- □腔内に気になる症状（治療中の歯、不安定な入れ歯など）のある方
- 歯茎からの出血が続く、または大量の出血がある方  
▶ 傷口の悪化や、けがの原因になります。

電池やブラシは乳幼児の手の届かないところに置き、子どもだけでの使用は避けてください。※3歳未満の乳幼児への使用は避けてください。

- ▶ けがの原因になります。万一、電池やブラシを飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。

ブラシは複数の方で共用しないでください。

- ▶ 病原菌に感染する原因になります。

植込み型医療機器（心臓ペースメーカーなど）の装着部位から10 cm以内に近づけないでください。

- ▶ 本体に内蔵されている磁石の影響により、植込み型医療機器の誤動作をまねく恐れがあります。

浴室内などの水のかかる場所で使用しないでください。

- ▶ 感電や故障の原因になります。

## 注意

電池の⊕⊖極を正しく入れてください。指定の電池を使用し、違う種類の乾電池や、古い乾電池と新しい乾電池を混ぜて使用しないでください。

- ▶ 発熱や液漏れ、破裂などにより、本体の破損やけがの原因になります。

長期間使用しないときは、電池を取り外してください。また、使用済みの電池はすぐに取り外し、新しいものと交換してください。

- ▶ 液漏れなどにより、本体の破損やけがの原因になります。電池の液が目に入ったり、皮膚に付着した場合は、すぐに多量の水で洗い流し、医師の治療を受けてください。

歯や歯茎にブラシを強く押し当てたり、毛先以外のプラスチック部分を当てないでください。また、長時間同じ箇所を磨かないでください。

- ▶ 歯や歯茎を傷つける原因、本体が故障する原因になります。

人以外に使用しないでください。

- ▶ 事故やトラブルの原因になります。

本体を踏んだり、落としたり、強い衝撃を与えないでください。

- ▶ けがや故障の原因になります。

自分で意思表示ができない人には使用しないでください。

- ▶ 事故やトラブルの原因になります。

分解や修理・改造をしないでください。


- ▶ けがや故障の原因になります。

## お願い

- 歯みがき以外の目的には、使用しないでください。


- 歯みがき粉を使用する場合は、研磨剤が入っていないものを使用してください。研磨剤が入っている歯みがき粉（ヤニ取り用・美白用など）は、歯や歯茎を傷める原因になります。ご使用の場合は、歯科医にご相談ください。

- ステムと本体の間にあるゴム部を傷つけたり、ステムに必要以上に力を加えたりしないでください。

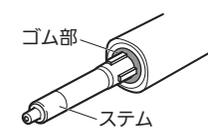

- ▶ 内部に水が入り、故障の原因になります。

## 2 各部の名称と付属品

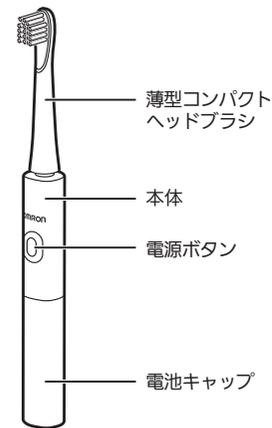


### ■ 単4形アルカリ乾電池 (お試し用)



## 3 電池を入れる


本体と手が乾いた状態で電池を入れてください。

### 1 電池キャップを回して外す

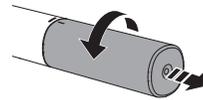

### 2 電池を入れる


電池の⊕⊖を図のように入れてください。

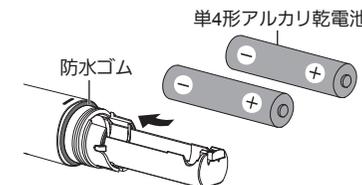

- 2個同時に新しい電池（同じ種類のもの）と交換してください。
- 単4形アルカリ乾電池以外は使用しないでください。
- 使用済み電池の廃棄方法は、お住まいの市区町村の指導にしたがってください。
- 防水ゴムを取り外さないでください。防水性が損なわれ水洗いの際に水が本体に浸入し、故障の原因になります。

## 3 電池キャップを回して閉める

本体裏側のマークがになるところまで回してください。

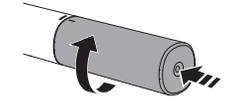

- 電池キャップが回らなくなるまで完全に閉めてください。ゆるんだまま使用すると、水が入り、故障の原因になります。
- 強く回しすぎないようにしてください。無理に回すと破損する場合があります。

## 連続使用時間について

単4形アルカリ乾電池2個で約2.5カ月間使用できます。（室温23℃、1回2分、1日2回使用の場合）

- 使用する電池の銘柄、使用時間、ブラシにかかる圧力などにより異なりますので、ブラシの振動が弱くなったら、早めに電池を交換してください。
- 付属の電池はお試し用です。2.5カ月以内に寿命が切れることがあります。

## 4 ブラシを取り付ける

### 1 ブラシを本体に差し込む

ブラシを本体正面に向け、カチッと音がするまでまっすぐに差し込みます。



- ななめに差し込んだり、回しながら差し込んだりすると、本体やブラシが破損する恐れがあります。

裏面に続きます


## 5 歯ブラシを使う

### ① 口の中にブラシを入れる

水や歯みがき粉などの飛び散りを防ぐために、口の中にブラシを入れてから電源ボタンを押してください。

### ② 電源ボタンを押す

ブラシが振動します。ブラシを歯に軽く当て、横方向に移動させながら磨いてください。

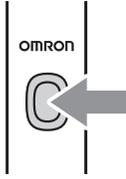

- 初めてご使用になる際、独特な刺激を感じることがあります。これは音波式電動歯ブラシ特有の音波振動によるものです。
- ブラシの種類によっては、振動が変化する場合がありますが故障ではありません。
- 使用推奨時間は1回2分です。


### ③ 磨き終わったら、電源ボタンを押して電源を切る

- 電源を入れてから約3分で自動的に電源が切れます。歯みがきを継続する場合は、もう一度電源を入れてください。

## 上手なみがき方


### ■ ブラシの当て方

ブラシの毛先が歯や歯茎に触れるように軽く当ててください。

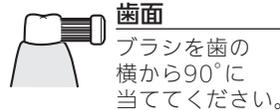


#### 歯面

ブラシを歯の横から90°に当ててください。

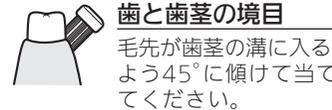


#### 歯と歯茎の境目

毛先が歯茎の溝に入るよう45°に傾けて当ててください。

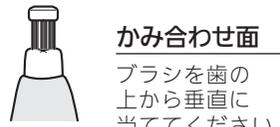

#### かみ合わせ面

ブラシを歯の上から垂直に当ててください。

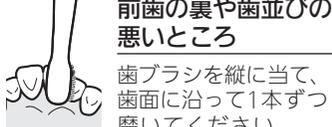

#### 前歯の裏や歯並びの悪いところ


歯ブラシを縦に当て、歯面に沿って1本ずつ磨いてください。

### ■ ブラシの動かし方

手磨きのように動かさず、1、2歯ずつ横方向に移動させながら磨いてください。

## 6 使い終わったら

### ① 本体からブラシをまっすぐ引いて外す

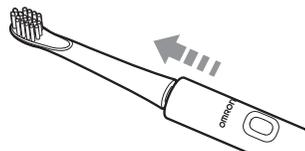

### ② 外したブラシを水で洗う

水洗い後は、よく振って水気を切ってください。

### ③ 本体を水で洗う

- 電池キャップがゆるんだ状態、または外れた状態で洗わないでください。
- ステムと本体の間にあるゴム部を傷つけたり、ステムに必要以上に力を加えたりしないでください。ゴム部に傷がつくと、本体内部に水が入り、故障の原因となります。

### ④ 水分を拭き取り保管する

本体は乾いたやわらかい布で拭き、風通しのよいところに置いてください。

## 7 お手入れと保管

### お手入れについて

- ブラシ、本体はいつも清潔にしてお使いください。
- 歯みがき粉が付着した状態で放置すると、本体表面が劣化する場合があります。
- 汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
- 汚れがひどいときは、水または薄めた中性洗剤をしみこませた布をかたく絞って拭き取り、やわらかい布でから拭きしてください。
- 本体内部に水などが入らないように注意してください。
- 水をためてつけ洗いや、水の中に放置したりしないでください。
- ブラシ、本体をアルコールに浸したり、40℃を超えるお湯で消毒しないでください。
- 消毒液をつけた布で拭かないでください。
- 汚れを落とすとき、ベンジン、シンナー、エタノールなどを使用しないでください。



### 保管について

- 次のようなところに保管しないでください。
  - 水のかかるところ
  - 高温、多湿、直射日光、ほこり、塩分などを含んだ空気の影響を受けるところ
  - 振動、衝撃のあるところ
  - 化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生するところ
- 乳幼児の手の届かないところに置いてください。
- 長期間ご使用にならない場合は、電池を取り出して保管してください。

上記の注意事項、その他の正しい使用方法をお守りいただけない場合は、品質に責任を負いかねます。

## 8 おかしいな?と思ったら

こんなとき	原因・対処のしかた
ブラシの動作が不安定	ブラシが本体に正しく取り付けられていない。 ▶ ブラシを正しく取り付けてください。 (☞ ④ ブラシを取り付ける)
使用可能時間が短い、ブラシの振動が弱い	電池の残量が減っている。 ▶ 電池を交換してください。 (☞ ③ 電池を入れる)
電源ボタンを押しても動かない	電池の向きが間違っている。 ▶ 電池を正しく入れ直してください。 (☞ ③ 電池を入れる)
本体があたたかい	製品の特性上少しあたたかくなる。 ▶ 故障ではありません。また本製品の寿命にも影響ありません。
歯茎から出血する、振動が強くて歯茎が痛い	電動歯ブラシを使用し始めてから数日間は歯茎から若干出血することがあります。 ▶ 通常、出血は数日で止まります。出血が2週間以上続く場合は使用を中止し、歯科医の診断を受けてください。  歯ブラシが合っていない。 ▶ やさしくブラッシングができる歯周ケアブラシ (SB-182) の使用をおすすめします。

以上の方法でも解決しないときは、オムロンお客様サービスセンター (☎ 0120-30-6606) にお問い合わせください。

## 9 仕様

販売名	オムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B2140/HT-B2160
電源	単4形アルカリ乾電池2個 (DC3.0V)
消費電力	約0.75W
電池寿命	約2.5カ月間 (単4形アルカリ乾電池2個で室温23℃、1回2分、1日2回使用の場合)
振動数	約20000回/分 ※歯垢除去ブラシ使用時
使用環境条件	+5~+35℃ / 30~85% RH
保管環境条件	-20~+60℃ / 10~95% RH
質量	本体: 約60g (ブラシ・乾電池含む)
外形寸法	本体: 全長約200 (ブラシ含む) × 幅約21.8 × 奥行約21.8mm

付属品	薄型コンパクトヘッドブラシ (1本)、単4形アルカリ乾電池2個 (お試し用)、取扱説明書 (品質保証書付き)
-----	--

お断りなく仕様を変更することがあります。

## 別売品について

ブラシは消耗部品です。3カ月を目安に新しいブラシと交換してください。3カ月以内でも毛先が開いたら交換時期です。別売品をお求めください。別売品は販売店もしくはオムロンヘルスケアストア <https://store.healthcare.omron.co.jp/> でお買い求めください。

品名	型式
歯垢除去ブラシ (2本)	SB-172
歯周ケアブラシ (2本)	SB-182
すき間みがきブラシ (2本)	SB-192
幅広プレミアムブラシ (2本)	SB-122
ステイン除去ブラシ (2本)	SB-132
薄型コンパクトヘッドブラシ (2本)	SB-242

ご購入の際は必ずタイプをご確認いただき、**タイプ2**の替えブラシをご利用ください。異なるタイプでは使用できません。

製品のお問い合わせ、別売品や消耗品のご注文、修理のご依頼は

オムロンヘルスケア お客様サポート  
<https://store.healthcare.omron.co.jp/support/>

オムロン お客様サービスセンター

TEL 0120-30-6606 (通話料無料)

FAX 0120-10-1625 (通信料無料)

受付時間 9:00~17:00 (祝日を除く月~金)

〒515-8503 三重県松阪市久保町1855-370

※都合により、お休みや受付時間の変更をさせていただく場合があります。

