




オムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B302

Mediclean メディクリーン 取扱説明書

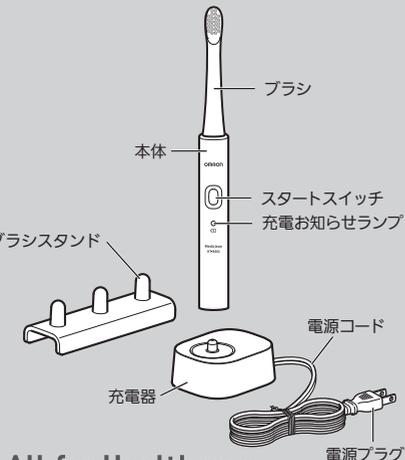

All for Healthcare

保証規定
<p>1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きにしたがった正常な使用状態で、お買い上げ後1年以内に故障した場合には無償修理または交換いたします。</p> <p>2. 無償保証期間内に故障して修理を受ける場合は、オムロンお客様サービスセンターにご連絡ください。</p> <p>3. 無償保証期間内でも次の場合には有償修理になります。</p> <p>(イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。</p> <p>(ロ) お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。</p> <p>(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地災、公害や電源の異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷。</p> <p>(ニ) 品質保証書の提示がない場合。</p> <p>(ホ) 品質保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。</p> <p>(ヘ) 消耗部品。</p> <p>(ト) 故障の原因が本製品以外に起因する場合。</p> <p>(チ) その他取扱説明書に記載されていない使用方法による故障および損傷。</p> <p>4. 品質保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。</p> <p>5. 品質保証書は本規定に明示した期間、条件のもとにおいて無償保証をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。</p> <p>6. 補修用部品は製造打ち切り後、最低5年間保有しています。</p>

品質保証書	
<p>このたびは、オムロン製品をお買い求めいただき、ありがとうございました。製品は厳重な検査をおこなひ、高品質を確保しております。しかし、通常のご使用において、万一不具合が発生しましたときは、保証規定により、お買い上げ後1年間は無償修理または交換いたします。</p> <p>※製品の保証は、日本国内での使用の場合に限ります。 ※以下につきましては、必ず販売店にて、This warranty is valid only in Japan. 記入捺印していただきたいと思います。</p>	
販売名 オムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B302	お買い上げ店名
ご芳名	住 所
ご住所	TEL ()
TEL ()	お買い上げ年月日 年 月 日
<p>発売元 オムロンヘルスケア株式会社 〒617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪53番地</p>	

製品のお問い合わせ、別売品や消耗品のご注文、修理のご依頼は	
オムロンヘルスケア お客様サポート http://www.healthcare.omron.co.jp/support/	消耗品・別売品のご注文は http://store.healthcare.omron.co.jp/
オムロン お客様サービスセンター TEL 0120-30-6606 (通話料無料) FAX 0120-10-1625 (通話料無料) 受付時間 9:00~19:00(祝日を除く月~金) 〒515-8503 三重県松阪市久保町1855-370 ※都合により、お休みや受付時間の変更をさせていただきます場合があります。	

1 安全上のご注意

- ここに示した内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や、他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。
- 表示と意味は次のようになっています。

警告、注意について
<p>⚠警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示します。</p> <p>⚠注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容を示します。</p>

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

図記号の例
<p>! ●記号は強制(必ず守る)を示します。(左図は必ず守る)</p> <p>⊘ ○記号は禁止(してはいけない)を示します。(左図は“禁止”)</p>

<p>⚠警告</p> <p>次の方は使用しないでください。または使用前に歯科医にご相談ください。</p> <p>■口内の感覚が敏感な方 ■口腔または歯周の手術直後や治療中の方</p> <p>■口腔内に気になる症状（治療中の歯、不安定な入れ歯など）のある方</p> <p>■歯茎からの出血が続く、または大量の出血がある方</p> <p>・傷口の悪化や、けがの原因になります。</p>	!
<p>ブラシは乳幼児の手の届かないところに置いてください。また、3歳未満のお子様へのご使用は避けてください。</p> <p>・乳幼児、お子様のけがの原因になります。</p>	!
<p>ブラシは複数の人で共用しないでください。</p> <p>・病原菌に感染する原因になります。</p>	!
<p>コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100～110V以外では使用しないでください。</p> <p>・たこ足配線などにより定格を超えると、火災の原因になります。</p>	⊘
<p>傷んだ電源コードや電源プラグは使用しないでください。</p> <p>・感電やショート、発火の原因になります。</p>	⊘
<p>充電器を水洗いしないでください。</p> <p>・感電の原因になります。</p>	⊘
<p>本体は廃棄のとき以外は絶対に分解しないでください。</p> <p>・けがや故障の原因になります。</p>	⊘
<p>本体や充電器は浴室内などの水のかかる場所で使用しないでください。</p> <p>・感電や故障の原因になります。</p>	⊘
<p>ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。</p> <p>・感電やけがの原因になります。</p>	⊘

お使いになる前に必ず参照してください。

注意	
<p>本体を廃棄するときは、取り外した充電電池の⊕⊖端子にセロハンテープやシールなどを貼り付けてください。</p> <p>・ショートにより、火災の原因になります。</p>	!
<p>電源プラグのほごりは拭き取ってください。</p> <p>・ほごりに湿気が加わると、感電やショート、発火の原因になります。</p>	!
<p>電源プラグはしっかり根元まで差し込んでください。</p> <p>・感電やショート、発火の原因になります。</p>	!
<p>電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らず、電源プラグを持って抜いてください。</p> <p>・電源コードの断線やショートにより、火災や感電の原因になります。</p>	!
<p>電源コードの取り扱いには以下の項目に注意してください。</p> <p>■傷つけない ■破損させない ■加工しない ■無理に曲げたり、引っ張らない ■ねじらない ■使用時は束ねない ■重い物を載せない ■挟み込ませない</p> <p>・感電や火災、故障の原因になります。</p>	!
<p>1週間以上ご使用にならないときは電源プラグを抜いてください。</p> <p>・絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。</p>	!
<p>充電器のお手入れの前には、電源プラグを抜いてください。</p> <p>・感電やけがの原因になります。</p>	!
<p>専用の充電器以外は使用しないでください。</p> <p>・充電電池が発熱し発火や感電、故障の原因になります。</p>	!
<p>歯や歯茎にブラシを強く押しあてたり、毛先以外のプラスチック部分をあてたりしないでください。また、長時間同じ箇所を磨かないでください。</p> <p>・歯や歯茎に損傷を与えたり、故障の原因になります。</p>	!
<p>人以外に使用しないでください。</p> <p>・事故やトラブルの原因になります。</p>	⊘
<p>本体や充電器を踏んだり、落としたり、強い衝撃を与えないでください。</p> <p>・けがや故障の原因になります。</p>	⊘
<p>自分で意思表示ができない人は使用しないでください。</p> <p>・事故やトラブルの原因になります。</p>	⊘
<p>充電電池を火の中に入れてください。</p> <p>・破裂してけがなどの原因になります。</p>	⊘

お願い
<ul style="list-style-type: none"> ●歯みがき以外の目的には、使用しないでください。 ●充電器を鉄板など金属板の上で使用しないでください。 <ul style="list-style-type: none"> ・充電効率が落ちます。 ●歯みがき粉を使用される場合は、研磨剤が入っていない一般的な歯みがき粉を使用してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ヤ二取り用・美白用などの歯みがき粉は、研磨剤により歯を研磨する作用が大きいためといわれています。歯や歯茎を傷める原因になりますので、おすすめてできません。ご使用の場合は、歯科医にご相談ください。 ●個人差はありますが、初めてご使用になる際、独特な刺激を感じる場合があります。これは音波式電動歯ブラシ特有の音波振動によるものです。 ●ステムと本体の間にあるゴム部を傷つけたり、ステムに必要以上に力を加えたりしないでください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ゴム部に傷がつくと、本体内部に水が入り、故障の原因となります。




2 仕様

販売名	オムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B302
電 源	AC100-110 V 50/60 Hz
消 費 電 力	約1W (充電時)
充 電 方 式	電磁誘導方式
使 用 電 池	ニッケル水素電池 (Ni-MH 2.4 V)
充 電 時 間	約10時間 (室温23℃にて)
連続使用時間	<p>約30分 (室温23℃にて満充電後100g負荷時)</p> <p>・充電電池の特性として、充電を繰り返すたびに1回の使用時間は次第に短くなります。満充電しても使用時間が購入後初めてのご使用時に比べて著しく短くなったら、電池の寿命です。</p> <p>・電池は交換できません。寿命がきたら、電池を取り出しリサイクル協力店へお持ちください。</p>
モ ー ド	クリーンモード：通常の歯みがきに使用するモード
振 動 数	クリーンモード：約25,500回/分
使用環境条件	+5～+35℃ /30～85% RH
保管環境条件	-20～+60℃ /10～95% RH
質 量	本体：約46g (ブラシ取付状態)、充電器：約115g
寸 法	本体：全長約195 (ブラシ含む) ×幅約18.8 ×奥行約18.8 mm
	充電器：幅約51 ×高さ約35.5 ×奥行約63mm (電源コードの長さ：約120cm)
付 属 品	ブラシスタンド：幅約96 ×高さ約27 ×奥行約30 mm
	トリプルクリアブラシ (1本)、充電器 (1台)、ブラシスタンド (1台)、取扱説明書 (品質保証書付き)

3 充電する

1. 電源プラグをコンセントに接続する
2. 本体を充電器に置く

充電が開始されると、充電お知らせランプが点灯します。充電が完了すると、充電お知らせランプが消灯します。

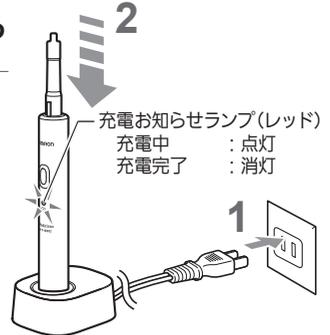

※充電お知らせランプの点滅から充電完了までは、約10時間必要です。
 ※充電環境や充電残量により、10時間以内に充電が完了する場合があります。
 ※充電中に本体と充電器が少しあたたかくなることがありますが、異常ではありません。
 ※ぬれた状態で充電しないでください。感電・故障の原因になります。

4 ブラシの取り付け方

1. ブラシを本体に差し込む

ブラシを本体正面に向け、カチッとなるまでまっすぐに差し込みます。

※ブラシは本体に真っすぐ差し込んでください。ななめに差し込んだり、回しながら差し込んだりすると、本体/ブラシが破損する恐れがあります。



■替えブラシ（タイプ2）について

トリブルクリアブラシ SB-072	側面の植毛：白
らせん状の「スパイラル毛」、歯周ポケットに届く「W メリット毛」、歯の表面を磨く「ひし形毛」の3種類の植毛で歯垢を除去します。しっかり磨きたい方におすすめです。	
極細マイルドブラシ SB-082	
2種類の微細毛が歯面の凹凸や歯のすき間、歯周ポケットの歯垢をやさしく取り除きます。	
すき間みがきブラシ SB-092	
奥歯にも届きやすいL字型で、みがきにくい歯間や歯並びの悪い所の歯垢をかき出します。歯列矯正されている方にもおすすめです。	
極細スパイラルブラシ SB-032	側面の植毛：緑
らせん状の「極細スパイラル毛」の表面の凹凸が、歯の表面に付着したステイン*を効果的にかきとります。 *ステイン：歯の表面に付着した着色汚れ	
トリブルクリアブラシコンパクト SB-042	
カタチの異なる3種類の植毛が、効果的に歯垢を除去します。お口の小さな方、奥歯をしっかり磨きたい方におすすめです。	

※ブラシの種類によっては、振動が変化する場合がありますが故障ではありません。
※ブラシは消耗部品です。毛先が開いてきたら交換時期ですので、製品型式をご確認のうえ、別売品をお求めください。
※ご購入の際は必ずタイプをご確認いただき、タイプ2の替えブラシをご利用ください。異なるタイプでは使用できません。

■別売品について

別売品をお求めの際は、オムロン お客様サービスセンター（☎0120-30-6606）もしくはオムロン ヘルスケアストア <https://store.healthcare.omron.co.jp/> までお問い合わせください。

品名	型式	入数
トリブルクリアブラシ	SB-072	2本
極細マイルドブラシ	SB-082	2本
すき間みがきブラシ	SB-092	2本
極細スパイラルブラシ	SB-032	2本
トリブルクリアブラシコンパクト	SB-042	2本

5 使い方


1. 口の中にブラシを入れる

※毛先を水で湿らせてと効果的です。
※歯みがき粉を使用される場合は、研磨剤が入っていない一般的な歯みがき粉を少量付けてください。
※飛び散りを防ぐために、口の中にブラシを入れてからスタートスイッチを押してください。



2. スタートスイッチを押す

電源が入り、ブラシが振動します。
※ブラシを歯に軽くあて、横方向に移動させながら磨いてください。
<歯みがき時間ナビタイマー>
電源を入れてから、30秒ごとに短い振動で一時停止し、歯みがき時間の経過をお知らせします。

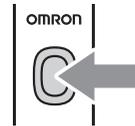


3. 磨き終わったら、スタートスイッチを押して電源を切る

※電源を入れてから約3分で自動的に電源が切れます。もう一度電源を入れると、さらに続けて磨くことができます。

上手なみがき方	●ブラシのあて方 ブラシの毛先が歯や歯茎に触れるように軽くあててください。	●ブラシの動かし方 手磨きのように動かさず、1,2歯ずつ横方向に移動させながら磨いてください。	
歯面やかみ合わせ面 歯に対してブラシを90°にあててください。		歯と歯ぐきの境目 毛先が歯茎の溝に入るよう45°に傾けてください。	
前歯の裏や歯並びの悪いところ ブラシをタテにあて、歯面に沿って1本ずつ磨いてください。			

6 使い終わったら

1. 本体からブラシをまっすぐ引いて外す

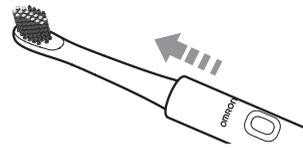


2. 外したブラシを水で洗う

※流水で歯みがき粉を落とし、よく振って水気を切ってください。

3. 本体を水で洗う

※ステムと本体の間にあるゴム部を傷つけたり、ステムに必要以上に力を加えたりしないでください。ゴム部に傷がつくと、本体内部に水が入り、故障の原因となります。

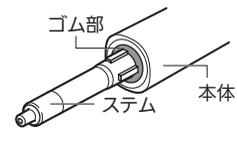

4. 水分を拭き取り保管する

※本体は乾いたやわらかい布で拭いてください。
※平らな風通しのよいところに置いてください。
※充電器に置く場合は、ぬれた状態で充電しないでください。

7 お手入れと保管

■お手入れについて

- いつも清潔にしてお使いください。
- 歯みがき粉が付着した状態で放置すると、本体表面が劣化する場合があります。
- 汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
- 汚れがひどいときは、水または薄めた中性洗剤をしみこませた布をかたく絞って拭き取り、やわらかい布で布で拭き取ってください。

<お手入れのお願い>

- 充電器をお手入れするときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本体内部に水などが入らないようにしてください。
- ブラシ、本体をアルコールに浸したり、熱湯（40℃を超える湯）で消毒したりしないでください。
- 消毒液をつけた布で拭かないでください。
- 汚れを落とすとき、ベンジン、シンナー、エタノールなどを使用しないでください。



■保管について

- 次のようなところに保管しないでください。
水のかかるところ/高温・多湿、直射日光、ほこり、塩分などを含んだ空気の影響を受けるところ/傾斜、振動、衝撃のあるところ/化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生するところ/火気の近く
 - 乳幼児の手の届かないところに置いてください。
- ※上記の注意事項、その他の正しい使用方法をお守りいただけない場合は、品質に責任を負いかねます。

8 おかしいな?と思ったら

こんなとき	原因	対処のしかた
ブラシの動作がガタつく	ブラシが本体に正しく取り付けられていない。	ブラシを正しく取り付けてください。（☞4ページの取り付け方）
動かない、ブラシの振動が弱い	充電電池の残量が減っている。	本体を充電してください。（☞3ページ）
	使いはじめ（購入直後や長時間放置したとき）や使用中に動作が停止したときには充電が完了するまで充電してください。（☞3ページ）	
本体と充電器があたたかい	製品の特性上少しあたたかくなる。	故障ではありません。また本製品の寿命にも影響ありません。
	電源プラグがコンセントに接続されていない。	正しく接続されていることを確認してください。（☞3ページ）
使用后に本体を充電器に置いても充電お知らせランプが点灯しない	本体を充電器に正しく置いていない。	充電器からいったん外し、もう一度置いてください。（☞3ページ）
	充電が完了している。	充電電池が満充電になると充電お知らせランプが消灯します。
充電が完了しても使用可能時間が短い、ブラシの振動が弱い	充電電池の寿命が考えられますが、充電電池の交換はできません。本体の廃棄をお願いします。（☞4ページ）	
充電お知らせランプが消えない	本体を充電器から外してください。（☞3ページ）	
歯茎から出血する、振動が強く歯茎が痛い	電動歯ブラシを使用し始めてから数日間、出血が2週間以上続いた場合は使用を中止し、歯科医の診断を受けてください。	通常、その場合の出血は数日で止まります。出血が2週間以上続いた場合は使用を中止し、歯科医の診断を受けてください。
	使用ブラシが合っていない。	やさしくブラッシングができる極細マイルドブラシ（SB-082）のご使用をお勧めします。

※上記の方法でも直らない場合は、オムロンお客様サービスセンター（☎0120-30-6606）までお問い合わせください。

廃棄するときのお願い

本体に使用しているニッケル水素電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。本体を廃棄するときは、ニッケル水素電池の残量をなくしたあと取り外して、お買い上げの販売店またはニッケル水素電池のリサイクル協力店へお持ちください。



※スタートスイッチを押しても本体が動作しなくなるまで、充電電池を使いきってください。


充電電池の取り出し方

※修理用の手順ではありません。分解した場合には修復は不可能です。

1. ブラシを本体から外す

2. 本体からカバー（リング状）とラバー部品（半透明）を取り外す

※ラバー部品（半透明）は、切りかき部分にマイナスドライバーを挿入して取り出してください。

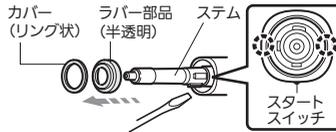

3. 本体にブラシを取り付ける

4. ブラシを90°回転させ（①）、引き抜く（②）

※ステムが外れなかったときは、ステムを手で引き抜いてください。




5. 先端部を持ち、インナーケースをゆっくり引き出す



6. インナーケースの2カ所（③、④）と、充電電池の両側の金具（⑤、⑥）を切断する

※先端の細いはさみを使用して、金具を切断します。

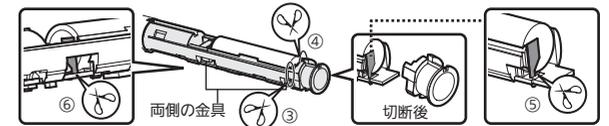

7. 充電電池を取り外す

※取り外した充電電池の \oplus / \ominus 端子には、電池のショートを防ぐために、セロハンテープやシールなどを貼ってください。
※充電電池の液漏れや発熱によるやけどに十分注意してください。
※部品の角や電池の金具などで、けがをしないように十分注意してください。
※本体および充電器の廃棄方法は、お住まいの市区町村の指導に従ってください。

