


オムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B313
HT-B314
HT-B315

Mediclean メディクリーン

取扱説明書

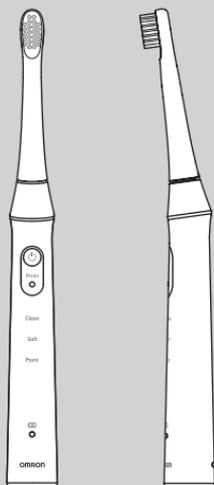

■ このたびは、オムロン製品をお買い上げいただきましてありがとうございました。

■ 安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ず参照してください。

■ 本書はいつもお手元においてご使用ください。

■ 本書は品質保証書を兼ねています。紛失しないように保管してください。

■ 本書に記載しているイラストはイメージ図です。

※表紙のイラストは、HT-B314/HT-B315です。

目次

ご使用の前に

安全上のご注意	1,2
各部の名前と付属品	3,4,5
充電する	6
ブラシの取り付け方	6

使い方とお手入れ

使い方	7,8
モードについて	9
歯みがき時間ナビタイマー	9
使い終わったら	10
お手入れと保管	11

困ったときに・保証など

おかしいな?と思ったら	12
仕様	13
別売品について	14
廃棄するときのお願い	15
保証規定/品質保証書	裏表紙

安全上のご注意

お使いになる前に必ずお読みください。

- ここに示した内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や、他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。
- 表示と意味は次のようになっています。

警告、注意について



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示します。



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容を示します。

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

図記号の例



必ず守る

●記号は強制（必ず守ること）を示します。（左図は“必ず守る”）



禁止

⊘記号は禁止（してはいけないこと）を示します。（左図は“禁止”）

警告

次の方は使用しないでください。または使用前に歯科医にご相談ください。

■□内の感覚が敏感な方 ■□腔または歯周の手術直後や治療中の方 ■□腔内に気になる症状（治療中の歯、不安定な入れ歯など）のある方 ■歯茎からの出血が続く、または大量の出血がある方
・傷口の悪化や、けがの原因になります。

ブラシは乳幼児の手の届かないところに置いてください。万一、ブラシを飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。また、お子様へのご使用は避けてください。
・お子様のけがの原因になります。

ブラシは複数の人で共用しないでください。
・病原菌に感染する原因になります。

植込み型医療機器（心臓ペースメーカーなど）の装着部位から 10 cm 以内に近づけないでください。
・本体に内蔵されている磁石の影響により、植込み型医療機器の誤動作をまねく恐れがあります。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流 100 ~ 110 V 以外では使用しないでください。
・たこ足配線などにより定格を超えると、火災の原因になります。

傷んだ電源コードや電源プラグは使用しないでください。
・感電やショート、発火の原因になります。

充電器を水洗いしないでください。
・感電の原因になります。

本体は廃棄のとき以外は絶対に分解しないでください。
・けがや故障の原因になります。

本体や充電器は浴室内などの水のかかる場所で使用しないでください。
・感電や故障の原因になります。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
・感電やけがの原因になります。



必ず守る



禁止



分解禁止



水場禁止



ぬれ手禁止

⚠ 注意

本体を廃棄するときは、取り外した充電電池の⊕⊖端子にセロハンテープやシールなどを貼り付けてください。 ・ショートにより、火災の原因になります。	
電源プラグのほこりは拭き取ってください。 ・ほこりに湿気が加わると、感電やショート、発火の原因になります。	
電源プラグはしっかり根元まで差し込んでください。 ・感電やショート、発火の原因になります。	! 必ず守る
電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らず、電源プラグを持って抜いてください。 ・電源コードの断線やショートにより、火災や感電の原因になります。	
電源コードの取り扱いには以下の項目に注意してください。 ■傷つけない ■破損させない ■加工しない ■無理に曲げたり、引っ張らない ■ねじらない ■使用時は束ねない ■重い物を載せない ■挟み込ませない ・感電や火災、故障の原因になります。	
1週間以上ご使用にならないときは電源プラグを抜いてください。 ・絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。	⚡ 電源プラグを抜く
充電器のお手入れの前には、電源プラグを抜いてください。 ・感電やけがの原因になります。	
専用の充電器以外は使用しないでください。 ・充電電池が発熱し発火や感電、故障の原因になります。	
歯や歯茎にブラシを強く押しあてたり、毛先以外のプラスチック部分をあてたりしないでください。また、長時間同じ箇所を磨かないでください。 ・歯や歯茎に損傷を与えたり、故障の原因になります。	
人以外に使用しないでください。 ・事故やトラブルの原因になります。	⊘ 禁止
本体や充電器を踏んだり、落としたり、強い衝撃を与えないでください。 ・けがや故障の原因になります。	
自分で意思表示ができない人は使用しないでください。 ・事故やトラブルの原因になります。	
充電電池を火の中に入れてください。 ・破裂してけがなどの原因になります。	


使用前に

お願い

歯みがき以外の目的には、使用しないでください。	
充電器を鉄板など金属板の上で使用しないでください。 ・充電効率が落ちます。	
歯みがき粉を使用される場合は、研磨剤が入っていない一般的な歯みがき粉を使用してください。 ・ヤニ取り用・美白用などの歯みがき粉は、研磨剤により歯を研磨する作用が大きいといわれています。歯や歯茎を傷める原因になりますので、おすすめできません。ご使用の場合は、歯科医にご相談ください。	
個人差はありますが、初めてご使用になる際、独特な刺激を感じる場合があります。これは音波式電動歯ブラシ特有の音波振動によるものです。	
ステムと本体の間にあるゴム部を傷つけたり、ステムに必要な以上に力を加えたりしないでください。 ・ゴム部に傷がつくと、本体内部に水が入り、故障の原因となります。	 <p>ゴム部 ステム 本体</p>

各部の名前と付属品 (HT-B313)


本体

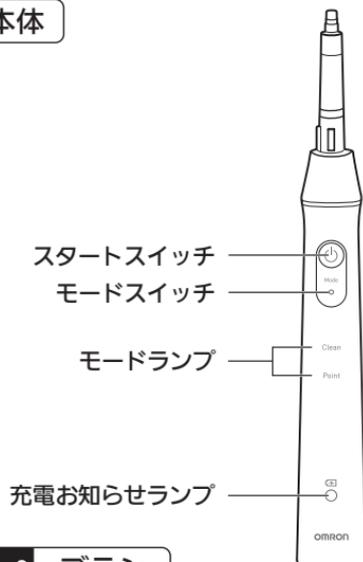

充電器



ブラシスタンド

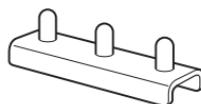

タイプ2 ブラシ

トリプルクリアブラシ SB-072



らせん状の「スパイラル毛」、歯周ポケットに届く「W メリット毛」、歯の表面を磨く「ひし形毛」の3種類の植毛で歯垢を除去します。しっかり磨きたい方におすすめです。

トリプルクリアブラシコンパクト SB-042




カタチの異なる3種類の植毛が効果的に歯垢を除去します。お口の小さな方、奥歯をしっかりと磨きたい方におすすめです。

- ※ ブラシの種類によっては、振動が変化する場合がありますが故障ではありません。
- ※ ご購入の際は必ずタイプをご確認いただき、**タイプ2**の替えブラシをご利用ください。異なるタイプでは使用できません。
- ※ ブラシは消耗部品です。毛先が開いてきたら交換時期ですので、製品型式をご確認のうえ、別売品をお求めください。( 14ページ) 「別売品について」

各部の名前と付属品 (HT-B314)


本体

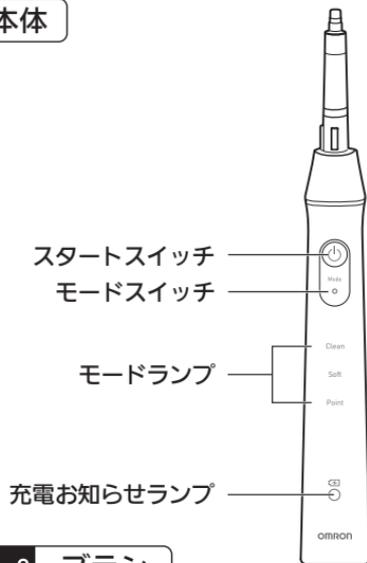

充電器



ブラシスタンド

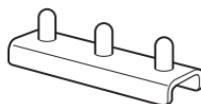

タイプ2 ブラシ

トリプルクリアブラシ SB-072



らせん状の「スパイラル毛」、歯周ポケットに届く「W メリット毛」、歯の表面を磨く「ひし形毛」の3種類の植毛で歯垢を除去します。しっかり磨きたい方におすすめです。

トリプルクリアブラシコンパクト SB-042



カタチの異なる3種類の植毛が効果的に歯垢を除去します。お口の小さい方、奥歯をしっかりと磨きたい方におすすめです。

すき間みがきブラシ SB-092




奥歯にも届きやすいL字型で、磨きにくい歯間や歯並びの悪い所の歯垢をかき出します。歯列矯正されている方にもおすすめです。

- ※ ブラシの種類によっては、振動が変化する場合がありますが故障ではありません。
- ※ ご購入の際は必ずタイプをご確認いただき、**タイプ2**の替えブラシをご利用ください。異なるタイプでは使用できません。
- ※ ブラシは消耗部品です。毛先が開いてきたら交換時期ですので、製品型式をご確認のうえ、別売品をお求めください。( 14ページ) 「別売品について」

各部の名前と付属品 (HT-B315)


本体

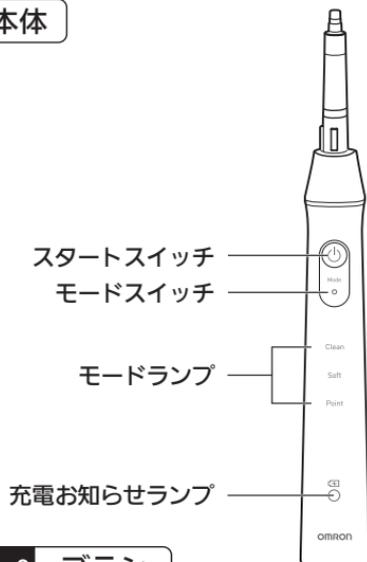

充電器



ブラシスタンド

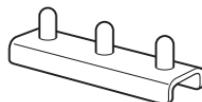

携帯ケース



タイプ2 ブラシ

トリプルクリアブラシ SB-072



らせん状の「スパイラル毛」、歯周ポケットに届く「W メリット毛」、歯の表面を磨く「ひし形毛」の3種類の植毛で歯垢を除去します。しっかり磨きたい方におすすめです。

極細マイルドブラシ SB-082



2種類の微細毛が歯面の凹凸や歯のすき間、歯周ポケットの歯垢をやさしく取り除きます。

すき間みがきブラシ SB-092



奥歯にも届きやすいL字型で、磨きにくい歯間や歯並びの悪い所の歯垢をかき出します。歯列矯正されている方にもおすすめです。

トリプルクリアブラシコンパクト SB-042




カタチの異なる3種類の植毛が効果的に歯垢を除去します。お口の小さい方、奥歯をしっかり磨きたい方におすすめです。

- ※ ブラシの種類によっては、振動が変化する場合がありますが故障ではありません。
- ※ ご購入の際は必ずタイプをご確認いただき、**タイプ2**の替えブラシをご利用ください。異なるタイプでは使用できません。
- ※ ブラシは消耗部品です。毛先が開いてきたら交換時期ですので、製品型式をご確認のうえ、別売品をお求めください。(P.14ページ)「別売品について」

充電する

使い始め（購入直後や長時間放置したとき）や使用中に動作が停止したときには、充電が完了するまで充電してください。

1. 電源プラグをコンセントに接続する

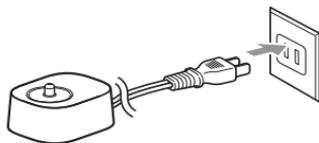


2. 本体を充電器に置く

充電が開始されると、充電お知らせランプが点灯します。

充電が完了すると、充電お知らせランプが消灯します。

- ※ 充電残量が減ってくると充電お知らせランプが点滅しますので、すぐに充電してください。
- ※ 充電お知らせランプの点滅から充電完了までは、約10時間必要です。
- ※ 充電環境や充電残量により、10時間以内に充電が完了する場合があります。
- ※ 充電中に本体と充電器が少しあたたかくなることがあります。
- ※ ぬれた状態で充電しないでください。感電・故障の原因になります。

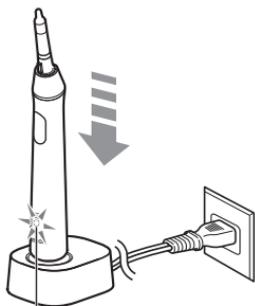

充電お知らせランプ（レッド）

充電中 : 点灯

充電完了 : 消灯

充電お知らせ : 点滅

ブラシの取り付け方

1. ブラシを本体に差し込む

ブラシを本体正面に向け、カチッとなるまでまっすぐに差し込みます。

- ※ ブラシは本体に真っすぐ差し込んでください。ななめに差し込んだり、回しながら差し込んだりすると、本体／ブラシが破損する恐れがあります。





通常の歯みがきにはクリーンモードを、気になる部分のケアにはポイントケアモードをおすすめします。(P.9ページ)

1. 口の中にブラシを入れる


- ※ 毛先を水で湿らせると効果的です。
- ※ 歯みがき粉を使用される場合は、研磨剤が入っていない一般的な歯みがき粉を少量付けてください。
- ※ 飛び散りを防ぐために、口の中にブラシを入れてからスタートスイッチを押してください。



2. スタートスイッチを押す

電源が入り、ブラシが振動します。

- ※ ブラシを歯に軽くあて、横方向に移動させながら磨いてください。

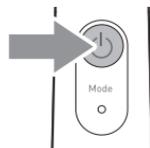


3. モードを選ぶ

モードスイッチを押すと、モードを切り替えることができます。



- ※ 現在のモードランプが点灯します。
- ※ 設定を記憶しているため、電源を入れると、前回使用していたモードから開始されます。

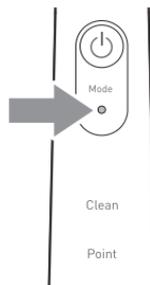

4. 磨き終わったら、スタートスイッチを押して電源を切る

- ※ 電源を入れてから約3分で自動的に電源が切れます。もう一度電源を入れると、設定したモードでさらに続けて磨くことができます。

使い方 (HT-B314 / HT-B315) ※【HT-B313】をお使いの方は P.7を参照してください。



通常の歯みがきにはクリーンモードを、歯茎をやさしくブラッシングしたいときにはソフトケアモード、気になる部分のケアにはポイントケアモードをおすすめします。(P.9ページ)

1. 口の中にブラシを入れる


- ※ 毛先を水で湿らせると効果的です。
- ※ 歯みがき粉を使用される場合は、研磨剤が入っていない一般的な歯みがき粉を少量付けてください。
- ※ 飛び散りを防ぐために、口の中にブラシを入れてからスタートスイッチを押してください。



2. スタートスイッチを押す

電源が入り、ブラシが振動します。

- ※ ブラシを歯に軽くあて、横方向に移動させながら磨いてください。

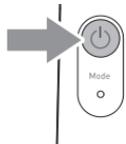


3. モードを選ぶ

モードスイッチを押すと、モードを切り替えることができます。



- ※ 現在のモードランプが点灯します。
- ※ 設定を記憶しているため、電源を入れると、前回使用していたモードから開始されます。

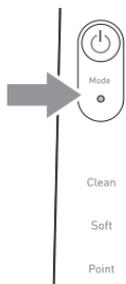

使い方とお手入れ

4. 磨き終わったら、スタートスイッチを押して電源を切る

- ※ 電源を入れてから約3分で自動的に電源が切れます。もう一度電源を入れると、設定したモードでさらに続けて磨くことができます。

■モードについて

クリーンモード




タテとヨコの振動で毛先が楕円運動を行い、
歯垢を効果的に除去します。

ソフトケアモード



毛先がヨコ方向に振動し、
歯周ポケットの歯垢をやさしくかき出します。

ポイントケアモード

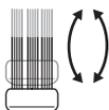

毛先がタテ方向に大きく振動し、
磨きにくい場所の歯垢をかき出します。

※【HT-B313】にはソフトケアモードはありません。

※ブラシの動きはイメージです。実際のブラシの動きは肉眼では確認できません。

■歯みがき時間ナビタイマー

電源を入れてから、30秒ごとに短い振動で一時停止し、歯みがき時間の経過をお知らせします。上下・左右の磨き時間を意識することで、効果的なブラッシングが可能です。


※歯垢を効果的に落とすには、口中のそれぞれの部位を同じ順序、同じ時間でブラッシングすることが大切です。歯みがき時間ナビタイマーの活用をおすすめします。

※モードを切り替えても、歯みがき時間ナビタイマーは引き続きカウントされます。

上手なみがき方

- ブラシのあて方 ブラシの毛先が歯や歯茎に触れるように軽くあててください。
- ブラシの動かし方 手磨きのように動かさず、1,2歯ずつ横方向に移動させながら磨いてください。

歯面やかみ合わせ面

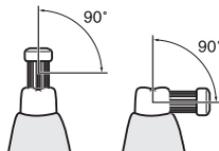

歯に対してブラシを
90°にあててください。

歯と歯茎の境目



毛先が歯茎の溝に入るよう
45°に傾けてください。


歯面の裏や歯並びの悪いところ



ブラシをタテにあて、歯面に
沿って1本ずつ磨いてください。

使い終わったら

1. 本体からブラシを まっすぐ引いて外す

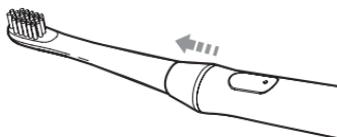


2. 外したブラシを水で洗う

※ 流水で歯みがき粉を落とし、よく振って水気を切った後、ブラシスタンドに立ててください。

3. 本体を水で洗う

※ ステムと本体の間にあるゴム部を傷つけたり、ステムに必要以上に力を加えたりしないでください。ゴム部に傷がつくと、本体内部に水が入り、故障の原因となります。

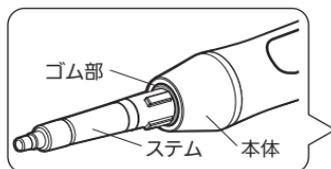


4. 水分を拭き取り保管する

- ※ 本体は乾いたやわらかい布で拭いてください。
- ※ 平らな風通しのよいところに置いてください。
- ※ 充電器に置く場合は、ぬれた状態で充電しないでください。

■ 携帯ケースについて

- 付属の携帯ケースに本体とブラシを2本収納できます。
- ※ 本体、ブラシは上向きにして収納してください。
 - ※ 【HT-B313】、【HT-B314】には携帯ケースは付属しません。

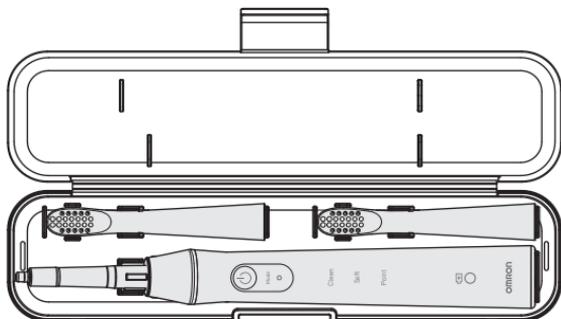

お手入れと保管

■お手入れについて

- ブラシ、本体、充電器はいつも清潔にしてお使いください。
- 歯みがき粉が付着した状態で放置すると、本体表面が劣化する場合があります。
- 汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
- 汚れがひどいときは、水または薄めた中性洗剤をしみこませた布をかたく絞って拭き取り、やわらかい布でから拭きしてください。

<お手入れのお願い>

- 充電器をお手入れするときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本体内部、充電器内部に水などが入らないようにしてください。
- ブラシ、本体、充電器をアルコールに浸したり、熱湯（40℃を超える湯）で消毒したりしないでください。
- 消毒液をつけた布でふかないでください。
- 汚れを落とすとき、ベンジン、シンナー、エタノールなどを使用しないでください。



■保管について

- 次のようなところに保管しないでください。
水のかかるところ／高温、多湿、直射日光、ほこり、塩分などを含んだ空気の影響を受けるところ／傾斜、振動、衝撃のあるところ／化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生するところ
- 乳幼児、お子様の手の届かないところに置いてください。

※ 上記の注意事項、その他の正しい使用方法をお守りいただけない場合は、品質に責任を負いかねます。

おかしいな?と思ったら

こんなとき	原因	対処のしかた
ブラシの動作が ガタつく	ブラシが本体に正しく取り 付けられていない。	ブラシを正しく取り付けてください。 ( 6 ページ)
動かない、ブラシの振動 が弱い	充電電池の残量が減っている。	本体を充電器に置いて充電してください。 ( 6 ページ)
	使いはじめ(購入直後や長時間放置したとき)や使用中に動作が停止 したときには充電が完了するまで充電してください。( 6 ページ)	
本体と充電器が あたたかい	商品の特性上少しあたたか くなる。	故障ではありません。また本商品の寿命 にも影響ありません。
使用後に本体を充電器に 置いても充電お知らせ ランプが点灯しない	電源プラグがコンセントに 接続されていない。	正しく接続されていることを確認してく ださい。( 6 ページ)
	本体を充電器に正しく置い ていない。	充電器からいったん外し、もう一度置い てください。( 6 ページ) それでも 充電お知らせランプが点灯しない場合は、 本体または充電器の故障が考えられます。 オムロンお客様サービスセンターに修理 を依頼してください。( 裏表紙)
	充電が完了している。	充電電池が満充電になると充電お知らせ ランプが消灯します。
充電が完了しても使用可 能時間が短い、ブラシの 振動が弱い	ポイントケアモードのご使用や寒い場所でのご使用は、使用可能時間 が短くなることがあります。	
	充電電池の寿命が考えられますが、充電電池の交換はできません。 本体の廃棄をお願いします。( 15 ページ)	
充電お知らせランプが 消えない	本体を充電器から外す、または 10 時間以上充電しても充電お知らせ ランプが消えない場合は、オムロンお客様サービスセンターに修理を 依頼してください。( 裏表紙)	
歯茎から出血する、振動 が強くて歯茎が痛い	電動歯ブラシを使用し始め てから数日間は若干歯茎か ら出血することがあります。	通常、その場合の出血は数日で止まりま す。出血が 2 週間以上続いた場合は使用 を中止し、歯科医の診断を受けてください。
	使用ブラシが合っていない。	やさしくブラッシングができる極細マイ ルドブラシ (SB-082) のご使用をお勧め します。

※ 上記の方法でも直らない場合は、オムロンお客様サービスセンターまでお問い合わせください。

( 裏表紙)

仕 様

※お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

販 売 名		オムロン 音波式電動歯ブラシ		
		HT-B313	HT-B314	HT-B315
電 源 電 圧		AC100-110 V 50/60 Hz		
消 費 電 力		約 1 W (充電時)		
充 電 方 式		電磁誘導方式		
使 用 電 池		ニッケル水素電池 (Ni-MH 2.4 V)		
充 電 時 間		約 10 時間 (室温 23℃にて)		
連 続 使 用 時 間		約 40 分 (室温 23℃にて満充電後 100 g 負荷クリーンモード時) ・ポイントケアモード時は、クリーンモード/ソフトケアモード時よりも連続使用時間が短くなります。 ・充電電池の特性として、充電を繰り返すたびに 1 回の使用時間は次第に短くなります。満充電しても使用時間が購入後初めてのご使用時に比べて著しく短くなったら、電池の寿命です。 ・電池は交換できません。寿命がきたら、電池を取り出しリサイクル協力店へお持ちください。		
モ ー ド		クリーンモード、 ポイントケアモード	クリーンモード、ソフトケアモード、 ポイントケアモード	
振 動 数	クリーンモード	約 25,500 回 / 分		
	ソフトケアモード	約 13,000 回 / 分		
	ポイントケアモード	約 33,000 回 / 分		
使 用 環 境 条 件		+ 5 ~ + 35℃ / 30 ~ 85% RH		
保 管 環 境 条 件		- 20 ~ + 60℃ / 10 ~ 95% RH		
質 量		本体：約 64 g (ブラシ取付状態)		
		充電器：約 115 g		
		-		携帯ケース：約 55 g
寸 法		本体：全長約 230 mm (ブラシ含む)、最大径約 24 mm		
		充電器：幅約 51 mm × 高さ約 35.5 mm × 奥行き約 63 mm (電源コードの長さ：約 120 cm)		
		ブラシスタンド：幅約 96 mm × 高さ約 27 mm × 奥行き約 30 mm		
		-		携帯ケース： 幅約 50 mm × 高さ約 209 mm × 奥行き約 32 mm
付 属 品	トリプルクリアブラシ	1 本	1 本	1 本
	トリプルクリアブラシ コンパクト	1 本	1 本	1 本
	極細マイルドブラシ	-	-	1 本
	すき間みがきブラシ	-	1 本	1 本
	ブラシスタンド	1 台	1 台	1 台
	携 帯 ケ ー ス	-	-	1 個
	そ の 他	充電器 (1 台)、取扱説明書 (品質保証書付き)		

別売品について

別売品をお求めの際は、オムロンお客様サービスセンター（☎電話 0120-30-6606）もしくはオムロンヘルスケアストア <http://store.healthcare.omron.co.jp/>までお買い求めください。

品名	型式	品名	型式
トリプルクリアブラシ（2本）	SB-072	極細スパイラルブラシ（2本）	SB-032
極細マイルドブラシ（2本）	SB-082	トリプルクリアブラシコンパクト（2本）	SB-042
すき間みがきブラシ（2本）	SB-092	携帯ケース	HT-B31CA

※ ご購入の際は必ずタイプをご確認いただき、**タイプ2**の替えブラシをご利用ください。
異なるタイプでは使用できません。

廃棄するときのお願い

本体に使用しているニッケル水素電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。

本体を廃棄するときは、ニッケル水素電池の残量をなくしたあと取り外して、下記 URL に記載のニッケル水素電池リサイクル協力店へお持ちください。

www.jbrc.com/recycle/kensaku.html




※ スタートスイッチを押しても本体が動作しなくなるまで、充電電池を使いきってください。

充電電池の取り出し方


修理用の手順ではありません。
分解した場合には修復は不可能です。

1. 動作しなくなることを確認して、ブラシを本体から外す

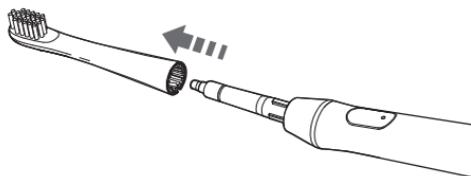

2. イラストを参考に本体を折る

なるべく靴底の堅い靴を履いて、地面が固い場所（コンクリートなど）で行ってください。

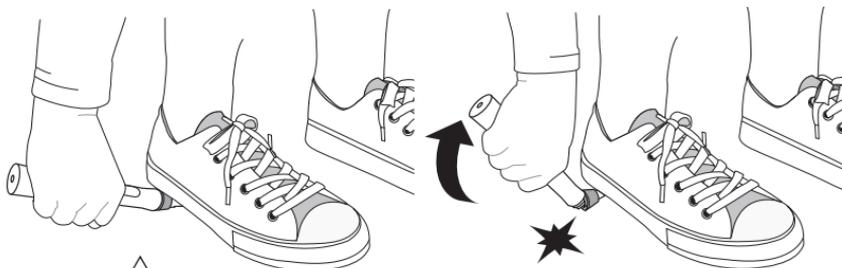

スタートスイッチが付いている側を上向きにして本体を折ってください。


※ 素足では行わないでください。けがの原因になります。

3. キャップ部分と本体を分離させる


本体上部にリング部分（銀色）が残っているか、残っていないかを確認してください。リング部分が残っている場合は手順4へ、残っていない場合は手順6へ進んでください。



リング部分（銀色）
が残っている場合（ 手順4へ）

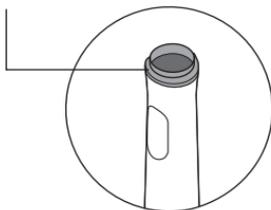

リング部分（銀色）
が残っていない場合（ 手順6へ）

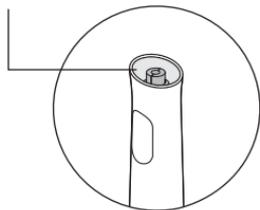


4. ハンマーで本体上部のリング部分をたたく



安全のため、軍手を着用してください。

本体をビニール袋の中に入れ、リング部分が割れた状態になるまでたたいてください。

※ビニール袋の中に入れてたたくと、破片が飛び散り、けがの原因になります。

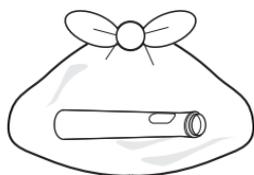


リング部分が割れた状態

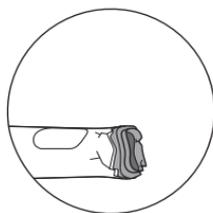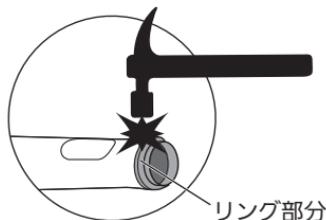


5. 割れたリング部分をペンチで取り除く

リング部分を取り除くと、インナーケースの上部が見える状態になります。

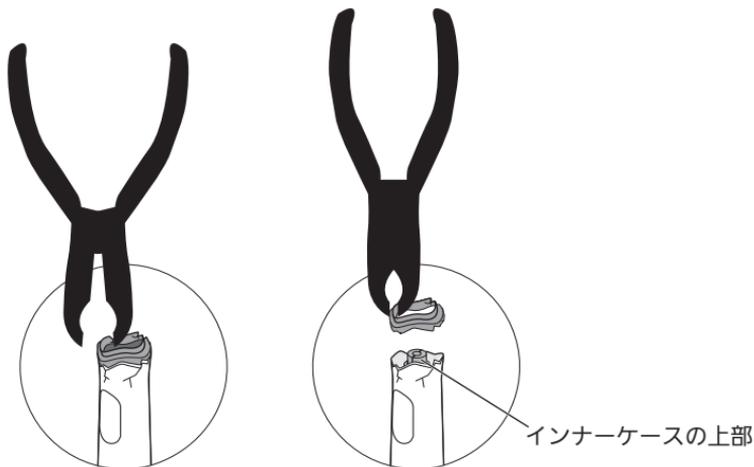


6. インナーケースを押し出す

本体の上部にある中央の突起部をペンチの先で押し込み、本体の下部からインナーケースを押し出します。

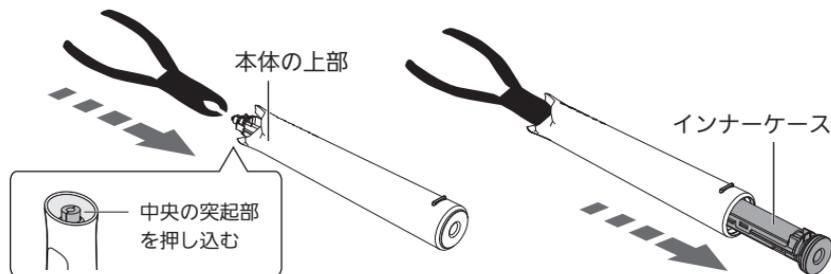

7. 充電電池カバーを取り外す


工具（マイナスドライバーなど）の先を充電電池カバーに引っかけて、電池カバーを取り外します。

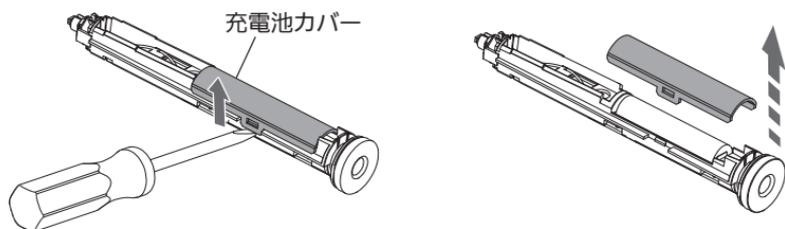

※ 工具の先で、けがをしないように十分に注意してください。

8. 充電電池の両側の金具を切断する


先端の細いはさみを使用して、金具を切断します。

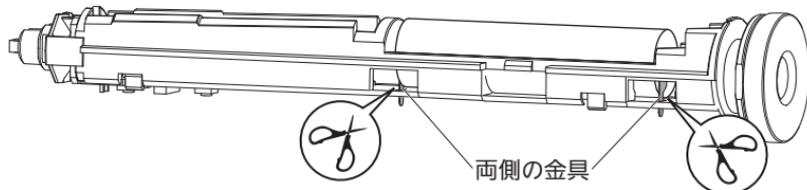

※ 金具を切断しにくい場合は、先の細い刃物を使用してください。

9. 充電電池を取り外す

取り外した充電電池の⊕⊖端子には、ショートを防ぐために、セロハンテープやシールなどを貼ってください。

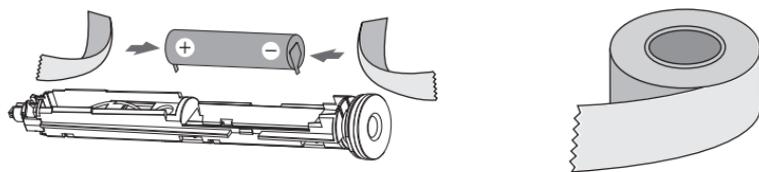

<廃棄時のご注意>

- 充電電池の液漏れや発熱によるやけどに十分注意してください。
- 部品の角や電池の金具などで、けがをしないように十分注意してください。
- 本体および充電器の廃棄方法は、お住まいの市区町村の指導に従ってください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きにしたがった正常な使用状態で、お買い上げ後1年以内に故障した場合には無償修理または交換いたします。
- 無償保証期間内に故障して修理を受ける場合は、オムロンお客様サービスセンターにご連絡ください。
- 無償保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
 - 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷。
 - 品質保証書の提示がない場合。
 - 品質保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 消耗部品。
 - 故障の原因が本製品以外に起因する場合。
 - その他取扱説明書に記載されていない使用方法による故障および損傷。
- 品質保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- 品質保証書は本規定に明示した期間、条件のもとにおいて無償保証をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 補修用部品は製造打ち切り後、最低5年間保有しています。

品質保証書

このたびは、オムロン製品をお買い求めいただきありがとうございます。製品は厳重な検査を行い高品質を確保しております。しかし通常のご使用において万一、不具合が発生しましたときは、保証規定によりお買い上げ後、1年間は無償修理または交換いたします。

※製品の保証は、日本国内での使用の場合に限ります。 ※以下につきましては、必ず販売店にて、記入捺印していただいでください。

This warranty is valid only in Japan.

販売名 オムロン 音波式電動歯ブラシ
HT-B313 / HT-B314 / HT-B315

ご芳名

ご住所

TEL ()

お買い上げ店名

住 所

TEL ()

お買い上げ年月日 年 月 日

発売元

オムロンヘルスケア株式会社

〒617-0002 京都府向日市市戸町9ノ坪53番地



製品のお問い合わせ、別売品や消耗品のご注文、修理のご依頼は

オムロンヘルスケア お客様サポート

<http://www.healthcare.omron.co.jp/support/>

消耗品・別売品のご注文は

<http://store.healthcare.omron.co.jp/>

オムロン お客様サービスセンター

TEL 0120-30-6606 (通話料無料) FAX 0120-10-1625 (通話料無料) 受付時間 9:00~19:00(祝日を除く月~金)

〒515-8503 三重県松阪市久保町1855-370 ※都合により、お休みや受付時間の変更をさせていただきます場合があります。



QRコード