


6 使い終わったら

1 本体からブラシをまっすぐ引いて外す

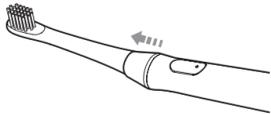


2 外したブラシを水で洗う

水洗い後は、よく振って水気を切り、ブラジスタンドに立ててください。

3 本体を水で洗う

- ステムと本体の間にあるゴム部を傷つかけたり、ステムに必要な以上に力を加えたりしないでください。ゴム部に傷がつくと、本体内部に水が入り、故障の原因となります。

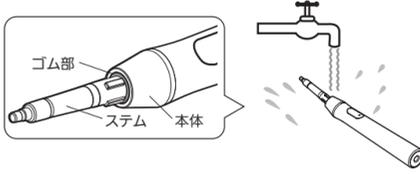

4 水分を拭き取り保管する

本体は乾いたやわらかい布で拭き、風通しのよいところに置いてください。充電器に置く場合は、ぬれた状態で充電しないでください。

■ 携帯ケースについて (HT-B322/HT-B323 のみ)

- 付属の携帯ケースに本体とブラシ 2 本を収納できます。
- 本体、ブラシは上向きにして収納してください。収納するときは、本体、ブラシが乾いていることを確認してください。

7 お手入れと保管

お手入れについて

- ブラシ、本体、充電器はいつも清潔にしてお使いください。
- 歯みがき粉が付着した状態で放置すると、本体表面が劣化する場合があります。
- 汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
- 汚れがひどいときは、水または薄めた中性洗剤をしみこませた布をかたく絞って拭き取り、やわらかい布でから拭きしてください。
- 充電器をお手入れするときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本体内部、充電器内部に水などが入らないように注意してください。
- ブラシ、本体、充電器をアルコールに浸したり、40℃を超えるお湯で消毒しないでください。
- 消毒液をつけた布で拭かないでください。
- 汚れを落とすとき、ベンジン、シンナー、エタノールなどを使用しないでください。

保管について

- 次のようなところに保管しないでください。
 - 水のかかるところ
 - 高温、多湿、直射日光、ほこり、塩分などを含んだ空気の影響を受けるところ
 - 振動、衝撃のあるところ
 - 化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生するところ
- 乳幼児の手の届かないところに置いてください。

上記の注意事項、その他の正しい使用方法をお守りいただけない場合は、品質に責任を負いかねます。

8 おかしいな?と思ったら

こんなとき	原因・対処のしかた
ブラシの動作が不安定	ブラシが本体に正しく取り付けられていない。 ▶ ブラシを正しく取り付けてください。 (☞ 図 ブラシを取り付ける)
電源ボタンを押しても動かない、ブラシの振動が弱い	充電電池の残量が減っている。 ▶ 充電器に置いて充電してください。 ▶ 購入直後や長期間放置したとき、使用中の動作が停止したときには、充電が完了するまで充電してください。 (☞ 図 充電する)
本体と充電器があたたかい	製品の特性上少しあたたかくなる。 ▶ 故障ではありません。また本製品の寿命にも影響ありません。

こんなとき	原因・対処のしかた
充電が完了している。 ▶ 充電電池が満充電になると充電お知らせランプが消灯します。 電源プラグがコンセントに接続されていない。 ▶ 正しく接続されていることを確認してください。 (☞ 図 充電する) 本体を充電器に正しく置いていない。 ▶ 充電器からいったん外し、もう一度置いてください。 (☞ 図 充電する) それでも充電お知らせランプが点灯しない場合は、本体の故障が考えられます。オムロンお客様サービスセンターに修理を依頼してください。	
充電しても使用可能時間が短い、ブラシの振動が弱い	▶ ポイントケアモードのご使用や寒い場所でのご使用は、使用可能時間が短くなる場合があります。 ▶ 充電電池の寿命が考えられますが、充電電池の交換はできません。本体を廃棄してください。 (☞ 図 廃棄するときは)
充電お知らせランプが消えない	▶ 本体を充電器から外す、または 10 時間以上充電しても充電お知らせランプが消えない場合は、オムロンお客様サービスセンターに修理を依頼してください。
歯茎から出血する、振動が強くて歯茎が痛い	電動歯ブラシを使用し始めてから数日間は歯茎から若干出血することがあります。 ▶ 通常、出血は数日で止まります。出血が 2 週間以上続く場合は使用を中止し、歯科医の診断を受けてください。 歯ブラシが合っていない。 ▶ やさしくブラッシングができる歯周ケアブラシ (SB-182) の使用をおすすめします。

以上の方法でも解決しないときは、オムロンお客様サービスセンター (☎ 0120-30-6606) にお問い合わせください。

9 仕様

販売名	オムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B3200/HT-B3220	
電源	AC100-110 V 50/60 Hz	
消費電力	約 1 W (充電時)	
充電方式	電磁誘導方式	
使用電池	ニッケル水素電池 (Ni-MH 2.4 V)	
充電時間	約 10 時間 (室温 23℃にて)	
連続使用時間	約 40 分 (室温 23℃にて満充電後 100 g 負荷クリーンモード時) オートパワーオフ約 3 分 ● ポイントケアモード時は、クリーンモード/ソフトケアモード * 時よりも連続使用時間が短くなります。 ● 充電電池の特性として、充電を繰り返すたびに 1 回の使用時間は次第に短くなります。満充電しても使用時間が著しく短くなったら電池の寿命です。 ● 電池は交換できません。寿命がきたら電池および本体を廃棄してください。	
モード	クリーンモード ソフトケアモード * ポイントケアモード	
振動数	クリーンモード	約 25500 回 / 分 ※歯垢除去ブラシ使用時
	ソフトケアモード *	約 13000 回 / 分 ※歯垢除去ブラシ使用時
	ポイントケアモード	約 33000 回 / 分 ※歯垢除去ブラシ使用時
使用環境条件	+ 5 ~ + 35℃ / 30 ~ 85 % RH	
保管環境条件	- 20 ~ + 60℃ / 10 ~ 95 % RH	
質量	本体 : 約 64 g (ブラシ含む)、充電器 : 約 115 g、携帯ケース * : 約 55 g	
外形寸法	本体 : 全長約 230 mm (ブラシ含む)、最大径約 24 mm 充電器 : 幅約 51 × 高さ約 35.5 × 奥行約 63 mm ブラジスタンド : 幅約 96 × 高さ約 27 × 奥行約 30 mm 携帯ケース * : 幅約 50 mm × 高さ約 209 mm × 奥行約 32 mm	
電源コードの長さ	約 120 cm	
付属品	ブラシ (各 1 本)	歯垢除去ブラシ、薄型コンパクトヘッドブラシ、歯周ケアブラシ *、すき間みがきブラシ *
	その他	ブラジスタンド、携帯ケース *、充電器、取扱説明書 (品質保証書付き)

お断りなく仕様を変更することがあります。

* HT-B3220 のみ

別売品について

ブラシは消耗部品です。3 カ月を目安に新しいブラシと交換してください。3 カ月以内でも毛先が開いたら交換時期です。別売品をお求めください。別売品は販売店もしくはオムロンヘルスケアストア <http://store.healthcare.omron.co.jp/> でお買い求めください。

品名	型式	品名	型式
歯垢除去ブラシ (2 本)	SB-172	幅広プレミアムブラシ (2 本)	SB-122
歯周ケアブラシ (2 本)	SB-182	ステイン除去ブラシ (2 本)	SB-132
すき間みがきブラシ (2 本)	SB-192	薄型コンパクトヘッドブラシ (2 本)	SB-242

ご購入の際は必ずタイプをご確認いただき、**タイプ 2** の替えブラシをご利用ください。異なるタイプでは使用できません。

10 廃棄するときは

本体に使用しているニッケル水素電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。本体を廃棄するときは、ニッケル水素電池の残量をなくしたあと取り外して、お買い上げの販売店またはニッケル水素電池のリサイクル協力店へお持ちください。



電源ボタンを押しても本体が動作しなくなるまで、充電電池を使いきってください。

充電電池の取り出し方

修理用の手順ではありません。分解した場合は修復できません。

1 動作しないことを確認して、ブラシを本体から外す


2 イラストを参考に本体を折る

なるべく靴底の堅い靴を履いて、地面が固い場所 (コンクリートなど) で行ってください。
● 素足では行わないでください。けがの原因になります。



3 キャップ部分と本体を分離させる

本体上部にリング部分 (銀色) が残っているか、残っていないかを確認してください。リング部分が残っている場合は手順 4へ、残っていない場合は手順 6へ進んでください。

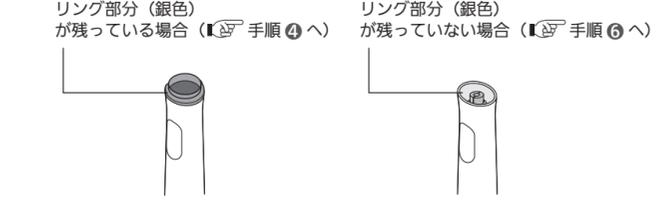


4 ハンマーで本体上部のリング部分をたたく

安全のため、軍手を着用してください。本体をビニール袋の中に入れ、リング部分が割れた状態になるまでたたいてください。
● ビニール袋の中に入れてたたくと、破片が飛び散り、けがの原因になります。


5 割れたリング部分をペンチで取り除く

リング部分を取り除くと、インナーケースの上部が見える状態になります。

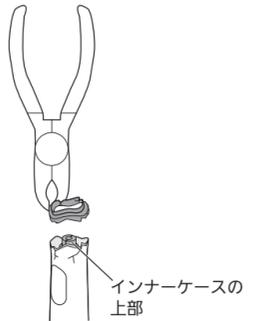


6 インナーケースを押し出す

本体の上部にある中央の突起部をペンチの先で押し込み、本体の下部からインナーケースを押し出します。

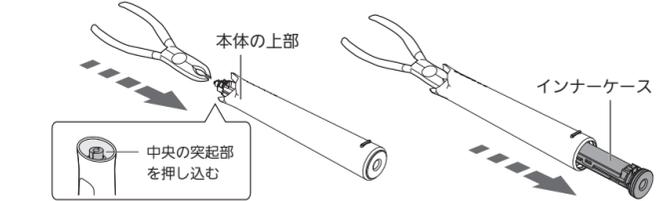


7 充電電池カバーを取り外す

工具 (マイナスドライバーなど) の先を充電電池カバーに引っかけて、電池カバーを取り外します。
● 工具の先で、けがをしないように十分に注意してください。

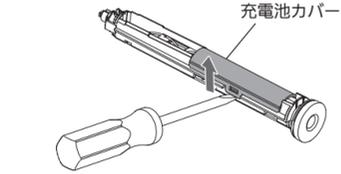

8 充電電池の両側の金具を切断する

先端の細いはさみを使用して、金具を切断します。

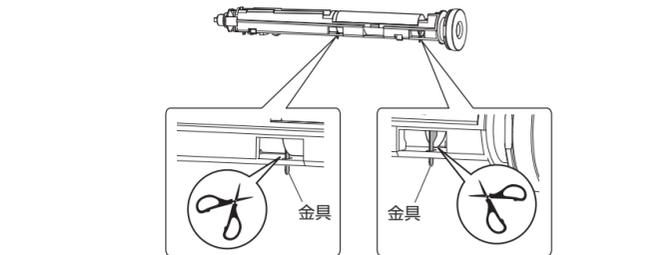

- 金具を切断しにくい場合は、先の細い刃物を使用してください。

9 充電電池を取り外す

廃棄時のご注意

- 取り外した充電電池の ⊕ ⊖ 端子には、ショートを防ぐために、セロハンテープやシールなどを貼ってください。
- 充電電池の液漏れや発熱によるやけどに十分に注意してください。
- 部品の角などで、けがをしないように十分に注意してください。
- 本体および充電器の廃棄方法は、お住まいの市区町村の指導にしたがってください。

製品のお問い合わせ、別売品や消耗品のご注文、修理のご依頼は

オムロンヘルスケア お客様サポート
<https://store.healthcare.omron.co.jp/support/>
オムロン お客様サービスセンター
TEL 0120-30-6606 (通話料無料) FAX 0120-10-1625 (通話料無料)
受付時間 9:00~17:00 (祝日を除く月~金)
〒515-8503 三重県松阪市久保町1855-370
※都合により、お休みや受付時間の変更をさせていただく場合があります。

