


# 取扱説明書

## オムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B471

メディクリン  
Mediclean

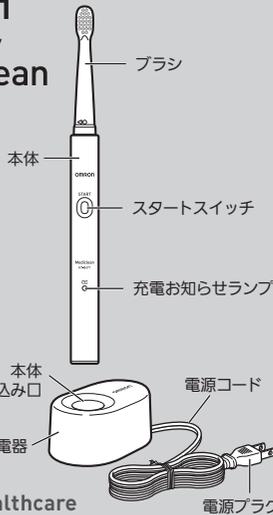

All for Healthcare

電源プラグ

使用法は裏面をご覧ください。

# OMRON

■このたびは、オムロン商品をお買い上げいただきましてありがとうございました。

■安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

■本書はいつもお手元においてご使用ください。

■本書は品質保証書を兼ねています。紛失しないように保管してください。

■記載しているイラストはイメージ図です。

### 保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書にしたがった正常な使用状態で、お買い上げ後1年以内に故障した場合には無償修理または交換いたします。
- 無償保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
  - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
  - (ロ) お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷。
  - (ニ) 品質保証書の提示がない場合。
  - (ホ) 品質保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
  - (ヘ) 消耗品。
  - (ト) 故障の原因が本品以外に起因する場合。
  - (チ) その他取扱説明書に記載されていない使用方法による故障および損傷。
- 品質保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- 品質保証書は本規定に明示した期間、条件のもとにおいて無償保証をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 補修用部品は製造打ち切り後、最低5年間保有しています。

### 品質保証書

このたびは、オムロン商品をお買い求めいただきありがとうございました。商品は厳重な検査をおこない高品質を確保しております。しかし通常の使用において万、不具合が発生しましたときは、保証規定によりお買い上げ後、一年間は無償修理または交換いたします。

※商品の保証は、日本国内での使用の場合に限りです。 ※以下につきましては、必ず販売店にて、記入捺印していただいでください。  
This warranty is valid only in Japan.

販売名 オムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B471	お買い上げ店名
ご芳名	住所
ご住所	TEL ( )
TEL ( )	お買い上げ年月日 年 月 日

発売元  
オムロンヘルスケア株式会社  
〒617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪53番地

### オムロン健康商品のお問い合わせは

修理のご用命、別売品・消耗部品の求めも、この電話で承ります。修理には、便利な引き取りサービスをご利用ください。

オムロンお客様サービスセンター  
☎電話 0120-30-6606 (通話料無料)  
FAX 0120-10-1625 (通話料無料)

受付時間  
9:00~19:00 月~金(土日を除く)  
都合によりお休みをいただいたたり、受付時間帯を変更させていただきますのでご了承ください。

ホームページ <http://www.healthcare.omron.co.jp/>  
※通信料はお客様ご負担となります。別売品・消耗部品の、インターネットでもお求めいただけます。

5334253-6B

### 安全上のご注意 お使いになる前に必ずお読みください。

- ここに示した内容は、商品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や、他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。
- 表示と意味は次のようになっています。

#### 警告、注意について

- ⚠ **警告** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示します。
- ⚠ **注意** 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害\*の発生が想定される内容を示します。

\*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

#### 図記号の例

- 記号は強制(必ず守る)を示します。(左図は“必ず守る”)
- ⊘記号は禁止(してはいけない)を示します。(左図は“禁止”)

### ⚠ 警告

次の方は使用しないでください。または使用を歯科医にご相談ください。

- 口内の感覚が敏感な方
- 口腔または歯周手術の直後や治療中の方
- 口腔内に気になる症状(治療中の歯、不安定な入れ歯など)のある方
- 歯ぐきからの出血が続く、または大量の出血がある方
- ・傷口を悪化させたり、けがの原因になります。

ブラシは乳幼児の手の届かないところに置いてください。お子様だけのご使用は避けてください。

・乳幼児のけがの原因になります。

ブラシは複数の人で共用しないでください。

・病原菌が感染する原因になります。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流 100~110 V 以外では使用しないでください。

・タコ足配線などにより定格を超えると、火災の原因になります。

傷んだ電源コードや電源プラグは使用しないでください。

・感電やショート、発火の原因になります。

充電器を水洗いしないでください。

・感電の原因になります。

本体は廃棄のとき以外は絶対に分解しないでください。

・けがや故障の原因になります。

本体や充電器は浴室内などの水のかかる場所で使用しないでください。

・感電や故障の原因になります。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

・感電やけがの原因になります。

### お願い

歯みがき以外の目的には、使用しないでください。

充電器を鉄板など金属板の上で使用しないでください。

・充電効率が悪くなり、消費電流が増加します。

ヤニ取り用・美白用などの歯みがき粉は、研磨剤により歯を研磨する作用が大きいため、歯や歯ぐきを傷める原因になりますのでおすすめできません。ご使用の場合は、歯科医にご相談ください。

個人差はありますが、初めてご使用になる際、独特な刺激を感じる場合があります。これは音波式電動歯ブラシ特有の音波振動によるものです。

ブラシと本体の間にあるゴム部を傷つけないでください。

・内部に水が入り、故障の原因になります。



### ⚠ 注意

本体を廃棄するときは、取り外した充電電池の⊕端子にゼロハンテーパーやシールなどを貼り付けてください。

・ショートにより、火災の原因になります。

電源プラグのほこりはふき取ってください。

・ほこりに湿気が加わると、感電やショート、発火の原因になります。

電源プラグはしっかり根元まで差し込んでください。

・感電やショート、発火の原因になります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らず、電源プラグを持って抜いてください。

・電源コードの断線やショートにより、火災や感電の原因になります。

電源コードの取り扱いには以下の項目に注意してください。

- 傷つけない
- 破損させない
- 加工しない
- 無理に曲げたり、引っ張らない
- ねじらない
- 使用時は束ねない
- 重い物を載せない
- 挟み込ませない
- ・感電や火災、故障の原因になります。

1週間以上ご使用にならないときは電源プラグを抜いてください。

・絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

充電器のお手入れの前には、電源プラグを抜いてください。

・感電やけがの原因になります。

専用の充電器以外は使用しないでください。

・充電電池が発熱し発火や感電、故障の原因になります。

歯や歯ぐきにブラシを強く押しあてたり、毛先以外のプラスチック部分をあてないでください。また、長時間同じ箇所をみがかないでください。

・歯や歯ぐきに損傷を与えたり、故障の原因になります。

人以外に使用しないでください。

・事故やトラブルの原因になります。

本体や充電器を踏んだり、落としたり、強い衝撃を与えないでください。

・けがや故障の原因になります。

自分で意思表示ができない人は使用しないでください。

・事故やトラブルの原因になります。

充電電池を火の中に入れてください。

・破裂してけがなどの原因になります。

### 仕様

※お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

販売名	オムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B471	充電方式	電磁誘導方式
電源電圧	AC100-110 V 50/60 Hz	使用電池	ニッケル水素電池 (Ni-MH 2.4 V)
消費電力	約 2 W (充電時)	充電時間	約 10 時間 (室温 23℃にて)
連続使用時間	約 30 分 (室温 23℃にて満充電後 100 g 負荷時) オートパワーオフ約 3 分 ・充電電池の特性として、充電を繰り返すたびに1回の使用時間は次第に短くなります。満充電しても使用時間が購入後はじめてのご使用時に比べて著しく短くなったら電池の寿命です。 ・電池は交換できません。寿命がきたら電池および商品の廃棄をお願いします。		
振動数	約 25,500 回/分 (無負荷時)		
使用環境湿度	+5~+35℃、30~85% RH		
保管環境湿度	-20~+60℃、10~95% RH		
本体質量	本体: 約 48 g (ブラシ含む)、充電器: 約 160 g		
外形寸法	本体: 全長約 230 mm (ブラシ含む)、外径約 18 mm 充電器: 幅約 52 mm x 高さ約 36 mm x 奥行約 82 mm		
電源コードの長さ	約 120 cm		
付属品	トリプルクリアブラシ (1 本)、充電器 (1 台)、取扱説明書 (品質保証書付き)		

### 別売品について

ブラシは消耗部品です。毛先が開いてきたら交換時期です。別売品をお求めください。別売品の求めは、オムロンお客様サービスセンター ☎電話 0120-30-6606) までお問い合わせください。

品名	型式	品名	型式
トリプルクリアブラシ (2 本)	SB-070	ダブルメリットブラシ (1 本)	SB-050
極細マイルドブラシ (2 本)	SB-080	歯ぐきマッサージブラシ (1 本)	SB-060
すき間みがきブラシ (2 本)	SB-090		

※ブラシの種類によっては、振動が変化しますが故障ではありません。

## 準備しましょう


### 充電する

使いはじめ(購入直後や長時間放置したとき)や使用中に動作が停止したときには、必ず約10時間充電してください。

※充電中に本体と充電器が少しあたたかくなることがありますが、異常ではありません。

#### 1 電源プラグをコンセントに接続する

#### 2 本体を充電器に差し込む

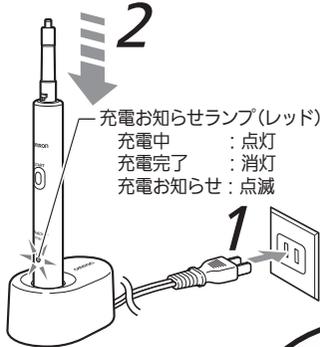

充電お知らせランプ(レッド)  
 充電中 : 点灯  
 充電完了 : 消灯  
 充電お知らせ : 点滅

電池残量が減ってくると、充電お知らせランプが点滅しますので、すぐに充電してください。

※充電お知らせランプの点滅から満充電までには、約10時間の充電が必要です。  
 ※充電環境や電池残量により、10時間以内に充電が完了する場合があります。


### ブラシを取り付ける

#### 1 ブラシ凹部と本体凸部を合わせながら差し込む

※ブラシ凹部と本体凸部を合わせないと、固定できません。無理に差し込むとブラシが破損する場合があります。

#### 2 ブラシを矢印の方向に固定されるまで軽く回します。

※固定されたところ以上に回さないでください。無理に回すと破損する恐れがあります。  
 ※取り外すときは、矢印の逆方向に回してから抜いてください。

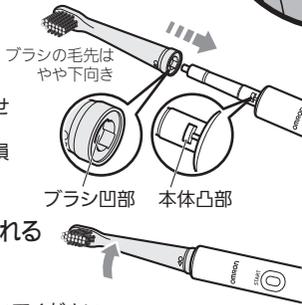

## 上手なみがき方

### <ブラシのあて方>


ブラシの毛先が歯や歯ぐきに触れるように軽くあててください。

### <ブラシの動かし方>

手みがきのように動かさず、1、2歯ずつヨコ方向に移動させながらみがいてください。

### 歯面やかみ合わせ面

歯に対してブラシを90°にあててください。

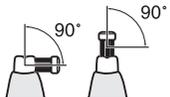

### 歯と歯ぐきの境目

毛先が歯ぐきの溝に入るよう45°に傾けてください。



### 前歯の裏や歯並びの悪いところ

歯ブラシをタテにあて、歯面に沿って1本ずつみがいてください。



## 使ってみましょう

### 1 口の中にブラシを入れる

※毛先を水で湿らせると効果的です。  
 ※一般的な歯みがき粉を少量付けてください。  
 ※飛び散りを防ぐために、口の中にブラシを入れてからスタートスイッチを押してください。

### 2 スタートスイッチを押す

ブラシが振動します。  
 ※ブラシを歯に軽くあて、ヨコ方向に移動させながらみがいてください。

### 3 みがき終わったら、スタートスイッチを押して電源を切る

※電源を入れてから約3分で自動的に電源が切れます。もう一度電源を入れると、さらに3分間みがくことができます。



## 使い終わったら

### 1 ブラシを矢印の方向に回して、ブラシを本体から引き抜く


※強く回しすぎないでください。無理に回すと破損する恐れがあります。

### 2 ブラシを水で洗う

※水洗い後は水気をよく切ってください。

### 3 本体を充電器に差し込む

※乾いたやわらかい布で本体の水気をふき取ったあと、充電器に差し込んでください。

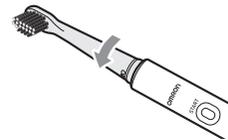

## お手入れと保管

### ■お手入れについて

本体/充電器はいつも清潔にしてお使いください。汚れは乾いたやわらかい布でふき取ってください。汚れがひどいときは、水または薄めた中性洗剤をしみこませた布をかたく絞ってふき取り、やわらかい布でからぶきしてください。

### ＜お手入れのお願い＞

- 充電器をお手入れするときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本体内部に水などが入らないようにしてください。
- 消毒液をつけた布でふかないでください。
- 歯ブラシ本体をアルコールに浸したり、熱湯(40℃を超える湯)で消毒しないでください。
- 汚れを落とすとき、ベンジン、シンナー、エタノールなどを使用しないでください。

### ■保管について

次のようなところに保管しないでください。水のかかるところ/傾斜、振動、衝撃のあるところ/化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生するところ/高温、多湿、直射日光、ほこり、塩分などを含んだ空気の影響を受けるところ

乳幼児の手の届かないところに置いてください。

※上記の注意事項、その他の正しい使用方法をお守りいただけない場合は、品質に責任を負いかねます。

## おかしいな?と思ったら

こんなとき	原因	対処のしかた
ブラシの動作がガタつく	ブラシが本体に正しく取り付けられていない	ブラシを正しく取り付けてください(「」「ブラシを取り付ける」参照)
動かない、ブラシの振動が遅い	充電電池の残量が減っている	充電器に差し込んで充電してください(「」「充電する」参照)
本体と充電器があたかたい	商品の特性上少しあたたかくなる	故障ではありません。また本商品の寿命にも影響ありません
使用後に本体を充電器に差し込んでも充電お知らせランプが点灯しない	電源プラグがコンセントに接続されていない	正しく接続されていることを確認してください(「」「充電する」参照)
	充電器に本体が正しく差し込まれていない	充電器からいったん外し、もう一度差し込んでください(「」「充電する」参照) それでも充電お知らせランプが点灯しない場合は、本体の故障が考えられます。オムロンお客様サービスセンターに修理を依頼してください
	充電が完了している	充電電池が満充電になると、充電お知らせランプが消灯します
充電しても使用可能時間が短い、ブラシの振動が遅い	使いはじめ(購入直後や長時間放置したとき)や使用中の動作が停止したときには約10時間充電してください(「」「充電する」参照)	
約10時間充電しても使用可能時間が短い、ブラシの振動が遅い	寒い場所でのご使用は、使用可能時間が短くなる場合があります。充電電池の寿命が考えられますが、充電電池の交換はできません。本体の廃棄をお願いします(「」「廃棄するときのお願い」参照)	
充電お知らせランプが消えない	本体を充電器から外しても充電お知らせランプが消えない場合や、10時間以上充電しても充電お知らせランプが消えない場合は、オムロンお客様サービスセンターに修理を依頼してください	

※上記の方法でも直らない場合は、オムロンお客様サービスセンターまでお問い合わせください。

## 廃棄するときのお願い

本体に使用しているニッケル水素電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。本体を廃棄するときは、ニッケル水素電池の残量をなくしたあと取り外して、お買い上げの販売店またはニッケル水素電池のリサイクル協力店へお持ちください。



※スタートスイッチを押しても本体が動作しなくなるまで、充電電池を使いきってください。

## 充電電池の取り出し方

修理用の手順ではありません。分解した場合には修復は不可能です。

### 1 動作しなくなることを確認して、ブラシを本体から外す

(「」「使い終わったら」参照)


### 3 ステムを押しながら、フック(2カ所)をマイナスドライバーで片方ずつ内側に倒し、インナーケースを取り出す

### 2 マイナスドライバーで、底面のカバーを外す

プラスドライバーでネジを外して、Oリングと底ぶたを外す



### 4 テープをはがし、充電電池を取り出して、充電電池の両側のコードを切断する

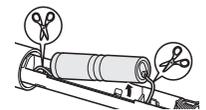

※取り外した充電電池の⊕端子には、電池のショートを防ぐために、セロハンテープやシールなどを貼ってください。

※充電電池の液漏れや発熱によるやけどに十分注意してください。

※部品の角などで、けがをしないように十分注意してください。

※使用済み電池、本体および充電器の廃棄方法は、お住まいの市区町村の指導に従ってください。