


取扱説明書

オムロン 音波式電動歯ブラシ

メディクリーン
Mediclean™

HT-B550
HT-B551

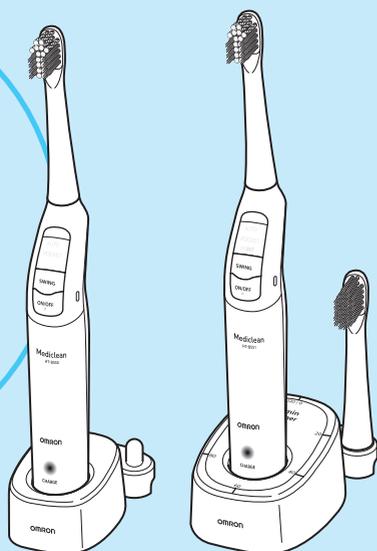

HT-B550

HT-B551

- このたびは、オムロン商品をお買い上げいただきましてありがとうございました。
- 安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
- 本書は、いつもお手元においてご使用ください。
- 本書は品質保証書を兼ねています。紛失しないように保管してください。
- 本書に記載しているイラストはイメージ図です。

目次

ご使用前に

安全上のご注意	1
次のものが入っていますか？	4
各部の名前とはたらき	5
充電する	7

使い方

使い方	8
スウィングモード選択	11
歯周ポケットケア	13
2分みがきナビタイマー	15
上手なみがき方	16
使い終わったら	17

困ったときに・保証など

お手入れと保管	18
おかしいな？と思ったら	19
仕様	20
別売品について	21
廃棄するときのお願い	21
保証規定／品質保証書	裏表紙

安全上のご注意

お使いになる前に
必ずお読みください。

- ここに示した内容は、商品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や、他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。
- 表示と意味は次のようになっています。

警告、注意について



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示します。



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容を示します。

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

図記号の例



必ず守る

●記号は強制(必ず守ることを)示します。(上図は“必ず守る”)



禁止

⊘記号は禁止(してはいけないこと)を示します。(上図は“禁止”)



警告

次の方は使用しないでください。または使用を歯科医にご相談ください。

- 口内の感覚が敏感な方
- 口腔または歯周手術の直後や治療中の方
- 口腔内に気になる症状(治療中の歯、不安定な入れ歯など)のある方
- 歯ぐきからの出血が続く、または大量の出血がある方
- 傷口を悪化させたり、けがの原因になります。

ブラシは乳幼児の手の届かないところに置いてください。お子様だけのご使用は避けてください。

- 乳幼児が飲み込む原因になります。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。

ブラシは複数の人で併用しないでください。

- 病原菌が感染する原因になります。



必ず守る

警告

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流 100 ~ 240 V 以外では使用しないでください。

- タコ足配線などにより定格を超えると、火災の原因になります。

傷んだ電源コードや AC アダプタは使用しないでください。

- 感電やショート、発火の原因になります。

充電器や AC アダプタを水洗いしないでください。

- 感電の原因になります。

本体は廃棄のとき以外は絶対に分解しないでください。

- けがや故障の原因になります。

本体や充電器は浴室内などの水のかかる場所で使用しないでください。

- 感電や故障の原因になります。

ぬれた手で AC アダプタを抜き差ししないでください。

- 感電やけがの原因になります。



禁止



分解禁止



水場禁止



ぬれ手禁止

注意

本体を廃棄するときは、取り外した充電電池の ⊕ ⊖ 端子にセロハンテープやシールなどを貼り付けてください。

- ショートにより、火災の原因になります。

AC アダプタのほこりはふき取ってください。

- ほこりに湿気が加わると、感電やショート、発火の原因になります。

AC アダプタはしっかり根元まで差し込んでください。

- 感電やショート、発火の原因になります。

AC アダプタを抜くときは、電源コードを引っ張らず、AC アダプタを持って抜いてください。

- 電源コードの断線やショートにより、火災や感電の原因になります。

電源コードの取り扱いには以下の項目に注意してください。

- 傷つけない
- 破損させない
- 加工しない
- 無理に曲げたり、引っ張らない
- ねじらない
- 使用時は束ねない
- 重い物を載せない
- 挟み込ませない
- 感電や火災、故障の原因になります。



必ず守る

⚠ 注意

1 週間以上ご使用にならないときは AC アダプタを抜いてください。

- 絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。



充電器のお手入れの前には、AC アダプタを抜いてください。

- 感電やけがの原因になります。

専用の充電器以外は使用しないでください。

- 充電池が発熱し発火や感電、故障の原因になります。

ヤニ取り用・美白用などの研磨剤が多く含まれている歯みがき粉との併用はしないでください。

- 歯や歯ぐきを傷める原因になります。

歯や歯ぐきにブラシを強く押しあてたり、毛先以外のプラスチック部分をあてないでください。また、長時間同じ箇所をみがかないでください。

- 歯や歯ぐきに損傷を与えたり、故障の原因になります。

人以外に使用しないでください。

- 事故やトラブルの原因になります。

本体や充電器を踏んだり、落としたり、強い衝撃を与えないでください。

- けがや故障の原因になります。

自分で意思表示ができない人は使用しないでください。

- 事故やトラブルの原因になります。

充電池を火の中に入れてください。

- 破裂してけがなどの原因になります。



禁止

お願い

歯みがき以外の目的には、使用しないでください。

充電器を鉄板など金属板の上で使用しないでください。

- 充電効率が落ちたり、消費電流が増加します。
- 2 分みがきナビタイマー（HT-B551 のみ）が作動しない場合があります。

個人差はありますが、初めてご使用になる際、独特な刺激を感じる場合があります。これは音波式電動歯ブラシ特有の音波振動によるものです。



次のものが入っていますか？

箱の中には次のものが入っています。万一、不足のものがありましたら、オムロンお客様サービスセンター（☎電話 0120-30-6606）までご連絡ください。

1. 本体




2. 充電器

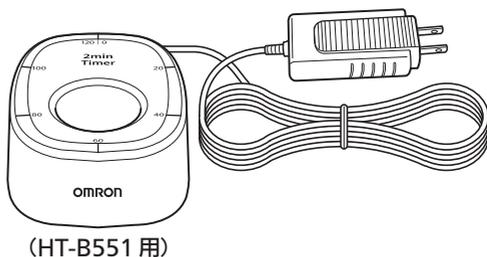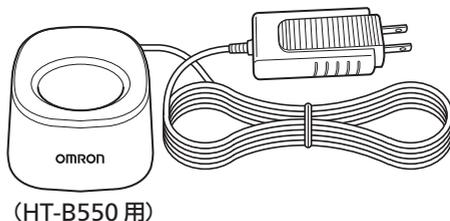


3. ブラシスタンド



4. ブラシ

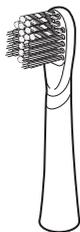

トリプルクリアブラシスリム
(1本)

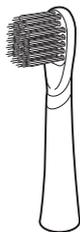

極細マイルドブラシスリム
(1本) 【HT-B551のみ】



ロングすき間みがきブラシ
(1本) 【HT-B551のみ】

5. 取扱説明書（本書：品質保証書付き）

各部の名前とはたらき

本体

★ 歯周ポケットケア

「45度お知らせランプ」と「45度親指ポイント」で歯周ポケットを集中的にケアし、歯周病の予防と改善をおこないます。

(👉 13～14 ページ)

ブラシ差し込み軸

45度お知らせランプ


スウィングモード表示部

スウィングモードスイッチ

45度親指ポイント(4カ所)

電源スイッチ



充電表示ランプ

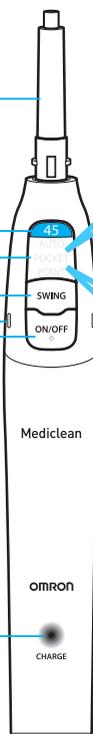

充電器


ブラシスタンド

ACアダプタ

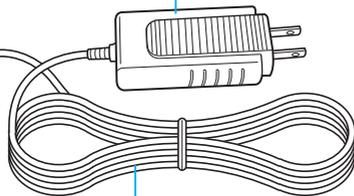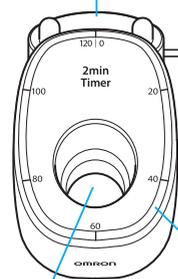

電源コード

■ ブラシスタンドの取り付け方

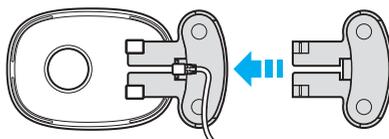

電源コードをブラシスタンドの切れ目に通し、図のように充電器の底にはめ込みます。


本体差し込み口

★ 2分みがきナビタイマー【HT-B551のみ】

充電器についてのタイマーでみがき時間をお知らせします。


(👉 15 ページ)

HT-B550のスイングモード表示部

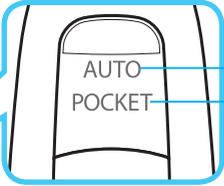

AUTO オートスイングモード
POCKET ポケットスイングモード

HT-B551のスイングモード表示部

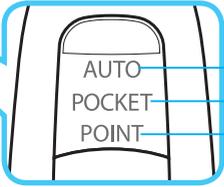

AUTO オートスイングモード
POCKET ポケットスイングモード
POINT ポイントスイングモード

★スイングモード選択

歯ぐきにやさしく、歯垢を効果的に落とすには、みがいている部位にあわせたスイングモードをおすすめします。おまかせセンサーによるオートスイングモードや、ポケットスイングモード、ポイントスイングモードが選択できます。

( 11 ~ 12 ページ)

ブラシ


抗菌剤配合（柄部分）

※ブラシは消耗部品です。毛先が開いてきたら交換時期です。別売品をお求めください。( 21 ページ)

※ブラシは HT-B550/551 専用ブラシです。他の機種でのご使用や専用ブラシ以外のブラシのご使用は破損の恐れがありますのでおやめください。

トリプルクリアブラシスリム

3種類の植毛の力で効果的に歯垢を除去します。

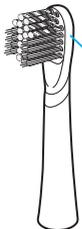

ブラシクッション

極細マイルドブラシスリム
【HT-B551のみ】

やさしい使用感で歯垢をかき出します。



ブラシクッション

ロングすき間みがきブラシ
【HT-B551のみ】

歯並びが悪くみがきづらいところを1カ所ずつ丁寧にみがけます。



ブラシクッション


歯みがき中に、ブラシ裏が歯に接触したときの振動をやわらげます。

充電する

購入後初めて使用するとき、長期間充電しなかったとき、動作しなくなるまで使用したときには 16 時間以上充電してください。

※充電中に本体と充電器が少しあたたかくなることがありますが、異常ではありません。


1 充電器の AC アダプタをコンセントに接続する

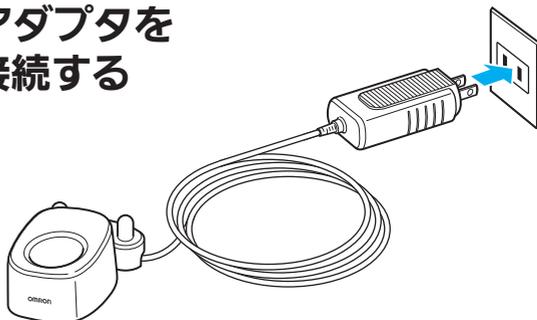

2 電源を切った状態で、本体を充電器に差し込む

充電表示ランプ（赤）が点灯し、充電が開始されます。

※充電表示ランプは本体内にあり、内側から透過して点灯します。

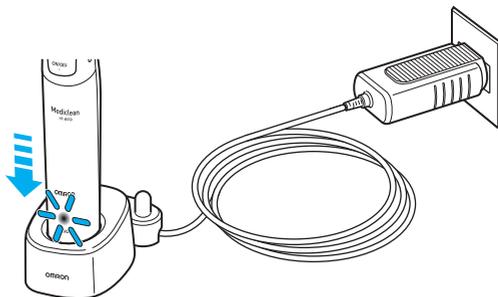

充電表示ランプ

本体を充電器に差し込んでいる間は充電表示ランプが点灯し続けます。

満充電には 16 時間以上の充電が必要です。

ご使用時間が極端に短いと感じたら 16 時間以上充電してください。


使い方

本体にブラシを取り付けてから使います。

1 ブラシを本体に差し込む

ブラシを本体正面に向け、止まるところまでまっすぐに差し込みます。

※ブラシはブラシ差し込み軸にまっすぐ差し込んでください。ななめに差し込んだり、回しながら差し込んだりすると、ブラシが破損する恐れがあります。

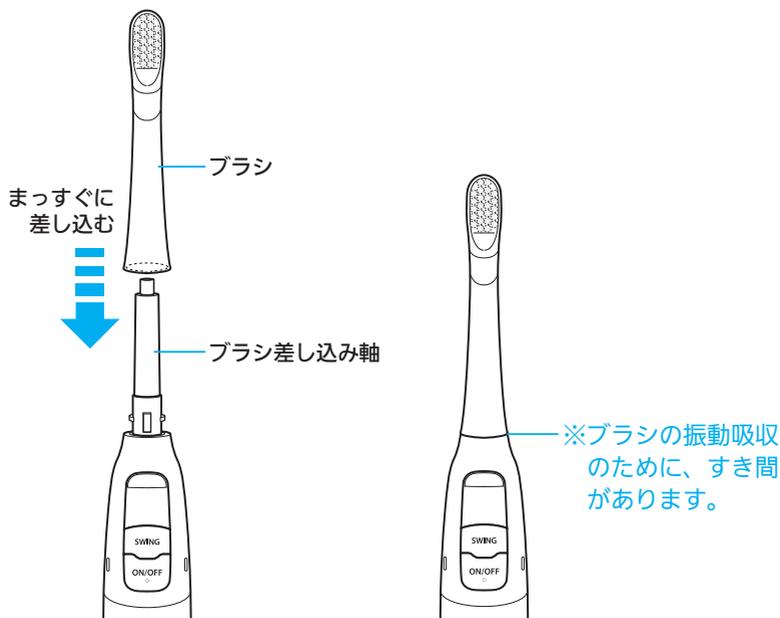

2 口の中にブラシを入れる

※毛先を水で湿らすと効果的です。

※飛び散りを防ぐために、動作させる前にブラシを口の中に入れてください。

3

電源スイッチを押して、電源を入れる

電源が入るとオートスウィングモード（オレンジ点灯）で、ブラシが振動します。


※ 2 回目以降のご使用時は、前回使用時のスウィングモードで動作します。

■ ブラシをあてる強さ

歯や歯ぐきに毛先だけが軽く触れるようにあててください。

■ ブラシの動かし方

1～2 歯ずつブラシを小さく往復させながらみがいてください。

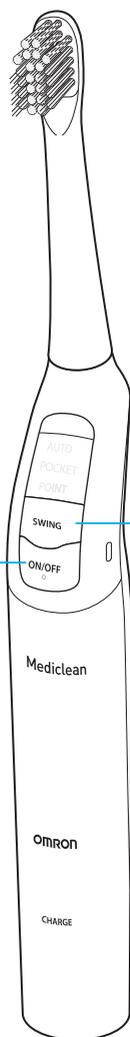

HT-B550/551 ご使用におすすめの姿勢

ご使用時は正面を向いてみがくことをおすすめします。大きくかがんだり、本体をたてたりして使用すると、おまかセンサーや 45 度お知らせランプが正しく機能しません。

※おまかセンサーが正しく機能しない場合は、部位に最適な毛先スウィングと異なるスウィングモードで振動します。


※ 45 度お知らせランプが正しく機能しなくても、本体は動作し続けます。



4

スウィングモードスイッチを押して、スウィングモードを選ぶ

スウィングモードスイッチを押すごとに次のようにスウィングモードが切り替わります。

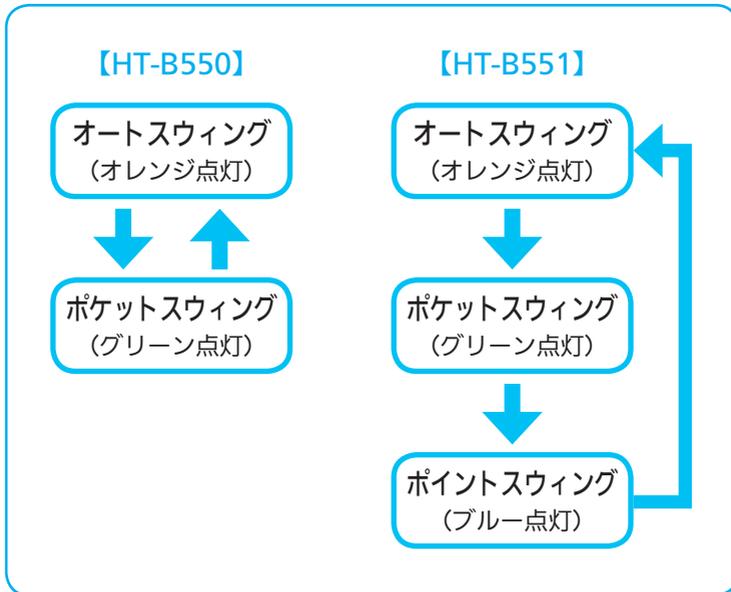

使い方

5

みがき終わったら、電源スイッチを押して、電源を切る

※飛び散りを防ぐために、ブラシを口の中に入れた状態で電源を切ってください。

スウィングモード選択

■ オートスウィングモード


スウィングモードスイッチ：オレンジ点灯

おまかセンサーによって部位を認識し、その部位に最適な「毛先スウィング」(ポケットスウィング/ポイントスウィング/ワイドスウィング)に自動切り替えます。


※ワイドスウィング

毛先がヨコ方向に振動します。
歯面をブラッシングするときにおすすめです。

(👉 12 ページ)

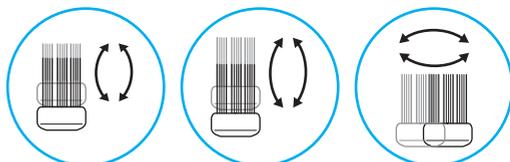



ポケットスウィング ポイントスウィング ワイドスウィング

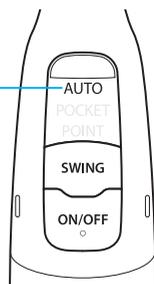

■ ポケットスウィングモード

スウィングモードスイッチ：グリーン点灯

歯周ポケットに毛先がやさしく入りやすいタテ方向に振動します。歯周ポケットをブラッシングするときにおすすめです。

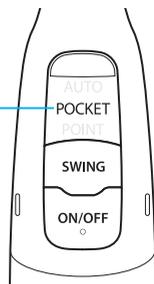
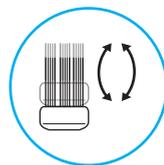


■ ポイントスウィングモード

【HT-B551のみ】

スウィングモードスイッチ：ブルー点灯

毛先がタテ方向に大きく振動します。歯のかみ合わせ面、歯並びの悪いところなどみがきにくい部位をブラッシングするときにおすすめします。

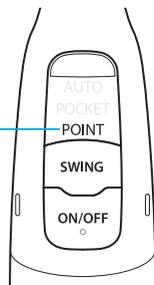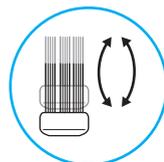


※ブラシの動きはイメージです。実際のブラシの動きは肉眼では確認できません。

オートスウィングモードのすすめ

おまかセンサーが、みがいている部位に最適な毛先スウィングを自動的に選択するので、歯ぐきにやさしく、歯垢を効果的に落とすことができます。

(➡: 振動方向)

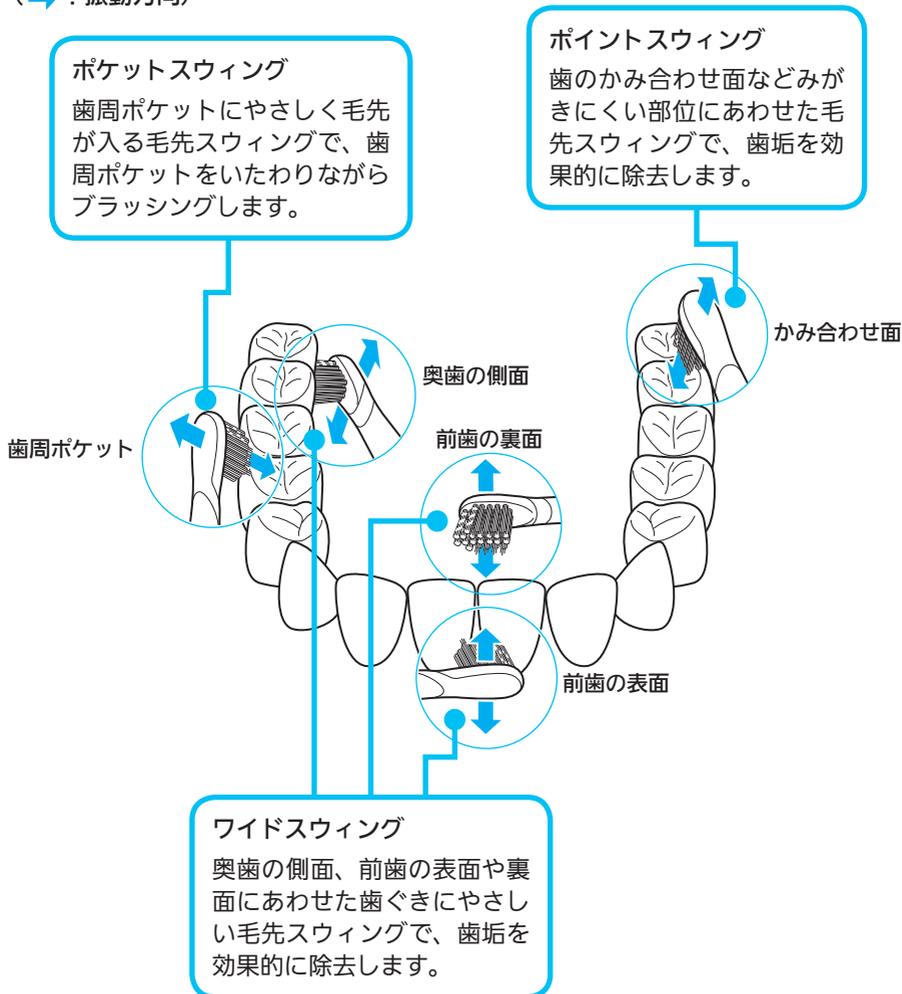


※正面を向いてみがくことをおすすめします。大きくかがんだり、本体をたてたりして使用すると、おまかセンサーが正しく機能しません。

※おまかセンサーが正しく機能しない場合は、部位に最適な毛先スウィングと異なるスウィングモードで振動します。

歯周ポケットケア



歯周ポケットケアに効果的な45度みがきのすすめ

歯周ポケットとは、歯と歯ぐきの境目の溝のことです。この歯周ポケットは、歯周病の進行により徐々に深くなります。歯周ポケットの入り口にたまっている歯垢を効果的に除去するには、45度の角度でみがくことが大切です。

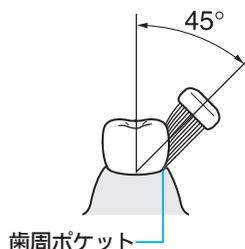


■ 45度親指ポイント

みがく部位により、下図の4カ所の凹凸いずれかに親指をおくと、ブラシが約45度の角度になり、45度みがきをナビゲートします。

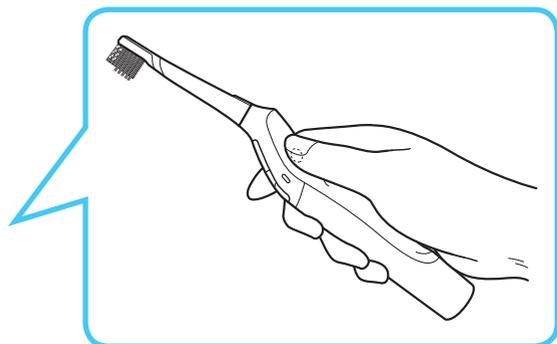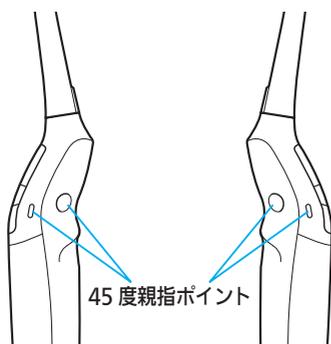


■ 45 度お知らせランプ

ブラシが約 45 度に傾くと、45 度お知らせランプ（ブルー）が点灯します。

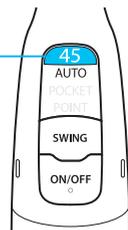

- ※すべてのスウィングモードで点灯します。
- ※ブラシと歯面の角度が 45 度前後で点灯します。
- ※点灯は動作確認上のものです。

オートスウィングモードでは、約 45 度の角度になったとき、ポケットスウィングモードを自動的に選択します。

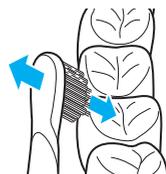


- ※正面を向いてみがくことをおすすめします。大きくかがんだり、本体をたてたりして使用すると、45 度お知らせランプが正しく機能しません。
- ※ 45 度お知らせランプが正しく機能しなくても、本体は動作し続けます。

2分みがきナビタイマー

【HT-B551のみ】

2分みがきを実践するために、みがき時間を光でお知らせします。


<歯みがき準備>

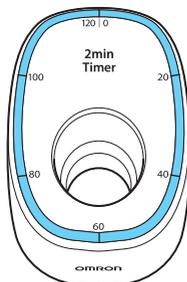



本体を充電器から取り出すと、すべてのランプが約10秒間点滅したあと、2分みがきナビタイマーが開始します。



<歯みがき中>

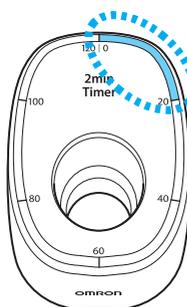

20秒ごとにランプが点灯し、次のランプが点滅します。

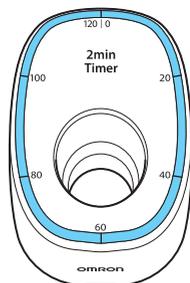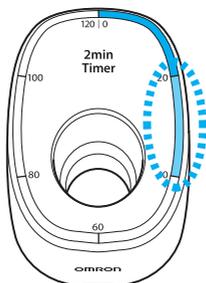

2分たつとすべてのランプが2回点滅して、消えます。

歯垢を効果的に落とすには、口中のそれぞれの部位を同じ時間、同じ順序でブラッシングすることが大切です。2分みがきナビタイマーの活用をおすすめします。


- ※スウィングモードを切り替えてもタイマーの進行は変わりません。
- ※本体を充電器に差し込むとランプが消灯し、タイマーが終了します。
- ※本体は、電源を入れてから約3分で自動的に電源が切れます。

上手なみがき方

■ 効果的なみがき方のコツ

- 歯垢を効果的に落とすには、口中のそれぞれの部位を同じ時間、同じ順序でブラッシングすることが大切です。みがく部位の順番がバラバラだと、みがき残しをする部分がでてきます。
- 歯の裏面からみがき始めます。歯の裏側は表面よりもみがきづらい部位です。集中力のあるうちに難しいほうを先にみがきましょう。

【みがき方例】

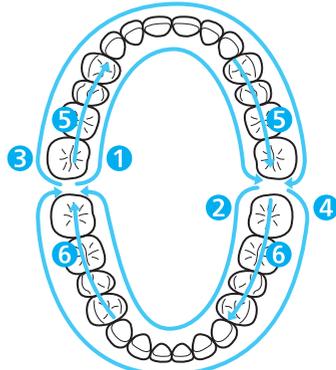

上あごの奥から下あごの奥へと順にみがきます。


※左右どちらから始めても効果は同じです。

■ ブラシをあてる強さは…

歯や歯ぐきに毛先だけが軽く触れるようにあててください。

■ ブラシの動かし方は…

1～2 歯ずつブラシを小さく往復させながらみがいてください。

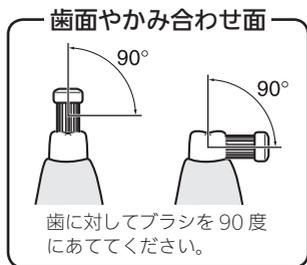

使い終わったら

1 ブラシを本体から外す

ブラシを本体からまっすぐ外します。

2 ブラシと本体を水で洗う

水洗い後は水気をよく切ってください。


※ブラシと本体の間にあるゴム部を傷つけないでください。

- 内部に水が入り、故障の原因になります。




3 本体を充電器に差し込む

乾いたやわらかい布で本体の水気をふき取ったあと、充電器に差し込んでください。

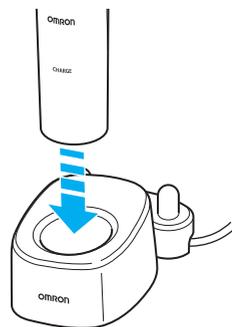

4 ブラシをブラシスタンドに差す

乾いたやわらかい布でブラシの水気をふき取ったあと、ブラシスタンドに差してください。

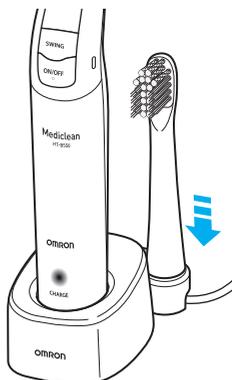

お手入れと保管

お手入れについて

本体や充電器はいつも清潔にしてお使いください。

汚れは乾いたやわらかい布でふき取ってください。

汚れがひどいときは、水または中性洗剤をしみこませた布をかたく絞ってふき取り、やわらかい布でからぶきしてください。

■お手入れのお願い

- ・充電器をお手入れするときは、ACアダプタをコンセントから抜いてください。
- ・本体内部に水などが入らないようにしてください。
- ・歯ブラシ本体をアルコールに浸したり、熱湯（40℃を超える湯）で消毒しないでください。
- ・消毒液をつけた布でふかないでください。
- ・汚れを落とすとき、ベンジン、シンナー、エタノールなどを使用しないでください。



保管について

次のようなところに保管しないでください。

- ・水のかかるところ
- ・高温、多湿、直射日光、ほこり、塩分などを含んだ空気の影響を受けるところ
- ・傾斜、振動、衝撃のあるところ
- ・化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生するところ

乳幼児の手の届かないところに置いてください。

※上記の注意事項、その他の正しい使用方法をお守りいただけない場合は、品質に責任を負いかねます。

おかしいな?と思ったら

こんなとき	原因	対処のしかた
ブラシの動作が ガタつく	本体に正しく取り付けられていない	正しく取り付けてください (☞ 8 ページ)
動かない、ブラシの振動が遅い	充電電池の容量が減っている	充電器に差し込んで充電してください (☞ 7 ページ)
本体と充電器があたたかい	充電中は少しあたたかくなります	故障ではありません また本商品の寿命にも影響ありません
使用後に本体を充電器に差し込んでも充電表示ランプが点灯しない	AC アダプタがコンセントに接続されていない	正しく接続されていることを確認してください (☞ 7 ページ)
	充電器に正しく差し込まれていない	充電器からいったん外し、もう一度差し込んでください (☞ 7 ページ) それでも充電表示ランプが点灯しない場合は、本体の故障が考えられます オムロンお客様サービスセンターに修理を依頼してください (☞ 裏表紙)
充電しても使用可能時間が短い、ブラシの振動が遅い	使い初め (購入直後や長時間放置したとき) や使用中の動作が停止したときには 16 時間以上充電してください (☞ 7 ページ)	
16 時間以上充電しても使用可能時間が短い、ブラシの振動が遅い	充電電池の寿命が考えられますが、充電電池の交換はできません 本体の廃棄をお願いします (☞ 21 ~ 22 ページ)	
本体を充電器から外しても充電表示ランプが消えない	オムロンお客様サービスセンターに修理を依頼してください (☞ 裏表紙)	

※上記の方法でも直らない場合は、オムロンお客様サービスセンターまでお問い合わせください。(☞ 裏表紙)

仕様

販売名	オムロン音波式電動歯ブラシ		
型式	HT-B550	HT-B551	
電源電圧	AC100 - 240 V 50/60 Hz		
消費電力	約 2.5 W		
充電方式	電磁誘導方式		
使用電池	ニッケル水素電池 (Ni-MH 2.4 V)		
充電時間	約 16 時間 (室温 23°Cにて)		
連続使用時間	<p>約 30 分 (室温 23°Cにて満充電後 100 g 負荷 ポケットスウィングモード時) オートパワーオフ約 3 分</p> <ul style="list-style-type: none"> ・充電電池の特性として、充電を繰り返すたびに 1 回の使用時間は次第に短くなります。満充電しても使用時間が購入後初めてのご使用時に比べて著しく短くなったら電池の寿命です。 ・電池は交換できません。寿命がきたら電池および商品の廃棄をお願いします。 		
スウィングモード	オートスウィング ポケットスウィング	オートスウィング ポケットスウィング ポイントスウィング	
振動数	オートスウィング	約 20,000 ~ 32,500 回/分 (無負荷時)	
	ポケットスウィング	約 27,000 回/分 (無負荷時)	
	ポイントスウィング	—	約 32,500 回/分 (無負荷時)
使用環境温湿度	+ 5 ~ + 35°C、30 ~ 85% RH		
保管環境温湿度	- 20 ~ + 60°C、10 ~ 95% RH		
本体質量 (ブラシ含む)	約 100 g		
充電器質量 (電源コード・ACアダプタ・ブラジスタンド含む)	約 145 g	約 210 g	
本体外形寸法 (ブラシ含む)	全長約 246 mm、最大径約 30 mm		
充電器外形寸法 (ブラジスタンド含む)	幅約 53 × 高さ約 33 × 奥行き約 83 mm	幅約 58 × 高さ約 40 × 奥行き約 103 mm	
電源コードの長さ	約 120 cm		
付属品	トリプルクリア ブラジスリム	1 本	1 本
	極細マイルド ブラジスリム	—	1 本
	ロングすき間 みがきブラシ	—	1 本
	その他	充電器 (1 台)、ブラジスタンド (1 台)、取扱説明書 (品質保証書付き)	

困ったときに・保証など

※お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

別売品について

ブラシは消耗部品です。毛先が開いてきたら交換時期です。別売品をお求めください。別売品のお求めは、オムロンお客様サービスセンター（☎電話 0120-30-6606）までお問い合わせください。

次の別売品をご用意しています。

品名	型式
トリプルクリアブラシスリム（2本）	SB-071
極細マイルドブラシスリム（2本）	SB-081
ロングすき間みがきブラシ（2本）	SB-091

困ったときに・保証など

※ブラシの種類によっては、振動が変化する場合がありますが故障ではありません。

※トリプルクリアブラシスリム、極細マイルドブラシスリム、ロングすき間みがきブラシはHT-B550/551専用ブラシです。他の機種でのご使用や、専用ブラシ以外のブラシのご使用は、破損の恐れがありますのでおやめください。

廃棄するときのお願い

本体に使用しているニッケル水素電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。

本体を廃棄するときは、ニッケル水素電池の残量をなくした後取り外し、お買い上げの販売店またはニッケル水素電池のリサイクル協力店へお持ちください。



※電源スイッチを押しても本体が動作しなくなるまで、充電池を使いきってください。

充電池の取り出し方

修理用の手順ではありません。
分解した場合には修復は不可能です。

1


動作しなくなることを確認して、
ブラシを本体から外す

(☎ 17 ページ)


2

本体カバーを外す

- ① マイナスドライバーでカバーを外し、プラスドライバーで底面のネジを外します。

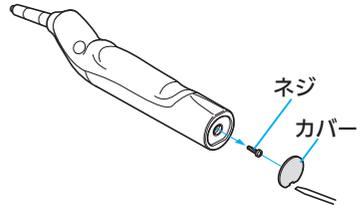

- ② 本体カバーを外します。

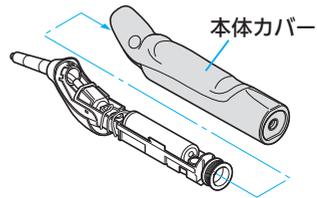


※一度でも本体カバーを取り外すと、無償保証期間内であっても有償修理になります。(裏表紙)

廃棄するとき以外は絶対に本体カバーを取り外さないでください。

3

充電電池を取り外す

テープをはがし、充電電池を取り出して、充電電池の両側のコードを切断します。

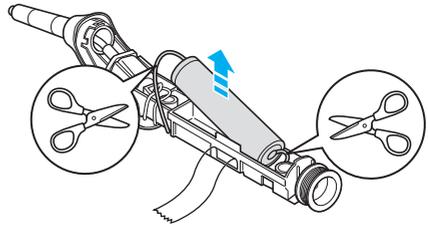

※取り外した充電電池の⊕⊖端子には、電池のショートを防ぐために、セロハンテープやシールなどを貼ってください。

※充電電池の液漏れや発熱によるやけどに十分注意してください。

※部品の角などで、けがをしないように十分注意してください。

※使用済み電池、本体および充電器の廃棄方法は、お住まいの市区町村の指導に従ってください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書にしたがった正常な使用状態で、お買い上げ後 1 年以内に故障した場合には無償修理または交換いたします。
 - 無償保証期間内に故障して修理を受ける場合は、オムロンお客様サービスセンターにご連絡ください。
 - 無償保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷。
 - (二) 品質保証書の提示がない場合。
 - (ホ) 品質保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - (ヘ) 消耗部品。
 - (ト) 故障の原因が本商品以外に起因する場合。
 - (チ) その他取扱説明書に記載されていない使用方法による故障および損傷。
- 品質保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
 - 品質保証書は本規定に明示した期間、条件のもとにおいて無償保証をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
 - 補修用部品は製造打ち切り後、最低 5 年間保有しています。

品質保証書

このたびは、オムロン商品をお買い求めいただきありがとうございました。商品は厳重な検査をおこない高品質を確保しております。しかし通常のご使用において万一、不具合が発生しましたときは、保証規定によりお買い上げ後、一年間は無償修理または交換いたします。

※商品の保証は、日本国内での使用の場合に限りです。
This warranty is valid only in Japan.

※以下につきましては、必ず販売店にて、記入捺印していただくください。

販売名 オムロン音波式電動歯ブラシ
メディクリン HT-B550/551

ご芳名

ご住所

TEL ()

お買い上げ店名



住所

TEL ()

お買い上げ年月日 年 月 日

発売元

オムロンヘルスケア株式会社

〒617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪 53 番地



オムロン健康商品のお問い合わせは

修理のご用命、別売品・消耗部品のお求めも、この電話で承ります。
修理には、便利な引き取りサービスをご利用ください。



オムロンお客様サービスセンター ダイヤルは正確に

おろんオムロン

☎ 電話 **0120-30-6606**

通話料無料

FAX **0120-10-1625**

通話料無料

受付時間

9:00～19:00 月～金（祝日を除く）
都合によりお休みをいただいたり、
受付時間帯を変更させていただく
ことがありますのでご了承ください。

ホームページ <http://www.healthcare.omron.co.jp/>

※通信料はお客様ご負担となります。（別売品・消耗部品は、インターネットでもお求めいただけます。）