

OMRON


取扱説明書

オムロン

音波式電動歯ブラシ

HT-B570T

Mediclean メディクリーン

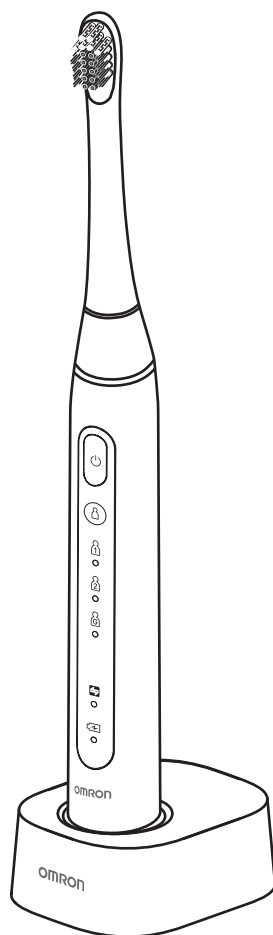

このたびは、オムロン製品をお買い上げいただき、
ありがとうございました。

- ・安全にお使いいただくため、取扱説明書を必ずお読みください。
- ・本書は、いつもお手元においてご使用ください。
- ・本書は、品質保証書を兼ねています。紛失しないように保管してください。
- ・本書に記載しているイラストはイメージ図です。

最初に

安全上のご注意	3
入っていますか?	6
各部の名前	7
各機能の概要	8
充電する	9
ブラシの取り付け方	9

使い方とお手入れ


使い方	10
スマートフォンに転送する	14
使い終わったら	15
Bluetooth の ON / OFF	16
お手入れと保管	17

必要なときに

おかしいな?と思ったら	18
サポート情報	20
別売品のご紹介	21
仕様	22
廃棄するときのお願い	24
保証規定／品質保証書	裏表紙

歯みがきガイド

歯みがきのデータをもとに最適な歯みがきをサポートします。

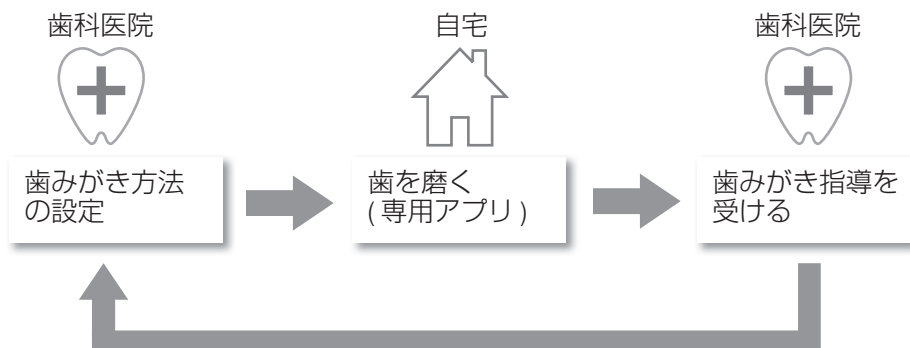

安全上のご注意

- お使いになる前に必ずお読みください。
- ここに示した内容は、製品を安全に正しくご使用いただき、使用者や他の人々への危害、財産への損害を未然に防止するためのものです。

警告、注意について	
⚠ 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定されます。
⚠ 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う、または物的損害 * の発生が想定されます。

* 物的損害とは、家屋や家財、および家畜やペットに関わる拡大損害を示します。

⚠ 警告	
• 本体やトラベルケースを、ペースメーカーなど植込み型医療機器の装着部から 15cm 以内に近づけない。 ▶ 本体または他機器の誤動作の原因になります。	
• 航空機内や病院など無線機器の使用が禁止された区域では必ず本体の Bluetooth 通信を OFF にしてください。「Bluetooth の ON / OFF」(P.16 ページ)	
• 次の方は使用しない。または使用前に歯科医に相談する。 ■ 口内の感覚が敏感な方 ■ 口腔または歯周の手術直後や治療中の方 ■ 口腔内に気になる症状（治療中の歯、不安定な入れ歯など）のある方 ■ 歯茎からの出血が続く、または大量の出血がある方 ▶ 傷口の悪化や、けがの原因になります。	
• ブラシは乳幼児などの手の届くところに保管しない。万一、ブラシを飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談する。 ▶ 誤飲や乳幼児のけがの原因になります。	
• 歯科医、歯科衛生士の指導のもと使用する。	
• ブラシは複数の人で共用しない。 ▶ 病原菌に感染する原因になります。	
• コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流 100 ～ 110 V 以外では使用しない。 ▶ たこ足配線などにより定格を超えると、火災の原因になります。	
• 傷んだ電源コードや電源プラグは使用しない。 ▶ 感電やショート、発火の原因になります。	

• 充電器を水洗いしない。 ▶感電の原因になります。
• 本体や充電器は浴室内などの水のかかる場所や湿気の多い場所で使用しない。 • めれた状態で充電しない。 ▶感電や故障の原因になります。
• めれた手で電源プラグの抜き差しをしない。 ▶感電やけがの原因になります。
• 本体は廃棄のとき以外は絶対に分解しない。 ▶けがや故障の原因になります。

⚠ 注意


• 電源プラグを差し込んだまま、充電器のお手入れはしない。 ▶感電やけがの原因になります。
• 本体を廃棄するときは、取り外した充電電池の ⊕ ⊖ 端子にセロハンテープやシールなどを貼り付ける。 ▶貼り付けない場合、ショートする恐れがあるため、火災の原因になります。
• 金属類、ほこりなどが付着した状態では使用しない。 ▶ほこりに湿気が加わると、感電やショート、発火の原因になります。
• 電源プラグの差し込みが緩いまま使わない。 ▶感電やショート、発火の原因になります。
• 電源プラグを抜くときは電源プラグを持ち、電源コードを引っ張らない。 ▶電源コードの断線やショートにより、火災や感電の原因になります。
• 電源コードを傷つけたり、加工したりしない。 • 電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。 • 電源コードを束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。 ▶感電や火災、故障の原因になります。
• 1 週間以上使用しないときは、電源プラグを差し込んだままにしない。 ▶絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。
• 専用の充電器以外は使用しない。 ▶充電電池が発熱し発火や感電、故障の原因になります。

• 歯や歯茎にブラシを強く押しあてたり、毛先以外のプラスチック部分をあてたりしない。 また、長時間同じ箇所を磨かない。 ▶ 歯や歯茎を傷つけたり、本体が故障したりします。
• 人以外に使用しない。 • 自分で意思表示ができない人は使用しない。 ▶ 事故やトラブルの原因になります。
• 歯みがき以外の目的には使用しない。
• 本体や充電器、トラベルケースを踏んだり、落としたり、強い衝撃を与えない。 ▶ けがや故障の原因になります。
• 充電池を火の中に入れない。 ▶ 破裂してけがなどの原因になります。
• 鉄板など金属板の上で充電したり、通信しない。 ▶ 充電効率が落ちます。 ▶ 通信距離が短くなります。
• トラベルケースをパソコンなどの電子機器に近づけない。 ▶ 内蔵されている磁石の影響でパソコンなどの電子機器の故障の原因になります。
• トラベルケースを分解して磁石を取り出さない。 ▶ 磁石が破損してけがをする原因になります。
• トラベルケースを強い静電気や電磁波のある場所、磁石等の近くに置かない。
• トラベルケースに磁気テープ、磁気カード、フロッピーディスク等を近づけない。 ▶ 内蔵されている磁石の影響で磁気記録された内容が損なわれる原因となります。
• 本体をトラベルケースに入れたままデータ転送しない。 • データ転送するときは、本体をトラベルケースに近づけない。 ▶ 内蔵されている磁石の影響で本体の故障の原因になります。


入っていますか？

☒ 次のものがすべてそろっていることを確認してください。


☐ 本体

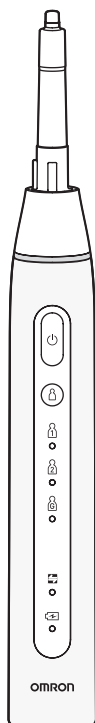


☐ 充電器

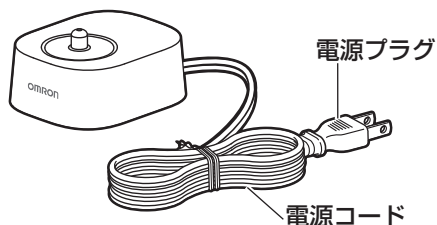

☐ トラベルケース

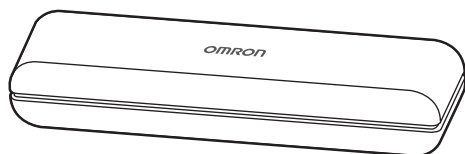

☐ ブラシスタンド

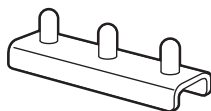


☐ 取扱説明書
(本書：品質保証書付き)

☐ スタートアップガイド

 お知らせ

- 不足しているものがありましたら、オムロンお客様サービスセンターにご連絡ください。
( 20 ページ)
- ブラシは歯科医に薦められたものを使用するため、別売りです。

各部の名前

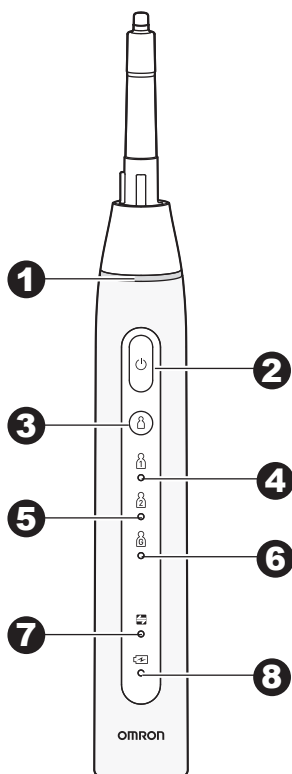

①		角度お知らせランプ 通常は消灯しています。設定と異なる角度で磨いているときに点灯します。
②		スタートスイッチ - 電源を入れるとき - 歯みがきを開始 / 停止 / 一時停止するとき に使います。
③		ユーザースイッチ - 電源を入れるとき - ユーザーを選択するとき - Bluetooth を ON/OFF にするとき に使います。
④		ユーザーランプ 1 ユーザー 1 を選択したときに点灯します。 アプリと通信しているときに点滅します。
⑤		ユーザーランプ 2 ユーザー 2 を選択したときに点灯します。 アプリと通信しているときに点滅します。
⑥		ゲストランプ ゲストを選択したときに点灯します。
⑦		通信お知らせランプ 転送されていない歯みがきデータが多くなると点滅または点灯します。 (14 ページ)
⑧		充電お知らせランプ 充電中に点灯します。 充電が必要なときに点滅します。 (9 ページ)

歯みがき機能

歯みがき機能は全体ケアと集中ケアがあります。(📖 11 ページ)

■全体ケア

口腔内全体を効果的に歯みがきできます。

■集中ケア

歯並びが悪いところなど一定部分のみを集中的に歯みがきできます。

📖 お知らせ

- 全体ケア、集中ケアは歯科医院で設定します。ご自身で設定、変更はできません。

歯みがきナビタイマー

磨きエリアごとに設定された時間が経過すると短く振動し、ブラシを移動するタイミングをお知らせします。


📖 お知らせ

- ナビタイマーは歯科医院で設定します。ご自身で設定、変更はできません。

角度お知らせ

角度お知らせランプは通常消灯しています。

設定と異なる角度で磨いているときに点灯（赤）します。

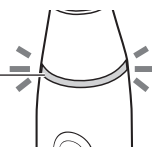

📖 お知らせ

- 正面を向いて歯を磨いてください。大きくかがんだり、首を曲げたりすると、角度お知らせランプが正しく機能しません。
- 角度お知らせランプが点灯しても、本体は動作し続けます。
- ゲストでは点灯しません。



ゲスト

ユーザー 1、ユーザー 2以外の方が使用する場合に選択します。

ゲストを選択すると、一定の振動で3分間の歯みがきができます。(📖 13 ページ)


充電する

- 使い始め（購入直後や長時間放置したとき）や使用中に動作が停止したときには、充電が完了するまで充電してください。

① 電源プラグをコンセントに接続する

② 本体を充電器に置く

充電お知らせランプが点灯します。

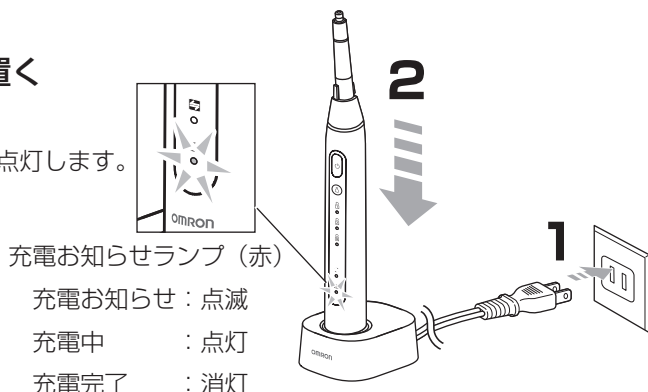

📖 お知らせ

- ・充電残量が減ってくると充電お知らせランプが点滅しますので、すぐに充電してください。
- ・充電開始から充電完了までは、約10時間必要です。
- ・充電環境や充電残量により、10 時間以内に充電が完了する場合があります。
- ・充電中に本体と充電器が少しあたたかくなることがありますが、異常ではありません。
- ・充電中は本体の電源を入れることができません。


ブラシの取り付け方

ブラシを本体に差し込む

ブラシの毛先が本体正面を向くようにし、カチッとなるまで真っすぐに差し込みます。


📖 お知らせ

- ・ブラシは本体に真っすぐ差し込んでください。
ななめに差し込んだり、回しながら差し込んだりすると、本体 / ブラシが破損する恐れがあります。

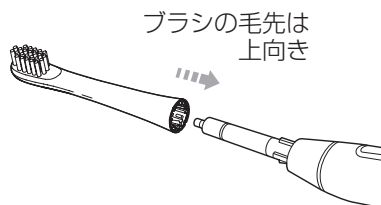

- 歯科医院にて本体に設定された内容で歯みがきを行ってください。

歯みがき機能（ 8 ページ）

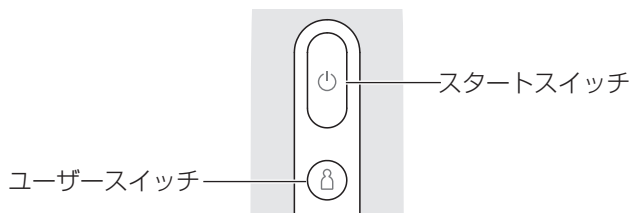

<スマートフォンを利用する方>

- スマートフォンの「設定」から Bluetooth を「オン」にする
- スマートフォンに専用アプリをインストールする
アプリのインストール方法はスタートアップガイドを参照してください。
- 専用アプリを開き、アプリの表示に従って初期設定する
本体は電源を入れてから2分で自動的に電源が切れます。
初期設定が完了する前に、電源が切れた場合は、もう一度やりなおしてください。

お知らせ

- 専用アプリは、予告なく変更・終了することがあります。

<スマートフォンを利用しない方>

11 ページのステップ②から参照してください。

全体ケア / 集中ケア

● 歯科医院で集中ケアの設定をしない場合は全体ケアのみになります。

① 専用アプリを開き、 アプリに従って操作してください


② 本体の電源を入れる

- ・ 充電器に置いている場合は、本体を充電器から外すと自動的に電源が入ります。
- ・ 充電器に置いていない場合は、スタートスイッチまたはユーザースイッチを押すと電源が入ります。

電源が入ると、ユーザーランプが点灯します。

③ ユーザーを選択する

ユーザースイッチを押して、ユーザーを選択します。

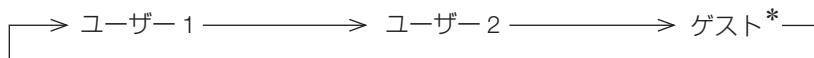


* ゲスト (13 ページ)

お知らせ

- ・ ユーザー2が設定されていない場合は、選択できません。

④ ブラシの原点位置合わせをする

ブラシを原点位置に垂直に置き、スタートスイッチを押します。
スタートスイッチを押すと本体が原点を認識し、1回振動します。

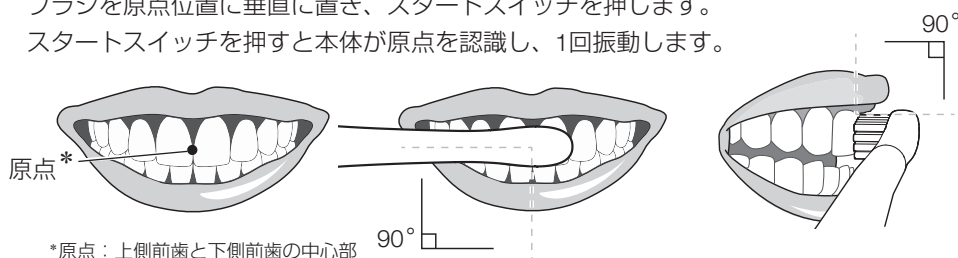

お知らせ

- ・ ブラシ位置を正しく検出するために、必ず原点位置に垂直に置いてください。
- ・ 毛先を水で湿らせると効果的です。
- ・ 歯みがき粉を使用される場合は、研磨剤が入っていない一般的な歯みがき粉を少量付けてください。ヤニ取り用・美白用などの歯みがき粉は、研磨剤により歯を研磨する作用が大きいため、歯や歯茎を傷める原因になりますので、おすすめできません。ご使用の場合は、歯科医にご相談ください。
- ・ 個人差はありますが、初めてご使用になる際、独特な刺激を感じる場合があります。これは音波式電動歯ブラシ特有の音波振動によるものです。

⑤ 全体ケア開始

専用アプリまたは、歯科医院から渡された歯みがきガイド（紙）に従い、ブラシを開始位置に移動し、スタートスイッチを押します。

全体ケアが開始しますので、ブラシの毛先全体が歯面にあたるように軽くあて、磨いてください。歯みがきデータを本体に保存します。

⑥ 磨きエリアの移動

磨いているエリアが終わると、本体は短く振動しますので、次のエリアにブラシを移動してください。

⑦ 全体ケア終了

設定された全体ケアの磨き時間が経過すると全体ケアの終了です。

集中ケアの設定がない場合は、自動的に電源が切れます。

集中ケアの設定がある場合は、自動的に一時停止します。

⑧ 集中ケア開始

一時停止をしている間に、歯科医院から指定されたブラシに交換します。

専用アプリ、または歯みがきガイド（紙）に従って、ブラシを開始位置に移動し、スタートスイッチを押すと再開します。

⑨ 集中ケア終了

設定されたエリアの歯みがき時間が経過すると、終了して電源が切れます。

歯みがき途中

途中で歯みがきを一時停止したいとき...

スタートスイッチを押してください。歯みがきを再開するときは、もう一度スタートスイッチを押してください。

- ・一時停止中はユーザーランプが点滅します。
- ・そのまま 2 分間放置すると、一時停止前の歯みがきデータは破棄され、電源が切れます。

途中で停止し、電源を切りたいとき...

スタートスイッチを2秒以上押してください。

歯みがき途中で停止すると、それまでの歯みがきデータは破棄され、電源が切れます。

ゲスト機能を使用する場合

ゲスト機能 ( 8 ページ)


① ユーザースイッチを押して、ゲストを選択する

ゲストランプが点灯します。

② 口の中にブラシを入れる

③ スタートスイッチを押す

④ 磨き終わったら、スタートスイッチを押して電源を切る

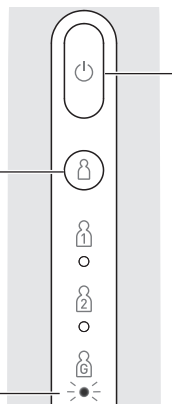

お知らせ

- 電源を入れてから約3分で自動的に電源が切れます。
- 歯みがきデータは保存されません。
- 角度お知らせランプは点灯しません。
- 30 秒ごとに短く停止し、歯みがき時間の経過をお知らせします。上下・左右の磨き時間を意識することで、効果的な歯みがきが可能です。
- 歯垢を効果的に落とすには、口中のそれぞれの部位を同じ順序、同じ時間で歯みがきすることが大切です。

- 本製品は、スマートフォンに歯みがきデータを転送できます。
- 転送されたデータについては、歯科医の指導を受けてください。


通信お知らせランプについて

通信お知らせランプが点灯／点滅したときは、すみやかに歯みがきデータを転送してください。

点滅：保存できる本体メモリの容量が少なくなっています。

点灯：本体メモリが最大に達しました。

そのまま使用を続けると、古い歯みがきデータが消去され、最新の歯みがきデータが保存されます。
すぐに歯みがきデータを転送してください。

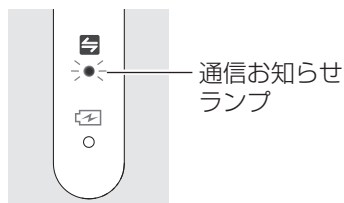

① 専用アプリを開く

② 専用アプリの画面の指示に従って、歯みがきデータを転送する


データ転送中は、ユーザーランプが点滅（速）します。

お知らせ

- ・スマートフォンを利用しない方は、歯科医院にて歯みがきデータの転送を依頼してください。

使い終わったら

① 本体からブラシをまっすぐ引いて外す

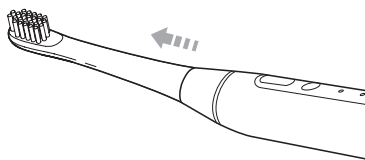

② 外したブラシを水で洗う


📖 お知らせ

- 流水で歯ブラシに付いた汚れ等を落とし、よく振って水気を切った後、ブラシスタンドに立ててください。

③ 本体を水で洗う

📖 お知らせ

- ステムと本体の間にあるゴム部を傷つけたり、ステムに必要以上に力を加えたりしないでください。ゴム部に傷がつくと、本体内部に水が入り、故障の原因となります。

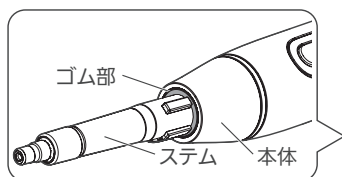

④ 水分を拭き取り保管する

📖 お知らせ


- 本体は乾いたやわらかい布で拭いてください。
- 平らな風通しのよいところに置いてください。
- 充電器には、ぬれた状態で置かないでください。

トラベルケースについて

付属のトラベルケースに本体とブラシを2本収納できます。


📖 お知らせ

- 本体、ブラシは上向きにして収納してください。

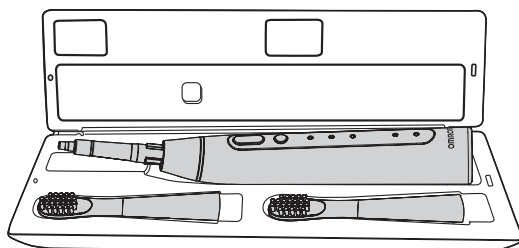

Bluetooth の ON / OFF


●無線機器の使用が禁止された区域（航空機内、病院、日本国外など）では、Bluetooth をOFFにしてください。

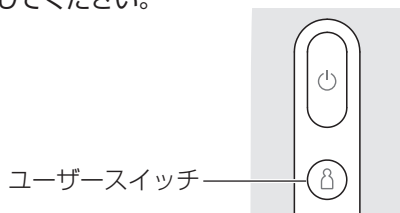

Bluetooth を OFF にするとき

電源が入っていない状態で、ユーザースイッチを 10 秒以上押してください。


ユーザーランプとゲストランプが下図の通り点灯します。

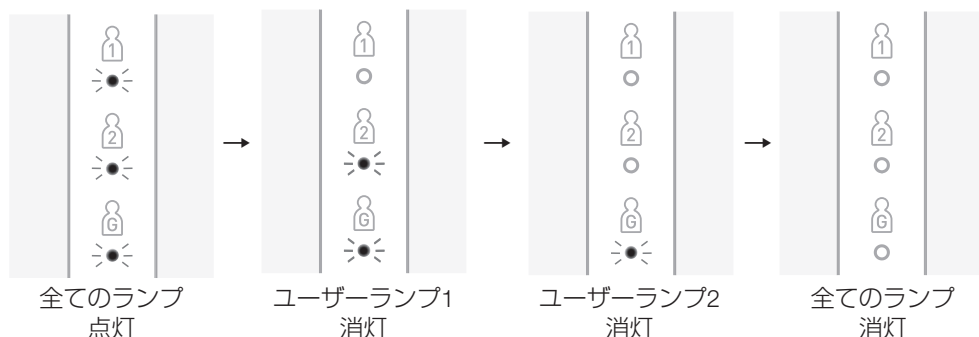

Bluetooth を ON にするとき

電源が入っていない状態で、ユーザースイッチを 10 秒以上押してください。

ユーザーランプとゲストランプが下図の通り点灯します。

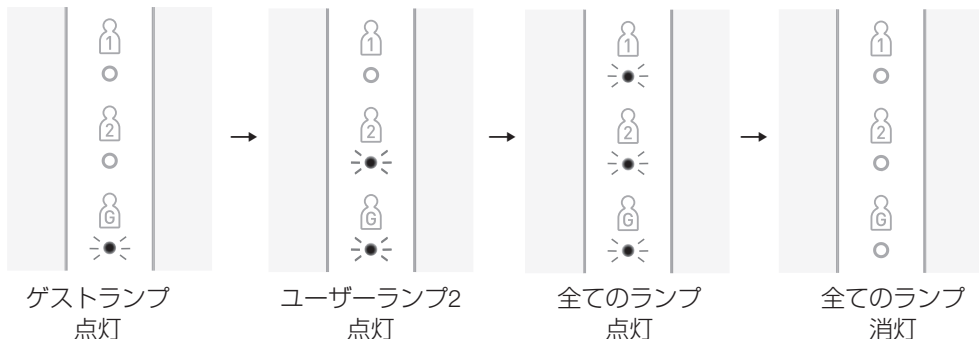

お手入れ時のお願い

- ブラシ、本体、充電器、トラベルケースはいつも清潔にしてお使いください。
- 歯みがき粉が付着した状態で放置すると、本体表面が劣化する場合があります。
- 充電器をお手入れするときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本体内部、充電器内部、トラベルケース内部に水などが入らないようにしてください。
- ブラシ、本体、充電器、トラベルケースをアルコールに浸したり、熱湯（40℃を超える湯）で消毒したりしないでください。
- 汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
- 汚れがひどいときは、水または薄めた中性洗剤をしみこませた布をかたく絞って拭き取り、やわらかい布でから拭きしてください。
- 汚れを落とすとき、ベンジン、シンナー、エタノールなどを使用しないでください。



保管時のお願い

- 次のようなところに保管しないでください。
 - 水のかかるところ
 - 高温、多湿、直射日光、ほこり、塩分などを含んだ空気の影響を受けるところ
 - 傾斜、振動、衝撃のあるところ
 - 化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生するところ
- 乳幼児、お子様の手の届かないところに置いてください。

お知らせ

- 上記の注意事項、その他の正しい使用方法をお守りいただけない場合は、品質に責任を負いかねます。

こんなとき	原因・対処のしかた
ブラシの動作が ガタつく	ブラシが本体に正しく取り付けられていない。 ▶ ブラシを正しく取り付けてください。(9 ページ)
動かない、ブラシの 振動が弱い	充電電池の残量が減っている。 ▶ 本体を充電器に置いて充電してください。(9 ページ)
	使いはじめ（購入直後や長時間放置したとき）や使用中に動作が停止した。 ▶ 充電が完了するまで充電してください。(9 ページ)
本体と充電器が あたたかい	商品の特性上少しあたたかくなります。 ▶ 故障ではありません。また本商品の寿命にも影響ありません。
使用後に本体を充電器 に置いても充電お知らせ ランプが点灯しない	電源プラグがコンセントに接続されていない。 ▶ 正しく接続されていることを確認してください。(9 ページ)
	本体を充電器に正しく置いていない。 ▶ 充電器からいったん外し、もう一度置いてください。(9 ページ) それでも充電お知らせランプが点灯しない場合は、本体または充電器の故障が考えられます。 オムロンお客様サービスセンターに修理を依頼してください。(20 ページ)
	充電が完了している。 ▶ 充電電池が満充電になると充電お知らせランプが消灯します。
充電が完了しても使用 可能時間が短い、 ブラシの振動が弱い	寒い場所でのご使用は、使用可能時間が短くなることがあります。
	充電電池の寿命が考えられますが、充電電池の交換はできません。 ▶ 本体の廃棄をお願いします。(24 ページ)
	鉄板など金属板の上で充電している。 ▶ 充電効率が落ち、正しく充電できない場合があります。
充電お知らせランプ が消えない	本体を充電器から外す、または10時間以上充電しても充電お知らせランプが消えない場合は、オムロンお客様サービスセンターに修理を依頼してください。(20 ページ)

こんなとき	原因・対処のしかた
歯茎から出血する、 振動が強く歯茎が 痛い	電動歯ブラシを使用し始めてから数日間は若干歯茎から出血することがあります。 ▶通常、その場合の出血は数日で止まります。出血が2週間以上続いた場合は使用を中止し、歯科医の診断を受けてください。 使用ブラシが合っていない。 ▶歯科医にご相談ください。
  通信お知らせランプ が点滅する	保存できる本体メモリの容量が少なくなっている。 ▶スマートフォンを利用する方：歯みがきデータを転送してください。 ( 14 ページ) ▶スマートフォンを利用しない方：歯科医院に歯みがきデータの転送を依頼してください。
  通信お知らせランプ が点灯する	本体メモリが最大に達した。 ▶スマートフォンを利用する方：歯みがきデータを転送してください。 ( 14 ページ) ▶スマートフォンを利用しない方：歯科医院に歯みがきデータの転送を依頼してください。 ▶そのまま使用続けると、古い歯みがきデータが消去され、最新の歯みがきデータが保存されます。
通信ができない/完 了しないとき	Bluetooth が ON になっていることを確認してください。 ( 16 ページ) ▶上記でも直らない場合はアプリのヘルプを参照してください。

お知らせ

- 上記の方法でも直らない場合は、オムロンお客様サービスセンターまでお問い合わせください。( 20 ページ)
- 本製品の故障や修理のときは、歯みがきデータなどすべての設定やデータが消去されます。

必要なときに
2

サポート情報

- 本製品に役立つウェブサイトをご紹介します。

替えブラシのご注文

- 歯科医院で購入してください。

お問い合わせの前に

- お問い合わせの前に「おかしいな?と思ったら」(🔍 18 ページ)をご確認ください。

オムロンお客様サービスセンター

- 「オムロン ヘルスケア お客様サポート」ウェブサイト



QRコード

<http://www.healthcare.omron.co.jp/support/>

あるいは検索サイトで

オムロンヘルスケア サポート 🔍 と検索する

別売品のご紹介

■ 替えブラシは、歯科医院で購入してください。

品 名	型 式
歯垢除去ブラシ（歯科用）（1 本）	SB-042M
歯周ケアブラシ（歯科用）（1 本）	SB-082M
すき間みがきブラシ（歯科用）（1 本）	SB-092M

仕 様

販 売 名	オムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B570T	
電 源 電 圧	AC100-110 V 50/60 Hz	
消 費 電 力	約1 W (充電時)	
充 電 方 式	電磁誘導方式	
使 用 電 池	ニッケル水素電池 (Ni-MH 2.4 V)	
充 電 時 間	約 10 時間 (室温23 °Cにて)	
使 用 時 間	約 30 分 (室温23 °Cにて満充電後100 g 負荷時) ・ 充電電池の特性として、充電を繰り返すたびに1回の使用時間は次第に短くなります。 満充電しても使用時間が購入後初めてのご使用時に比べて著しく短くなったら、電池の寿命です。 ・ 電池は交換できません。寿命がきたら、電池および商品の廃棄をお願いします。	
振 動 数	約 20,000 回/分 ~ 35,600 回/分	
通 信 方 式	Bluetooth® low energy technology	
本 体 メ モ リ 容 量	歯みがきデータ 60 分相当	
Bluetooth®通信距離	約10 m*	
使 用 環 境 条 件	+ 5~+ 35 °C / 30~85% RH	
保 管 環 境 条 件	-20~+ 60 °C / 10~95% RH	
質 量	本体：約65 g (ブラシ含む)、充電器：約115 g、 トラベルケース：約130 g	
寸 法	本体：全長約229 (ブラシ含む) × 幅約24 × 奥行き約28.5 mm 充電器：幅約51 × 高さ約35.5 × 奥行き約63 mm (電源コードの長さ：約120 cm) ブラシスタンド：幅約96 × 高さ約27 × 奥行き約30 mm トラベルケース：幅約214 × 高さ約36.5 × 奥行き約54 mm	
付 属 品	トラベルケース	1 個
	ブラシスタンド	1 台
	そ の 他	充電器 (1 台)、取扱説明書 (品質保証書付き)、スタートアップガイド

*通信距離、使用時間は、通信機器間の距離や障害物、電波状況、お使いの機器の使用状況などにより変化します。

また、電波状況により通信が切断される場合があります。

 お知らせ

- ・ お断りなく仕様を変更することがあります。

商標について


- **Bluetooth®** ワードマークおよびロゴは、**Bluetooth SIG, Inc.** が所有する商標であり、オムロン ヘルスケア株式会社は、これらの商標を使用する許可を受けています。

電波法について

- 本製品には、電波法に基づく工事設計認証を受けた **2.4 GHz 帯小電力データ通信システム**の無線設備が組み込まれています。本製品を改造したり、無線設備に記載されている認証番号を消さないでください。電波法に抵触する恐れがあります。
- 本製品は日本国内専用です。日本国外で使用しないでください。海外で使用されると、その国の電波法に抵触する恐れがあります。

電波干渉に関するご注意

- 本製品の使用周波数帯では、無線LAN や電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される移動体識別用構内無線局、および免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等（以下、「他の無線局」と略す）が運用されています。
 - 1 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」を運用していないことを確認してください。
 - 2 万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに使用場所を変えるか、製品の使用を停止（電波の発信を停止）してください。
 - 3 その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、オムロンお客様サービスセンターにお問い合わせください。（ 20 ページ）
- 次のマークは電波の種類と干渉距離を表しています。

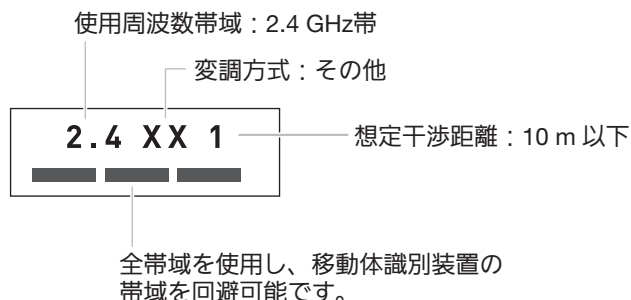

廃棄するときのお願い

本体に使用しているニッケル水素電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。本体を廃棄するときは、ニッケル水素電池の残量をなくしたあと取り外して、ニッケル水素電池のリサイクル協力店へお持ちください。




お知らせ

- ゲストに設定（ 13 ページ）し、スタートスイッチを押しても本体が動作しなくなるまで、充電池を使いきってください。

充電池の取り出し方

**修理用の手順ではありません。
分解した場合には修復は不可能です。**

① 動作しなくなることを確認して、ブラシを本体から外す

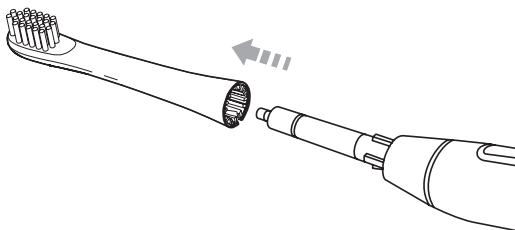


② イラストを参考に本体を折る

なるべく靴底の堅い靴を履いて、地面が固い場所（コンクリートなど）で行ってください。

お知らせ


- 素足では行わないでください。けがの原因になります。

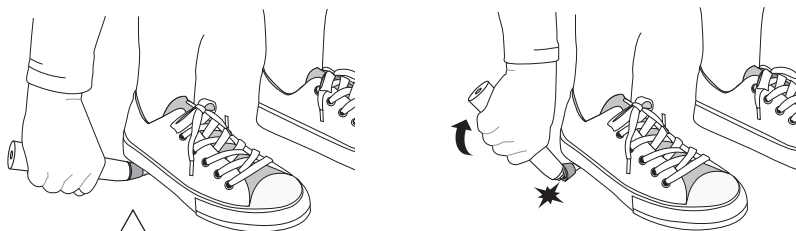


スタートスイッチが付いている側を上向きにして本体を折ってください。

③ キャップ部分と本体を分離させる


本体上部にリング部分（乳白色）が残っているか、残っていないかを確認してください。

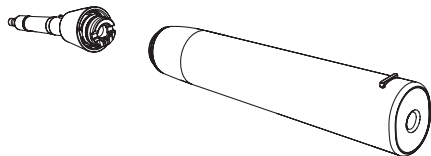

リング部分（乳白色）が残っている場合
（👉 手順4 へ）

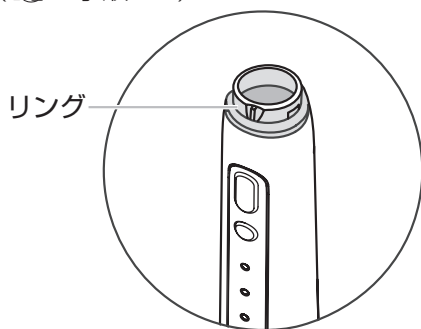

リング部分（乳白色）が残っていない場合
（👉 手順6 へ）

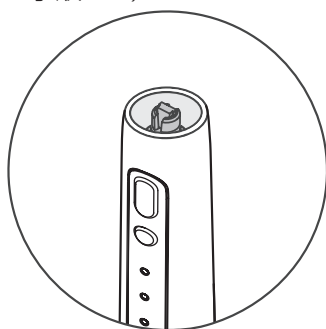


④ ハンマーで本体上部のリング部分をたたく

安全のため、軍手を着用してください。

本体をビニール袋の中に入れ、リング部分が割れた状態になるまでたたいてください。


📖 お知らせ

- ビニール袋の中に入れないでたたくと、破片が飛び散り、けがの原因になります。

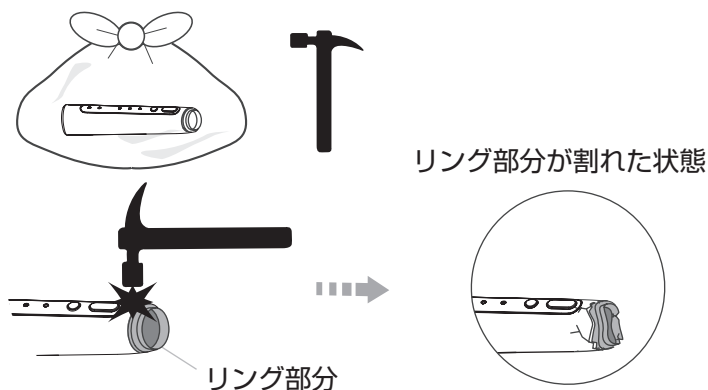


⑤ 割れたリング部分をペンチで取り除く

リング部分を取り除くと、インナーケースの上部が見える状態になります。

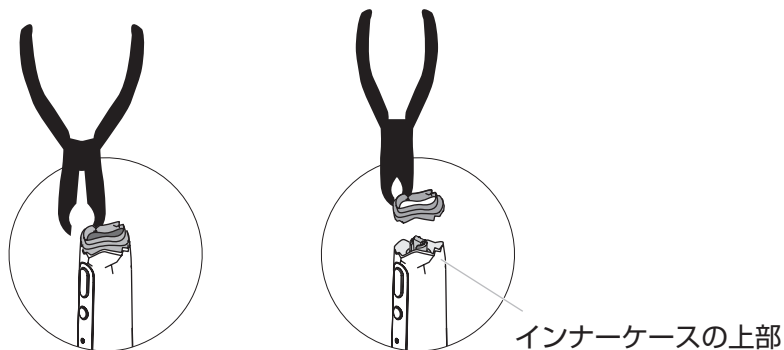


⑥ インナーケースを押し出す


本体の上部にある中央の突起部をペンチの先で押し込み、本体の下部からインナーケースを押し出します。

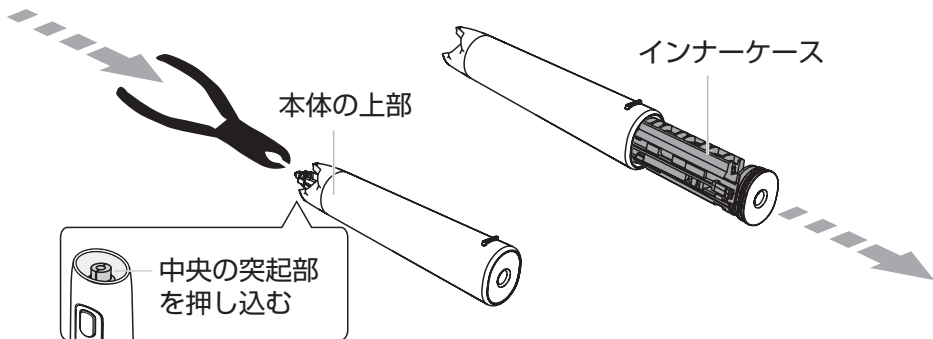

⑦ 充電電池カバーを取り外す

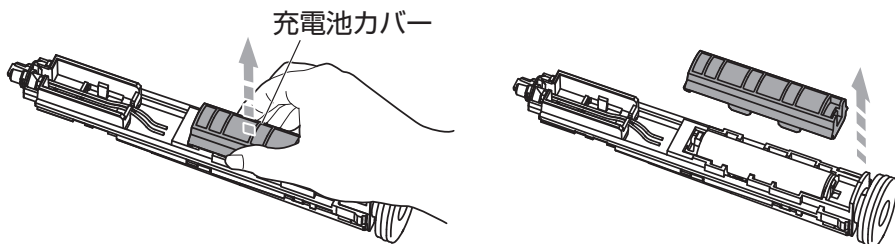


8 LEDカバーを取り出す

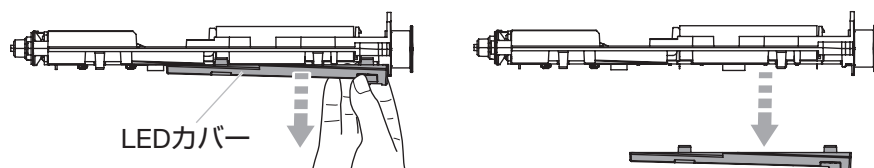

9 充電電池の両側の金具を切断する

先端の細いはさみを使用して、金具を切断します。

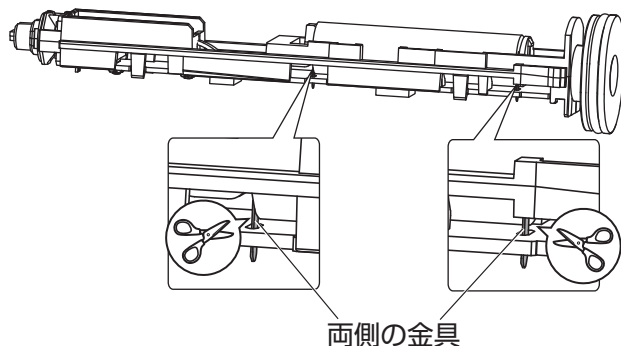


お知らせ

- 金具を切断しにくい場合は、先の細い刃物を使用してください。

10 充電電池を取り外す

取り外した充電電池の⊕ ⊖端子には、ショートを防ぐために、セロハンテープやシールなどを貼ってください。

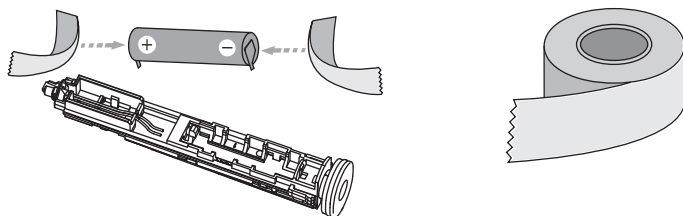

<廃棄時のご注意>

- 充電電池の液漏れや発熱によるやけどに十分注意してください。
- 部品の角や電池の金具などで、けがをしないように十分注意してください。
- 本体および充電器の廃棄方法は、お住まいの市区町村の指導に従ってください。

保証規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きにしたがった正常な使用状態で、お買い上げ後1年以内に故障した場合には無償修理または交換いたします。
2. 無償保証期間内に故障して修理を受ける場合は、オムロン お客様サービスセンターにご連絡ください。
3. 無償保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下・水没などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷。
 - (ニ) 品質保証書の提示がない場合。
 - (ホ) 品質保証書にお買い上げ年月日、お客様名、歯科医院の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - (ヘ) 本体以外の消耗部品。
 - (ト) 故障の原因が本製品以外に起因する場合。
 - (チ) その他取扱説明書に記載されていない使用方法による故障および損傷。
4. 品質保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
5. 品質保証書は本規定に明示した期間、条件のもとにおいて無償保証をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
6. 補修用部品は製造打ち切り後、最低5年間保有しています。

品質保証書

このたびは、オムロン製品をお買い求めいただき、ありがとうございました。製品は厳重な検査をおこない、高品質を確保しております。しかし、通常のご使用において、万一不具合が発生しましたときは、保証規定により、お買い上げ後1年間は無償修理または交換いたします。

※製品の保証は、日本国内での使用の場合に限ります。

This warranty is valid only in Japan.

※以下につきましては、必ず歯科医院にて、記入捺印していただいでください。

販売名

オムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B570T

ご芳名

ご住所

TEL

()

お買い上げ歯科医院

住所

TEL

()

お買い上げ年月日

年

月

日

発売元

オムロン ヘルスケア株式会社

〒617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪53番地



製品のお問い合わせ、替えブラシ以外の別売品のご注文、修理のご依頼は

オムロン ヘルスケア お客様サポート

<http://www.healthcare.omron.co.jp/support/>

オムロン お客様サービスセンター

TEL 0120-30-6606（通話料無料）受付時間9：00～19：00（祝日を除く月～金）

〒515-8503 三重県松阪市久保町1855-370