

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書にしたがった正常な使用状態で、お買い上げ後1年以内に故障した場合には無償修理または交換いたします。
- 無償保証期間内に故障して修理を受ける場合は、オムロンお客様サービスセンターにご連絡ください。
- 無償保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷。
 - (ニ) 品質保証書の提示がない場合。
 - (ホ) 品質保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - (ヘ) 消耗部品。
 - (ト) 故障の原因が本商品以外に起因する場合。
 - (チ) その他取扱説明書に記載されていない使用方法による故障および損傷。
- 品質保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- 品質保証書は本規定に明示した期間、条件のもとにおいて無償保証をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 補修用部品は製造打ち切り後、最低5年間保有しています。

品質保証書

このたびは、オムロン商品をお買い求めいただきありがとうございます。商品は厳重な検査をおこない高品質を確保しております。しかし通常のご使用において万一、不具合が発生したときは、保証規定によりお買い上げ後、1年間は無償修理または交換いたします。

※商品の保証は、日本国内での使用の場合に限ります。
This warranty is valid only in Japan.

※以下につきましては、必ず販売店にて、記入捺印して
いただいでください。

販売名 オムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B601

ご芳名

ご住所

TEL ()

お買い上げ店名

住所

TEL ()

お買い上げ年月日 年 月 日

発売元

オムロンヘルスケア株式会社


〒617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪53番地



取扱説明書

オムロン 音波式電動歯ブラシ

HT-B601
メディクリン
Mediclean

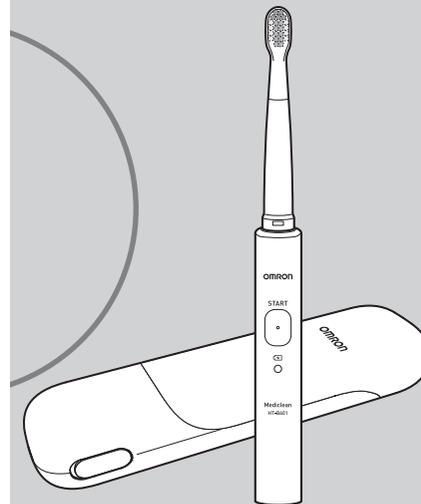

目次

ご使用の前に

- 安全上のご注意 1
- 次のものが入っていますか? ... 4
- 各部の名前とはたらき 5
- 充電する 7
- ご使用される前に 9

使い方とお手入れ

- 準備する 10
- 使い方 11
- 使い終わったら 12
- お手入れと保管 13

困ったときに・保証など

- おかしいな?と思ったら 15
- 仕様 16
- 別売品について 17
- 廃棄するときのお願い 18
- 保証規定/品質保証書 裏表紙

- このたびは、オムロン商品をお買い上げいただきましてありがとうございました。
- 安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
- 本書はいつもお手元においてご使用ください。
- 本書は品質保証書を兼ねています。紛失しないよう保管してください。
- 本書に記載しているイラストはイメージ図です。

オムロン健康商品のお問い合わせは

修理のご用命、別売品・消耗部品のお求めも、この電話で承ります。修理には、便利な引き取りサービスをご利用ください。



オムロンお客様サービスセンター **ダイヤルは正確に**

むろんオムロン

電話 **0120-30-6606** 通話料無料

FAX **0120-10-1625** 通話料無料

受付時間

9:00~19:00 月~金（祝日を除く）
都合によりお休みをいただいたり、
受付時間帯を変更させていただく
ことがありますのでご了承ください。

ホームページ <http://www.healthcare.omron.co.jp/>

※通話料はお客様ご負担となります。（別売品・消耗部品は、インターネットでもお求めいただけます。）

All for Healthcare

安全上のご注意

お使いになる前に
必ずお読みください。

- ここに示した内容は、商品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や、他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。
- 表示と意味は次のようになっています。

警告、注意について



警告
誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示します。



注意
誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容を示します。

* 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

図記号の例



必ず守る

●記号は強制（必ず守る）を示します。
(上図は“必ず守る”)



禁止

○記号は禁止（してはいけない）を示します。
(上図は“禁止”)



次の方は使用しないでください。または使用を歯科医にご相談ください。

口内の感覚が敏感な方／口腔または歯周手術の直後や治療中の方／口腔内に気になる症状（治療中の歯、不安定な入れ歯など）のある方／歯ぐきからの出血が続く、または大量の出血がある方
・症状を悪化させたり、けがの原因になります。



必ず守る

乳幼児の手の届かないところに置いてください。また、お子様だけのご使用は避けてください。

・けがの原因になります。

ブラシは複数の人で共用しないでください。

・病原菌に感染する原因になります。



禁止

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100-240 V 以外では使用しないでください。

・タコ足配線などにより定格を超えると、火災の原因になります。



ACアダプタ／USBケーブルは付属品を使用してください。また、他の商品には使用しないでください。

・火災や故障の原因になります。

傷んだACアダプタ／USBケーブルは使用しないでください。

・感電やショート、発火の原因になります。

モバイルケース／ACアダプタは水洗いしないでください。また、水につけたり水をかけたりしないでください。

・感電の原因になります。

本体は廃棄のとき以外は絶対に分解しないでください。

・けがや故障の原因になります。

本体／モバイルケース／ACアダプタ／USBケーブルは浴室内などの水のかかる場所で使用しないでください。

・感電や故障の原因になります。

ぬれた手でACアダプタ／USBケーブルを抜き差ししないでください。また、ACアダプタ／USBケーブルを差すときに、モバイルケース／ACアダプタ／USBケーブルがぬれていないか確認してください。

・感電やけがの原因になります。



本体を廃棄するときは、取り外した充電地の ⊕ ⊖ 端子やコードの切断部分にセロハンテープやシールなどを貼り付けてください。

・ショートにより、火災の原因になります。

ACアダプタ（特にプラグ部）のほこりはふき取ってください。

・ほこりに湿気が加わると、感電やショート、発火の原因になります。

ACアダプタはコンセントにしっかり根元まで差し込んでください。

・感電やショート、発火の原因になります。

ACアダプタを抜き差しするときは、ACアダプタを持って抜き差ししてください。また、USBケーブルを抜き差しするときは、ケーブルを引っ張らず、コネクタ部を持って抜き差ししてください。

・USBケーブルの断線やショートにより、火災や感電の原因になります。

USBケーブルの取り扱いは以下の項目に注意してください。

傷つけない／破損させない／加工しない／無理に曲げたり、引っ張らない／ねじらない／使用時は束ねない／重い物を載せない／挟み込ませない

・感電や火災、故障の原因になります。



禁止



分解禁止



水場禁止



ぬれ手禁止



必ず守る

ご使用の前に

ご使用の前に

⚠️ 注意

モバイルケースをお手入れするときは、USBケーブルを抜き、USBコネクタカバーを閉じてください。

・感電やけがの原因になります。



必ず守る

1週間以上ご使用にならないときは、ACアダプタをコンセントから抜き、USBケーブルをモバイルケースとACアダプタから抜いてください。

・絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

充電するときは、付属のモバイルケース以外は使用しないでください。

・充電池が発熱し発火や感電、故障の原因になります。

歯や歯ぐきにブラシを強く押しあてたり、毛先以外のプラスチック部分をあてないでください。また、長時間同じ箇所をみがかないでください。

・歯や歯ぐきに損傷を与えたり、故障の原因になります。また、毛先が広がりブラシの劣化が早くなります。



禁止

人以外に使用しないでください。

・事故やトラブルの原因になります。

本体／モバイルケース／ACアダプタを踏んだり落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。

・けがや故障の原因になります。

自分で意思表示ができない人には使用しないでください。

・事故やトラブルの原因になります。

充電池を火の中に入れてください。

・破裂してけがなどの原因になります。

お願い

歯みがき以外の目的には、使用しないでください。

充電中、モバイルケースを金属の板（鉄など）の上に置かないでください。

・充電効率が落ちたり、消費電流が増加します。

ヤニ取り用・美白用などの歯みがき粉は、研磨剤により歯を研磨する作用が大きいといわれています。歯や歯ぐきを傷める原因になりますのでおすすめできません。ご使用の場合は、歯科医にご相談ください。

ブラシと本体の間にあるゴム部を傷つけないでください。



・内部に水が入り、故障の原因になります。


次のものが入っていますか？

箱の中には次のものが入っています。万一、不足のものがありましたら、オムロンお客様サービスセンター（☎電話 0120-30-6606）までご連絡ください。

1. 本体




2. モバイルケース

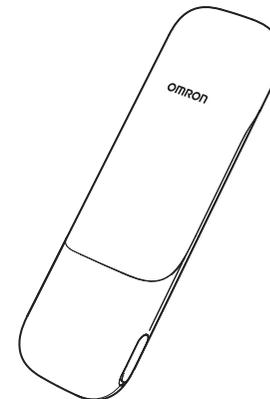


3. トリプルクリアブラシ (1本)



4. ACアダプタ

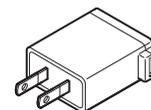

5. USBケーブル

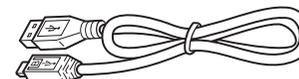

6. 取扱説明書（本書：品質保証書付き）

各部の名前とはたらき

本体

歯みがき時間 ナビタイマー機能

30秒ごとに一時停止し、
歯みがき時間の経過をお知らせします。
(☞9ページ)

スタートスイッチ


押すたびにモードが切り替わります。

モード選択

通常のクリーンモードと、音と振動を軽減した静音モードが選択できます。
(☞11ページ)

充電お知らせランプ


充電中 : 点灯
充電完了 : 消灯
充電お知らせ : 点滅

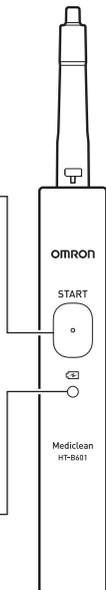

ブラシ

トリプルクリアブラシ

3種類の植毛の力で、効果的に歯垢を除去します。

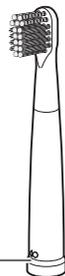


カラーブラシリング

※1台の本体を共有される場合、ブラシを区別できるように使用していただくものです。
※付属のブラシには乳白色のリングが付いています。別売品のブラシをお求めいただくと他の色のリングが付いています。(☞17ページ)

※ブラシは消耗部品です。
毛先が開いてきたら交換時期です。別売品をお求めください。(☞17ページ)


ACアダプタ (充電用)

コンセントで充電するとき 사용합니다。
(☞7ページ)

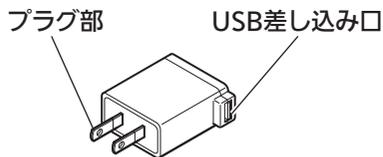

USB ケーブル (充電用)

ACアダプタまたはパソコンで充電するとき 사용합니다。(☞7ページ)

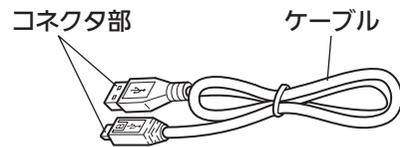


※ACアダプタ/USBケーブルは付属品を使用してください。また、他の商品には使用しないでください。


モバイルケース (充電機能付き)

充電時と収納時に使用します。
(☞『充電する』7ページ)
(☞『使い終わったら』12ページ)

※充電中はカバーを閉じてください。

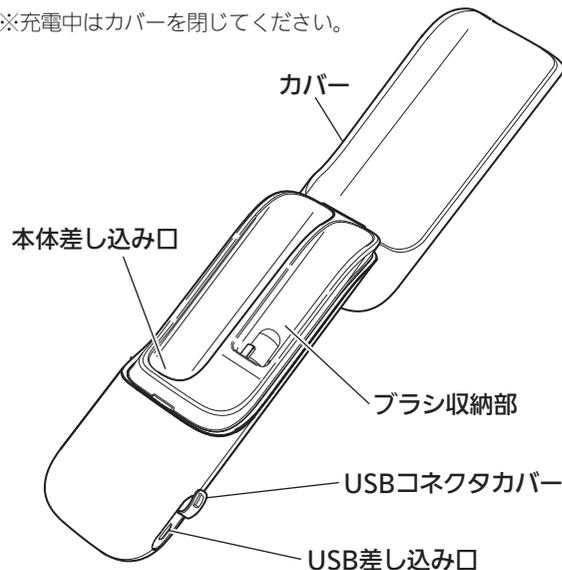


収納例

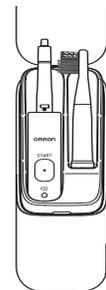


※本体とブラシは図のように収納してください。

充電するときの接続例 (☞『充電する』7~8ページ)

ACアダプタでコンセントから充電する場合

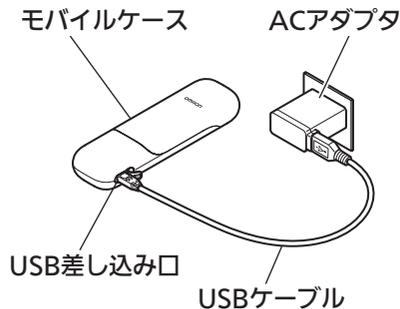


パソコンで充電する場合

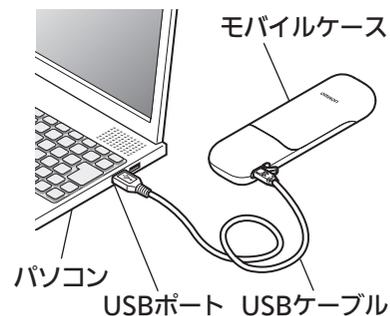


充電する

使いはじめ（購入直後や長時間放置したとき）や使用中に動作が停止したときには、必ず約10時間または、充電お知らせランプが消灯するまで充電してください。

1 本体をモバイルケースの本体差し込み口に差し込み、カバーを閉じる

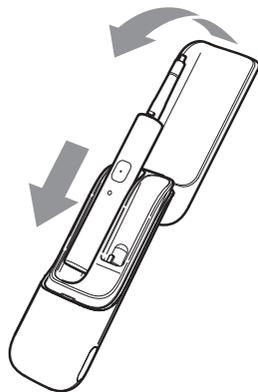


2 モバイルケースのUSBコネクタカバーを開いてUSBケーブルを接続する

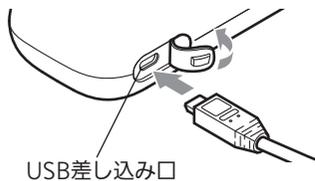

USB差し込み口

ACアダプタでコンセントから充電する場合


- ① ACアダプタにUSBケーブルを差し込む
- ② ACアダプタをコンセントに接続する

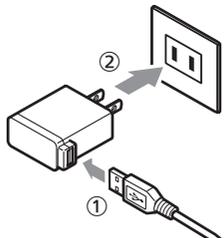

パソコンで充電する場合

USBケーブルをパソコンのUSBポートに接続する

※DC5.0V 500mAが供給できるUSBポートを搭載したパソコンに接続してください。

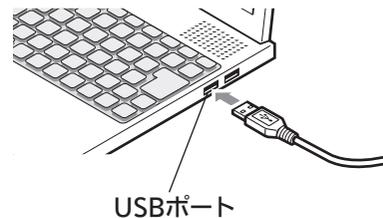

USBポート

充電お知らせランプが点灯して、充電が開始されます。



充電お知らせランプ
充電中 : 点灯
充電完了 : 消灯

※満充電までには、約10時間の充電が必要です。

※充電環境や充電残量により、10時間以内に充電が完了する場合があります。

※充電残量が少なくなると、充電お知らせランプが点滅しますので、すぐに充電してください。

※充電中に本体とモバイルケースが少しあたたかくなることがありますが、異常ではありません。

<充電時の注意事項>

- ・ 本体はモバイルケースの奥までしっかり差し込んでください。
- ・ 感電を避けるため、水のかかる場所（洗面台や浴室など）で充電しないでください。
- ・ 充電中はモバイルケースのカバーを閉じてください。
- ・ 付属品以外のACアダプタ/USBケーブルは使用しないでください。
- ・ USBハブを用いて接続すると充電できないことがあります。
- ・ 充電時以外は、ACアダプタをコンセントから抜いてください。
- ・ USBケーブルを抜いた後は、モバイルケースのUSBコネクタカバーを確実に閉じてください。

ご使用される前に

準備する

歯みがき時間ナビタイマー機能


電源を入れてから、30秒ごとに一時停止し、歯みがき時間の経過をお知らせする機能です。

効果的なみがき方

歯垢を効果的に落とすには、口中のそれぞれの部位を同じ時間、同じ順序でブラッシングすることが大切です。歯みがき時間ナビタイマーの活用をおすすめします。

※モードを切り替えても、タイマーは引き続きカウントされます。

【みがき方例】

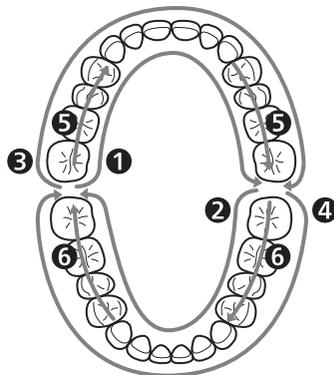

上あごの奥から下あごの奥へと順にみがきます。

※左右どちらから始めても効果は同じです。

■ブラシをあてる強さは…


歯や歯ぐきに毛先だけが軽く触れるようにあててください。

※ブラシを強く押し当てすぎると、歯や歯ぐきに損傷を与えたり、故障の原因になります。また、毛先が広がりブラシの劣化が早くなります。

■ブラシの動かし方は…

1〜2歯ずつブラシをゆっくり往復させてください。

歯面やかみ合わせ面

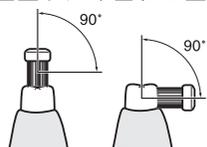

歯に対してブラシを90°にあててください。

歯と歯ぐきの境目



毛先が歯ぐきの溝に入るよう45°に傾けてください。

前歯の裏や歯並びの悪いところ




歯ブラシをタテにあて、歯面に沿って1本ずつみがいてください。

1 ブラシを本体に差し込む

ブラシ凹部と本体凸部を合わせながら差し込みます。

※ブラシ凹部と本体凸部を合わせないと、固定できません。無理に差し込むとブラシが破損する場合があります。

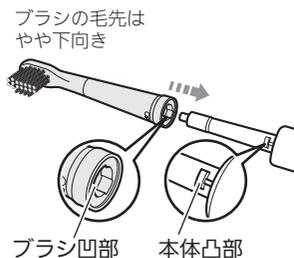


2 ブラシと本体を固定する

ブラシを矢印の方向に固定されるまで軽く回します。

※固定されたところ以上に回さないでください。無理に回すと破損する恐れがあります。

※取り外すときは、矢印の逆方向に回してから抜いてください。

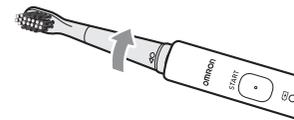

使い方とお手入れ

ご使用の前に

1 口の中にブラシを入れる

- ※毛先を水で湿らせると効果的です。
- ※歯みがき粉を使用される場合は、研磨剤が含まれない一般的なものを少量付けてください。
- ※飛び散りを防ぐために、口の中にブラシを入れてからスタートスイッチを押してください。
- ※個人差はありますが、初めてご使用になる際、独特な刺激を感じる場合があります。
これは音波式電動歯ブラシ特有の音波振動によるものです。




2 スタートスイッチを押してモードを選ぶ

スタートスイッチを押すたびにモードが切り替わります。



- **クリーンモード** …… 通常の歯みがきに。
- **静音モード** …… 歯みがき中の音が気になるときに。
※クリーンモードと比較して、音と振動を軽減しています。

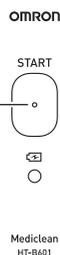

3 みがき終わったら、スタートスイッチを押して電源をOFFにする

※飛び散りを防ぐために、ブラシを口の中に入れていた状態で電源をOFFにしてください。

オートパワーオフ機能

動作開始から約3分で自動停止します。

1 ブラシを本体から外す

- ブラシを矢印の方向に軽く回して、ブラシを本体から引き抜きます。
- ※強く回しすぎないでください。無理に回すと破損する恐れがあります。




2 ブラシを水で洗う

水洗い後は水気をよく切ってください。

3 本体とブラシをモバイルケースに収納する

- ※乾いたやわらかい布で本体の水気をふき取ったあと、モバイルケースに差し込んでください。
- ※モバイルケースに水気や汚れが付着した場合は、乾いたやわらかい布でふき取ってください。

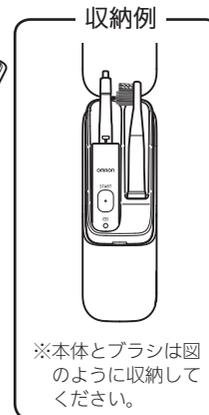

※本体とブラシは図のように収納してください。

お手入れと保管

ここに記載している注意事項、その他の正しい使用方法をお守りいただけない場合は、品質に責任を負いかねます。

お手入れについて

- 本体／モバイルケースはいつも清潔にしてお使いください。
歯みがき粉が付着した状態で放置すると、本体／モバイルケースの表面が劣化する場合があります。
本体の汚れは、先端部に力をかけないようにして、流水で軽く洗い流してください。
- モバイルケース／ACアダプタに水や汚れが付着した場合は、すぐにふき取ってください。
※水や汚れは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。
※汚れがひどいときは、水または薄めた中性洗剤をしみこませた布をかたく絞ってふき取り、やわらかい布でからぶきしてください。
- モバイルケースの本体差し込み口は、いつもきれいにしてお使いください。
底部に汚れが付着すると、充電機能が低下する場合があります。
※汚れがふき取りにくい場合は、水をしみこませた綿棒のようなものでふき取ってください。
- ブラシを装着する際、固く感じたときやブラシ内部が汚れている場合には、ぬるま湯にしばらくつけて、やわらかい綿棒のようなもので汚れをふき取ってください。

■ お手入れ時のお願い

- モバイルケースをお手入れするときは、USBケーブルを抜き、USBコネクタカバーを閉じてください。
- ACアダプタをお手入れするときは、ACアダプタをコンセントから抜いてください。
- 本体／モバイルケース／ACアダプタ／USB差し込み口の内部に水などが入らないようにしてください。
- 本体／ブラシをアルコールに浸したり、熱湯（40℃を超える湯）で消毒しないでください。
- 消毒液をつけた布でふかないでください。
- 汚れを落とすとき、ベンジン、シンナー、エタノールなどを使用しないでください。



保管について

次のようなところに保管しないでください。

- 水のかかるところ
 - 高温、多湿、直射日光、ほこり、塩分などを含んだ空気の影響を受けるところ
 - 傾斜、振動、衝撃のあるところ
 - 化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生するところ
- 乳幼児の手の届かないところに置いてください。

おかしいな?と思ったら

こんなとき	原因	対処のしかた
ブラシの動作がガタつく	ブラシが本体に正しく取り付けられていない	ブラシを正しく取り付けてください (P.10)
動かない、ブラシの振動が遅い	充電電池の残量が減っている	モバイルケースに差し込んで充電してください (P.7) このとき、モバイルケースのカバーが確実に閉じていることを確認してください
本体とモバイルケースがあたたかい	商品の特性上少しあたたかくなる	故障ではありません また本商品の寿命にも影響ありません
使用後に本体をモバイルケースに差し込んでも充電お知らせランプが点灯しない	ACアダプタがコンセントに接続されていない	正しく接続されていることを確認してください (P.7)
	USBケーブルがきちんと接続されていない	正しく接続されていることを確認してください (P.7~8) モバイルケースからいったん外し、もう一度差し込んでください (P.7) このとき、モバイルケースのカバーが確実に閉じていることを確認してください それでも充電お知らせランプが点灯しない場合は、オムロンお客様サービスセンターに修理を依頼してください (裏表紙)
	モバイルケースに本体が正しく差し込まれていない	モバイルケースからいったん外し、もう一度差し込んでください (P.7) このとき、モバイルケースのカバーが確実に閉じていることを確認してください それでも充電お知らせランプが点灯しない場合は、オムロンお客様サービスセンターに修理を依頼してください (裏表紙)
	パソコンの電源が入っていない	パソコンの電源を入れてください
充電しても使用可能時間が短い、動かない ブラシの振動が遅い	使いはじめ（購入直後や長時間放置したとき）や使用中に動作が停止したときには約10時間、または充電お知らせランプが消えるまで充電してください (P.7~8) このとき、モバイルケースのカバーが確実に閉じていることを確認してください	
	寒い場所でのご使用は、使用可能時間が短くなることがあります 充電電池の寿命が考えられますが、充電電池の交換はできません 本体の廃棄をお願いします (P.18)	
本体をモバイルケースから外したときに充電お知らせランプが点滅する	もう一度モバイルケースに差し込んで充電してください (P.7) このとき、モバイルケースのカバーが確実に閉じていることを確認してください	

こんなとき	対処のしかた
10時間以上充電しても充電お知らせランプが消えない	オムロンお客様サービスセンターに修理を依頼してください (裏表紙)

※上記の方法でも直らない場合は、オムロンお客様サービスセンターまでお問い合わせください。(裏表紙)

仕様

販売名	オムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B601
商品型式名	HT-B601-W / HT-B601-BK / HT-B601-B / HT-B601-PK
ACアダプタ	定格入力: AC100-240 V 50-60 Hz 10 VA 定格出力: DC5.0 V 500 mA
モバイルケース定格	DC5.0 V 150 mA
消費電力	10VA (充電時: ACアダプタ)
充電方式	電磁誘導方式
使用電池	ニッケル水素電池 (Ni-MH 2.4 V)
充電時間	約10時間 (室温23℃にて)
連続使用時間	約30分 室温23℃で満充電後、クリーンモードで使用したとき (100g負荷時) オートパワーオフ約3分 ・充電電池の特性として、充電を繰り返すたびに1回の使用時間は次第に短くなります。満充電しても使用時間が購入後はじめてのご使用時に比べて著しく短くなったら電池の寿命です。 ・電池は交換できません。寿命がきたら電池および商品の廃棄をお願いします。
モード	クリーンモード、静音モード
振動数	クリーンモード : 約25,500回/分 (無負荷時) 静音モード : 約21,000回/分 (無負荷時)
使用環境温湿度	+5~+35℃、30~85% RH
保管環境温湿度	-20~+60℃、10~95% RH
質量	本体: 約46g (ブラシ含む)、モバイルケース: 約100g、ACアダプタ: 約65g
外形寸法	本体 : 全長約195 (ブラシ含む) ×幅約18.5×奥行約18.5 mm モバイルケース: 幅約52×高さ約18.1×奥行約31 mm ACアダプタ : 幅約45×高さ約55×奥行約25 mm
USBケーブルの長さ	約50 cm
付属品	トリプルクリアブラシ (1本)、モバイルケース (1台)、ACアダプタ (1台)、USBケーブル (1本)、取扱説明書 (品質保証書付き)

※お断りなく仕様を変更する場合がありますので、ご了承ください。

別売品について

別売品のお求めは、オムロンお客様サービスセンター（☎電話 0120-30-6606）までお問い合わせください。
次の別売品をご用意しています。


・ブラシ

品名	型式	品名	型式
トリプルクリアブラシ (2本)	SB-070	ダブルメリットブラシ (1本)	SB-050
極細マイルドブラシ (2本)	SB-080	歯ぐきマッサージブラシ (1本)	SB-060
すぎ間みがきブラシ (2本)	SB-090		

※ブラシの種類によっては、振動が変化する場合がありますが故障ではありません。

・ACアダプタ


型式 HT-B601-AC

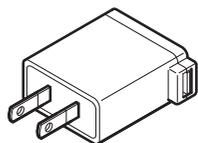

※本商品に付属しているものと同じです。

・USBケーブル

型式 HHX-CABLE-USB3W

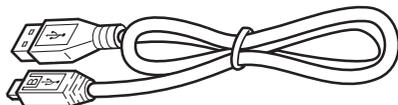

※本商品に付属しているものと同じです。

廃棄するときのお願い

本体に使用しているニッケル水素電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。
本体を廃棄するときは、ニッケル水素電池の残量をなくしたあと取り外して、お買い上げの販売店またはニッケル水素電池のリサイクル協力店へお持ちください。



充電電池の取り出し方


修理用の手順ではありません。
分解した場合には修復は不可能です。

※完全に動作しなくなることを確認してから分解してください。
※分解するときは、マイナスドライバーなど先端の細いものを使用してください。

1 ブラシを本体から外す

2 本体からカバー（リング状）とラバー部品（半透明）を取り外す

ラバー部品（半透明）は、切りかき部分にマイナスドライバーを挿入して取り出してください。

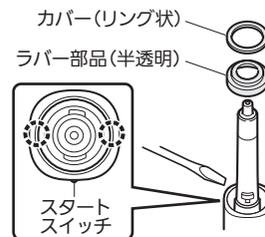


3 本体にブラシを取り付ける

4 ブラシを90°回転させ(①)、引き抜く(②)

5 インナーケースの先端部を持ち、ゆっくり引き出す

6 充電電池を取り出し、両側のコードを切断する

ショートを防ぐために、取り外した充電電池の⊕⊖端子やコードの切断部分にセロハンテープやシールなどを貼ってください。

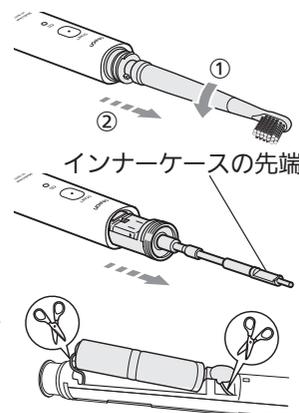

※充電電池は粘着力が強いテープで貼り付けられています。

<廃棄時の注意事項>

- ・充電電池の液漏れや発熱によるやけどには充分注意してください。
- ・部品の角などで、けがをしないように充分注意してください。
- ・本体/モバイルケース/ACアダプタ/USBケーブルの廃棄方法は、お住まいの各都道府県や市区町村の指導に従ってください。

困ったときに・保証など

困ったときに・保証など