


オムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B907

Mediclean メディクリーン

取扱説明書

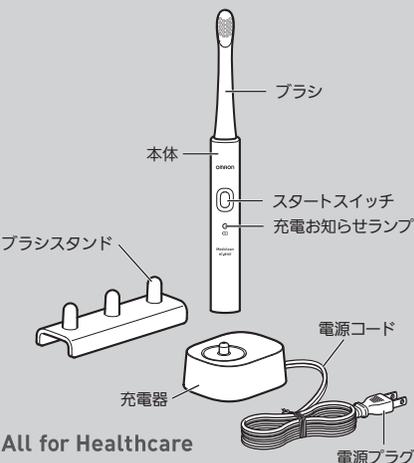

All for Healthcare

使用法は裏面をご参照ください。

■このたびは、オムロン製品をお買い上げいただきましてありがとうございました。

■安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

■本書はいつもお手元においてご使用ください。

■本書は品質保証書を兼ねています。紛失しないように保管してください。

■記載しているイラストはイメージ図です。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で、お買い上げ後1年以内に故障した場合には無償修理または交換いたします。
 - 無償保証期間内に故障して修理を受ける場合は、オムロンお客様サービスセンターにご連絡ください。
 - 無償保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
 - 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷。
 - 品質保証書の表示がない場合
 - 品質保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合、消耗部品
 - 故障の原因が本製品以外に起因する場合
 - その他取扱説明書に記載されていない使用方法による故障および損傷。
4. 品質保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
 5. 品質保証書は本規定に明示した期間、条件のもとにおいて無償保証をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
 6. 補修用部品は製造打ち切り後、最低5年間保有しています。

品質保証書

このたびは、オムロン製品をお買い求めいただきありがとうございました。製品は厳重な検査を行い品質を確保しております。しかし通常のご使用において万が一、不具合が発生したときは、保証規定によりお買い上げ後、1年間は無償修理または交換いたします。
 ※製品の保証は、日本国内での使用の場合に限ります。 ※以下につきましては、必ず販売店にて、記入捺印していただきたいと思います。
 This warranty is valid only in Japan.

販売名 オムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B907	お買い上げ店名
ご芳名	住 所
ご住所	TEL ()
TEL ()	お買い上げ年月日 年 月 日

発売元
オムロンヘルスケア株式会社
〒617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪53番地

製品のお問い合わせ、別売品や消耗部品の求め、修理のご依頼

オムロンお客様サービスセンター
 TEL 通話料無料 0120-30-6606 (受付時間 朝9時～夜9時)
 FAX 通話料無料 0120-10-1625 (9:00～19:00)
 〒515-8503 三重県松阪市久保町1855-370
 ホームページ http://www.healthcare.omron.co.jp/
 通話料はおお客様ご負担となります。(別売品・消耗部品は、インターネットでもお求めいただけます。)

9701944-9A

安全上のご注意 お使いになる前に必ずお読みください。

- ここに示した内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や、他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。
- 表示と意味は次のようになっています。

警告、注意について	
<p>警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示します。</p>	<p>注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容を示します。</p>

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

図記号の例	
●記号は強制(必ず守る)を示します。(左図は“必ず守る”)	○記号は禁止(してはいけない)を示します。(左図は“禁止”)

警告	
<p>次の方は使用しないでください。または使用前に歯科医にご相談ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■口内の感覚が敏感な方 ■口腔または歯周の手術の直後や治療中の方 ■口腔内に気になる症状(治療中の歯、不安定な入れ歯など)のある方 ■歯茎からの出血が続く、または大量の出血がある方 <p>・傷口を悪化させたり、けがの原因になります。</p> <p>ブラシは乳幼児の手の届かないところに置いてください。お子様だけでのご使用は避けてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・乳幼児、お子様のけがの原因になります。 <p>ブラシは複数の人で共用しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・病原菌に感染する原因になります。 <p>コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流 100-110 V 以外では使用しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・たこ足配線などにより定格を超えると、火災の原因になります。 <p>傷んだ電源コードや電源プラグは使用しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・感電やショート、発火の原因になります。 	<p>!</p> <p>!</p> <p>!</p> <p>!</p>

<p>充電器を水洗いしないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・感電の原因になります。 <p>本体は廃棄のとき以外は絶対に分解しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・けがや故障の原因になります。 <p>本体や充電器は浴室内などの水のかかる場所で使用しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・感電や故障の原因になります。 <p>ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・感電やけがの原因になります。 	<p>!</p> <p>!</p> <p>!</p> <p>!</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

注意	
<p>本体を廃棄するときは、取り外した充電電池の⊕⊖端子にセロハンテープやシールなどを貼り付けてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ショートにより、火災の原因になります。 <p>電源プラグのほごりは拭き取ってください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ほごりに湿気が加わると、感電やショート、発火の原因になります。 <p>電源プラグはしっかり根元まで差し込んでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・感電やショート、発火の原因になります。 <p>電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らず、電源プラグを持って抜いてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・電源コードの断線やショートにより、火災や感電の原因になります。 <p>電源コードの取り扱いには以下の項目に注意してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■傷つけない ■破損させない ■加工しない ■無理に曲げたり、引っ張らない ■ねじらない ■使用時は束ねない ■重い物や物を載せない ■挟み込ませない <ul style="list-style-type: none"> ・感電や火災、故障の原因になります。 	<p>!</p> <p>!</p> <p>!</p> <p>!</p>

1 週間以上ご使用にならないときは電源プラグを抜いてください。
 ・絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

充電器のお手入れの前には、電源プラグを抜いてください。
 ・感電やけがの原因になります。

注意(続き)

<p>専用の充電器以外は使用しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・充電電池が発熱し発火や感電、故障の原因になります。 <p>歯や歯茎にブラシを強く押し当てたり、毛先以外のプラスチック部分をあてないでください。また、長時間同じ箇所を磨かないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・歯や歯茎に損傷を与えたり、故障の原因になります。 <p>人以外に使用しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事故やトラブルの原因になります。 <p>本体や充電器を踏んだり、落としたり、強い衝撃を与えないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・けがや故障の原因になります。 <p>自分で意思表示ができない人は使用しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事故やトラブルの原因になります。 <p>充電電池を火の中に入れてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・破裂してけがなどの原因になります。 	<p>!</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

お願い	
<p>歯みがき以外の目的には、使用しないでください。</p> <p>充電器を鉄板など金属板の上で使用しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・充電効率が悪くなり、消費電流が増加します。 <p>研磨剤が入っていない一般的な歯磨き粉を使用してください。ヤニ取り用・美白用などの歯みがき粉は、研磨剤により歯を研磨する作用が大きいため、歯や歯茎を傷める原因になりますのでお勧めできません。ご使用の場合は、歯科医にご相談ください。</p> <p>個人差はありますが、初めてご使用になる際、独特な刺激を感じる場合があります。これは音波式電動歯ブラシ特有の音波振動によるものです。</p> <p>ブラシと本体の間にあるゴム部を傷つけないでください。内部に水が入り、故障の原因になります。</p>	<p>!</p> <p>!</p> <p>!</p> <p>!</p>

仕様 ※お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

販売名	オムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B907	充電方式	電磁誘導方式
商品型式名	HT-B907	使用電池	ニッケル水素電池 (Ni-MH 2.4 V)
電圧	AC100-110 V 50/60 Hz	消費電力	約 1 W (充電時)
消費電力	約 1 W (充電時)	充電時間	約 10 時間 (室温 23 °Cにて)
連続使用時間	約 30 分 (室温 23 °Cにて満充電後 100 g 負荷時)	オートパワーオフ約 3 分	
モ ー ド	クリーンモード: 通常の歯みがきに使用するモード		
振 動 数	約 25,500 回/分 (無負荷時)		
使用環境温湿度	+5~+35 °C、30 ~ 85 % RH		
保管環境温湿度	-20~+60 °C、10 ~ 95 % RH		
質 量	本体: 約 46 g (ブラシ含む)、充電器: 約 115 g		
寸 法	本体: 全長約 195 (ブラシ含む) × 幅約 18.8 × 奥行約 18.8 mm 充電器: 幅約 51 × 高さ約 35.5 × 奥行約 63 mm ブラジスタンド: 幅約 96 × 高さ約 27 × 奥行約 30 mm		
電源コードの長さ	約 120 cm		
付 属 品	極細スパイラルブラシ (1 本)、充電器 (1 台)、ブラジスタンド (1 台)、取扱説明書 (品質保証書付き)		

別売品について

ブラシは消耗部品です。毛先が開いてきたら交換時期です。別売品をお求めください。別売品の求めは、オムロンお客様サービスセンター (☎電話 0120-30-6606) までお問い合わせください。

品 名	型 式	品 名	型 式
トリプルクリアブラシ (2 本)	SB-072	すき間みがきブラシ (2 本)	SB-092
極細マイルドブラシ (2 本)	SB-082	極細スパイラルブラシ (2 本)	SB-032

※本製品に対応するブラシの詳細については、裏面「■替えブラシ(タイプ2)について」をご参照ください。

準備しましょう

充電する

使い初め(購入直後や長時間放置したとき)や使用中に動作が停止したときには、必ず約10時間充電してください。

※充電中に本体と充電器が少しあたたかくなることがありますが、異常ではありません。

1 電源プラグをコンセントに接続する

2 本体を充電器に置く

※充電環境や充電残量により、10時間以内に充電が完了する場合があります。



ブラシを取り付ける

1 ブラシを本体に差し込む

■替えブラシ(タイプ2)について

トリブルクリアブラシ SB-072

極細マイルドブラシ SB-082

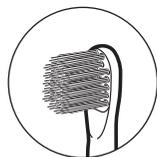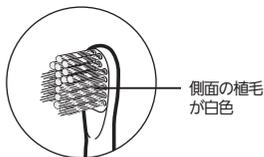


らせん状の「スパイラル毛」、歯周ポケットに届く「W メリット毛」、4つの角で歯垢を除去する「ひし形毛」の3種類の植毛で歯垢を除去します。

1穴に約150本の「極細毛」が歯面の凹凸や歯のすき間の歯垢を、「W メリット毛」が歯周ポケットの歯垢をかき出します。

すき間みがきブラシ SB-092

極細スパイラルブラシ SB-032

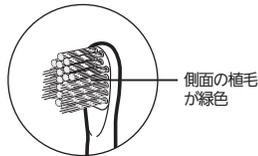


歯並びが悪くて磨きづらいところや歯と歯の間などを1カ所ずつピンポイントで磨くことができます。

らせん状の「極細スパイラル毛」の表面の凹凸が、歯の表面に付着したステイン®を効果的にかきとります。

※ステイン：歯の表面に付着した着色汚れ

※本製品には、タイプ2の替えブラシをご利用ください。

※ブラシの種類によっては、振動が変化する場合がありますが故障ではありません。

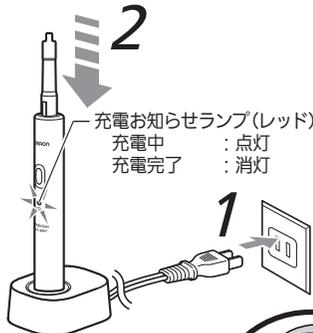

2
充電お知らせランプ(レッド)
充電中 : 点灯
充電完了 : 消灯



使ってみましょう

1 口の中にブラシを入れる

※毛先を水で湿らせると効果的です。
※一般的な歯みがき粉を少量付けてください。
※飛び散りを防ぐために、口の中にブラシを入れてからスタートスイッチを押してください。

2 スタートスイッチを押す

ブラシが振動します。
※ブラシを歯に軽くあて、横方向に移動させながら磨いてください。

3 磨き終わったら、スタートスイッチを押して電源を切る

※電源を入れてから約3分で自動的に電源が切れます。もう一度電源を入れると、さらに3分間磨くことができます。



使い終わったら

1 本体からブラシを真すぐ引いて外す

2 外したブラシを水で洗う

※水洗い後は水気を切ってブラシスタンドに立ててください。

3 本体を拭く

※本体の汚れは乾いたやわらかい布で汚れを拭き取ってください。また、本体を水洗いするときは、ブラシと本体の間にあるゴム部を傷つけないでください。ゴム部に傷がつくと、本体内部に水が入り、故障の原因となります。

4 本体を充電器に置く



お手入れと保管

■お手入れについて

本体/充電器はいつも清潔にしてお使いください。汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。汚れがひどいときは、水または薄めた中性洗剤をしみこませた布をかたく絞って拭き取り、やわらかい布でからぶきしてください。

＜お手入れのお願い＞

- 充電器をお手入れするときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本体内部に水などが入らないようにしてください。
- 消毒液をつけた布でふかないでください。
- 本体/ブラシをアルコールに浸したり、熱湯(40℃を超える湯)で消毒しないでください。
- 汚れを落とすとき、ベンジン、シンナー、エタノールなどを使用しないでください。

■保管について

次のようなところに保管しないでください。
水のかかるところ/傾斜、振動、衝撃のあるところ/化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生するところ/高温、多湿、直射日光、ほこり、塩分などを含んだ空気の影響を受けるところ
乳幼児、お子様の手の届かないところに置いてください。
※上記の注意事項、その他の正しい使用方法をお守りいただけない場合は、品質に責任を負いかねます。




上手なみがき方

＜ブラシのあて方＞

ブラシの毛先が歯や歯茎に触れるように軽くあててください。

＜ブラシの動かし方＞

手磨きのように動かさず、1、2歯ずつ横方向に移動させながら磨いてください。

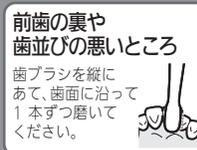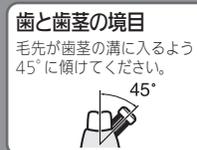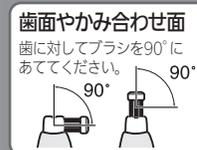

おかしいな?と思ったら

こんなとき	原因	対処のしかた
ブラシの動作がガタつく	ブラシが本体に正しく取り付けられていない	ブラシを正しく取り付けてください(「」「」)
動かない、ブラシの振動が遅い	充電電池の残量が減っている	充電器に置いて充電してください(「」「」)
本体と充電器があたたかい	製品の特性上少しあたたかくなる	故障ではありません また本製品の寿命にも影響ありません
使用後に本体を充電器に置いて充電お知らせランプが点灯しない	電源プラグがコンセントに接続されていない 本体を充電器に正しく置いていない	正しく接続されていることを確認してください(「」「」)
		充電器からいったん外し、もう一度置いてください(「」「」)
		それでも充電お知らせランプが点灯しない場合は、本体の故障が考えられます。オムロンお客様サービスセンターに修理を依頼してください
	充電が完了している	充電電池が満充電になると、充電お知らせランプが消灯します

充電しても使用可能時間が短い、ブラシの振動が遅い

約10時間充電しても使用可能時間が短い、ブラシの振動が遅い

充電お知らせランプが消えない

※上記の方法でも直らない場合は、オムロンお客様サービスセンターまでお問い合わせください。

廃棄するときのお願い

本体に使用しているニッケル水素電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。本体を廃棄するときは、ニッケル水素電池の残量をなくしたあと取り外して、お買い上げの販売店またはニッケル水素電池のリサイクル協力店へお持ちください。



※スタートスイッチを押しても本体が動作しなくなるまで、充電電池を使いきってください。

充電電池の取り出し方

修理用の手順ではありません。分解した場合には修復は不可能です。

1 ブラシを本体から外す

2 本体からカバー(リング状)とラバー部品(半透明)を取り外す

ラバー部品(半透明)は、切りかき部分にマイナスドライバーを挿入して取り出してください。

3 本体にブラシを取り付ける

4 ブラシを90°回転させ(①)、引き抜く(②)

※ステムが外れなかったときは、ステムを手で引き抜いてください。

5 インナーケースの先端部を持ち、ゆっくり引き出す

6 インナーケースの2カ所(③、④)を切断する

※切断するときは、はさみ、ニッパーをご使用ください。

7 充電電池の両側の金具(⑤、⑥)を切断する

※取り外した充電電池の端子には、電池のショートを防ぐために、セロハンテープやシールなどを貼ってください。
※充電電池の液漏れや発熱によるやけどに十分注意してください。
※部品の角などで、けがをしないように十分注意してください。
※本体および充電器の廃棄方法は、お住まいの市区町村の指導に従ってください。

