


オムロン充電式口腔洗浄器 エレピック

OMRON

ELEPIC

HT-J14

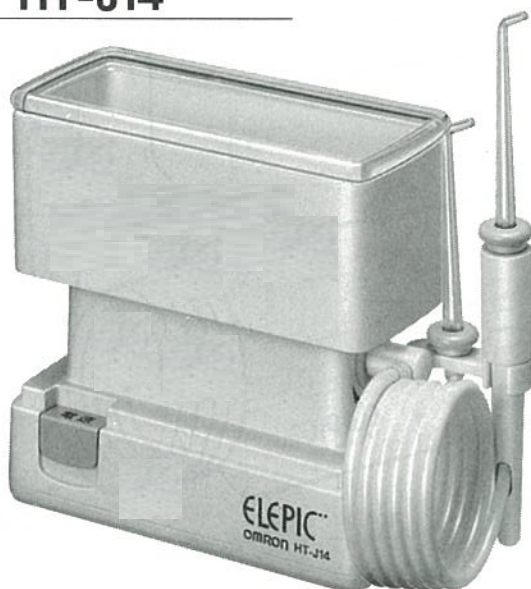

取扱説明書

●このたびはオムロン充電式口腔洗浄器エレピックをお買い上げいただきましてありがとうございます。


●ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みください。

●保証書を兼ねていますのでお読みになったあとも大切に保管してください。

■目次

各部の名称	1P
エレピックの特長	2P
充電のしかた	3・4P
ご使用方法	5～7P
ご使用上の注意	8～10P
お手入れのしかた	10P
仕様	11P
アフターサービスについて	11P
保証規定／品質保証書	

各部の名称

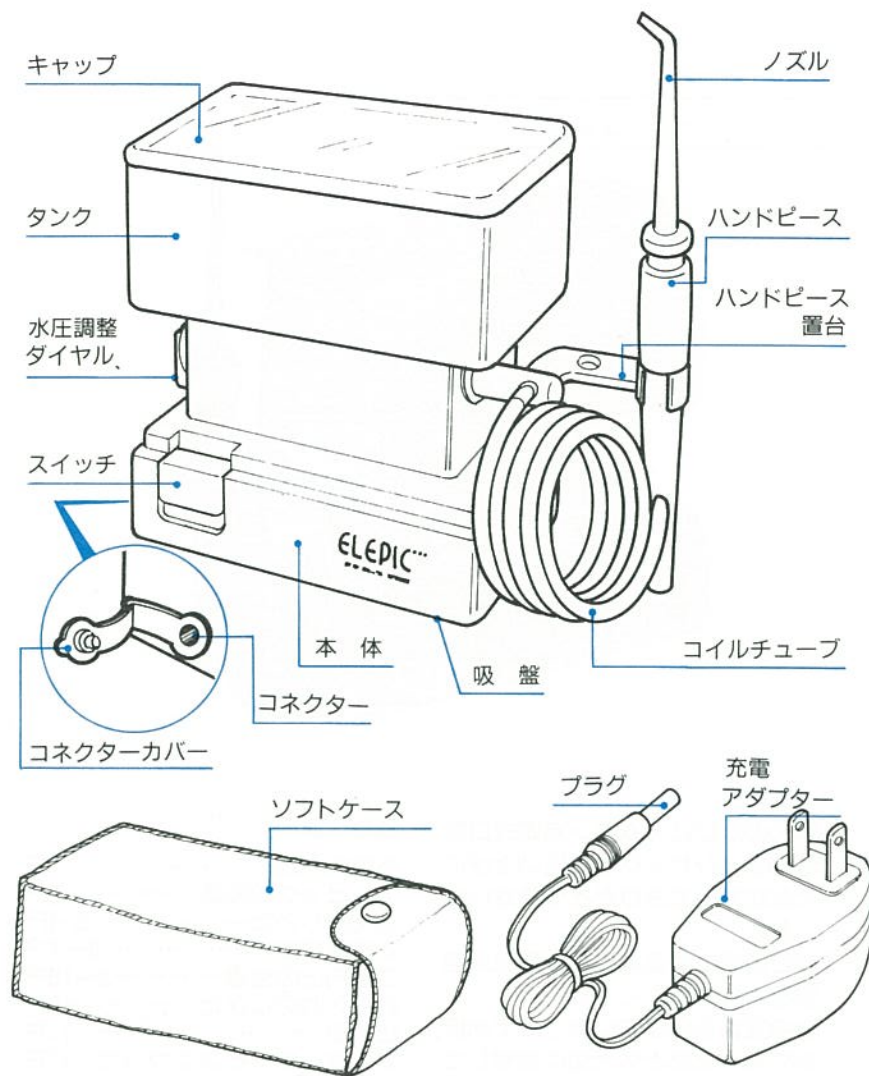


エレピックの特長

1 電源のないところでもお使いになれる、携帯用としても便利です。



2 ジェットパルス水流が歯ブラシの届かない歯の間や、歯と歯ぐき間の食べカスを取り除き歯をきれいにすると同時に歯ぐきの健康により適度な刺激をあたえます。

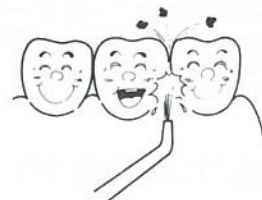

3 口の中の雑菌を洗い流し、自分では気が付きにくい口臭も取り除けます。




4 歯ブラシと併用してお使いになれば、より効果的です。




充電のしかた

お買い求めの時や、長期間お使いにならなかった場合は充電してからご使用ください。

- 1 本体のコネクターカバーの栓を開けます。

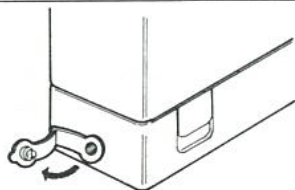

- 2 充電アダプターのプラグを本体のコネクターに差し込み、充電アダプターをAC100Vのコンセントにしっかり差し込みます。

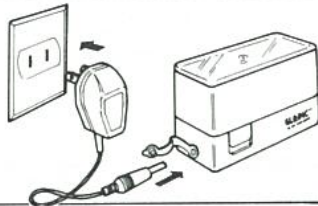


- 3 充電時間は、完全放電状態で約8時間です。
●使用時間は1回1分お使いになるとして、約8回使えます。



■充電上の注意

電池寿命は使用条件によっても異なりますが約500回の充電で使用できなくなります。

8時間以上充電してもすぐに動かなくなる場合は、蓄電池の寿命が尽きたものと考えられます。お買い上げの販売店で修理をご依頼ください。(有償交換)

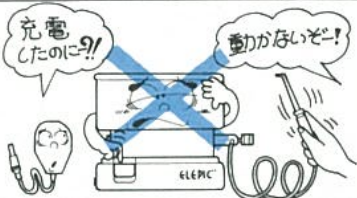

2日以上連続充電はしないでください。蓄電池が劣化する原因となります。



0°C以下や直射日光の当たる場所、また暖房器具など発熱体の近くでの充電はさけてください。



高温多湿の場所での保管はさけてください。




濡れた手では、絶対に充電の操作はしないでください。感電の恐れがあります。




必ず、平らな場所に置いてお使いください。

1. 充電アダプターをコンセントから、プラグをコネクターからそれぞれ抜きます。


●プラグを差したままでは使用できません。

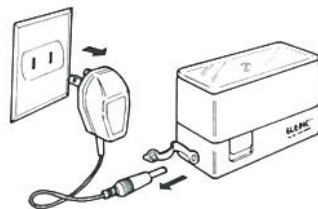


2. コネクターカバーの栓をします。

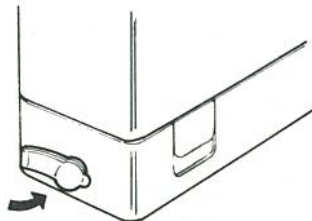

3. タンクを取り、コイルチューブを本体にセットします。

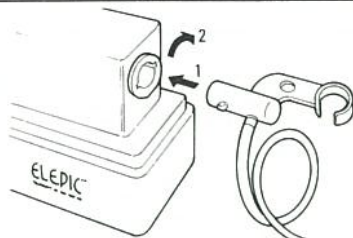

4. ノズルをハンドピースに取り付けます。

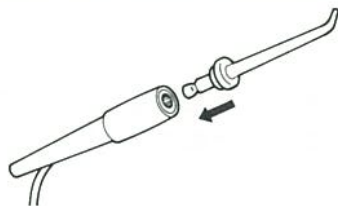

5. タンクに水またはぬるま湯（40℃以下）を入れます。

●虫歯などで冷水がしみる方は、ぬるま湯をお勧めします。




6. 本体にタンクを取り付けます。

●取り付けが不十分ですと、水が正常にでません。




7. ノズルを洗面器などに向け、水圧調整ダイヤルを「弱」に合わせ、スイッチを押す約5～6秒間水を出し、スイッチを押して一度切ります。

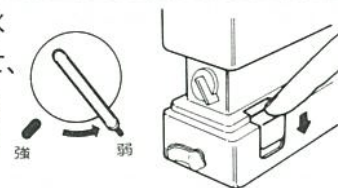

8. 図のような姿勢でノズルを口に入れて、スイッチを押します。

●ノズルの先端が歯に触れない程度に近づけます。ノズルを歯や歯ぐきに接触させて使用すると、水流効果が低下します。

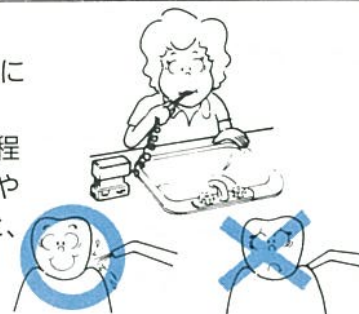


9. 水圧調整ダイヤルを好みの強さに調整します。


●いきなり強い水圧でお使いになりますと、歯ぐきを痛めたり、出血の原因となります。

ご使用方法

10. ノズルをゆっくり歯並びにそって移動させ、歯の表裏、噛み合わせ面をくまなく洗浄します。特に歯と歯の間、歯と歯グキの間の食べカスのたまりやすい箇所はていねいに洗浄します。

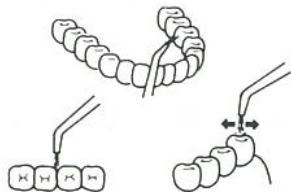


11. 歯グキをマッサージする場合は、水圧を「弱」に調整し歯と歯グキの間や歯グキに水流をあてます。

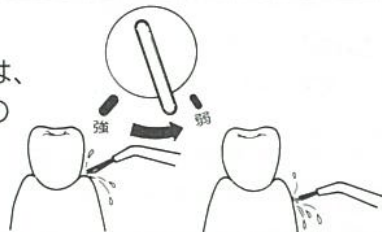

12. お口の中に水またはぬるま湯がいっぱいになりましたら、洗面台に流します。




13. 洗浄が終わりましたら、スイッチを押して電源を切ります。

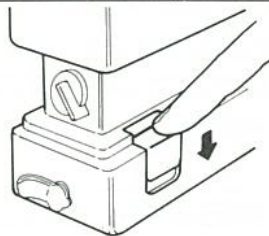


●タンクいっぱいの水は、約1分でなくなります。（「強」の場合）

ご使用上の注意 必ずお守りください

1. タンクに水が入っていない状態で作動させないでください。

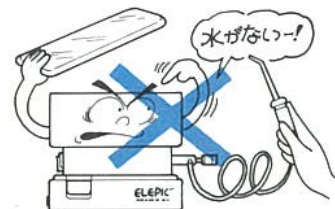

2. タンクの中に、40℃以上の湯、塩水、歯みがき粉、消毒液、うがい薬などの薬品を絶対に入れないでください。故障や、変形の原因にもなります。

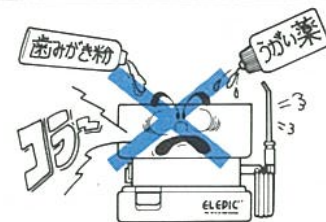

3. 歯グキの病気の方や、歯の治療を受けている方は、歯科医にご相談のうえ、ご使用ください。

4. 洗浄中にノズルを目、鼻、耳、のどなどに向けないでください。水圧が高いので危険です。特にお子様がお使いになる時は、正しい使いかたを教えてあげてください。



5. 使用中に落下することのないよう、本体は確実に設置してください。



6. 0℃以下のところでは、使用後タンクを外し、ノズルの先から水がでなくなるまで作動させ水を完全に 抜いて保管してください。



7. 万一、凍結した場合はタンクにぬるま湯を入れて暖かい室内で自然にとけるのを待ってください。熱湯を入れたり、火気の近くで暖めたりしないでください。



8. 使用中、本体下部より漏水した場合は直ちに使用を中止し、修理を依頼してください。

9. 使用後は本体、タンクなど水にぬれた部分は、乾いた布で拭き取るなどして、水気をよく取ってください。




10. 使用中、やや大きな運転音がしますが、故障ではありません。

11. 本体・充電アダプターを水洗いしないでください。




12. タンクに水が入っている場合は、電源がOFFの状態でもハンドピースをタンクより低い所に置くとノズルから水が出る場合がありますのでご注意ください。

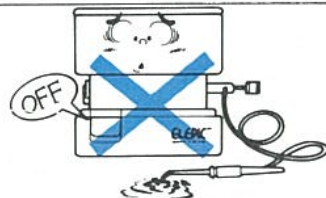

13. 本体を水の張った所に置いて使用しないで下さい。本体内部に水が入り故障の原因となります。



14. 充電アダプターを水に濡らすと、漏電や故障の原因となりますので濡らさないようにご注意ください。

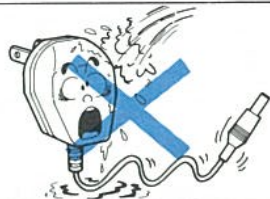

お手入れのしかた

タンク、ノズル、ハンドピースの汚れは、本体から外して水洗いして水気をよく拭き取ります。

本体の汚れは中性洗剤または水で湿らせた布で落とし、乾いた布で水気をよく拭き取ります。ベンジン、シンナーなど揮発性のものや化学ぞうきんで拭きますと、変色や変形の原因となりますので、ご使用にならないでください。

●直射日光のあたる場所をさけ、衛生的に保管してください。



仕 様

本 体

電 圧：DC2.4V
 圧力負荷荷重(最大)：約8g
 (水圧調整ダイヤル「強」のとき)
 洗浄水流パルス数：約1200回/分
 使用可能時間：8分
 (20℃8時間充電時)
 使用温湿度範囲：0℃～40℃
 30%RH～85%RH
 保存温湿度範囲：-10℃～60℃
 30%RH～95%RH
 タンク容量：200cc
 コイルチューブ長さ：90cm

外形寸法：高さ120×幅120
 ×奥行き55mm
 収納時高さ80mm

重 量：280g
 付属品：ソフトケース
 充電アダプター、ノズル
 2本

充電アダプター

定格入力：AC100V 50/60Hz
 定格出力：DC 2.6V 100mA
 型式認可番号：▽91-16447
 外形寸法：高さ40×幅44×奥行き
 68mm
 重 量：約160g

★オムロン電動歯ブラシも合わせてお使いください。

アフターサービスについて

不審な点、故障の場合は、内部機構をさわらずに、お買い上げの
 販売店に遠慮なくご相談ください。なお、修理を依頼される前に、
 充電アダプターを抜き、次の点をお確かめください。

症状	点 検 項 目	対 策
水 圧 が 出 な い ま た は	●ノズルの穴がつまっていますか →	穴を掃除してください。
	●タンク底部の穴がつまっていますか →	穴を掃除してください。
	●凍結していませんか →	自然にとけるのを待ってください。
	●本体とコイルチューブ取付部から水が漏れていませんか →	コイルチューブをしっかり装着してください。
	●タンクが本体に確実に取り付けられていますか →	正しくセットしてください。
	●プラグがコネクターに差し込まれていませんか →	プラグを抜いてスイッチを入れてください。
	●電池が放電していませんか →	充電してください。