

## 保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書にしたがった正常な使用状態で、お買い上げ後1年以内に故障した場合には無償修理いたします。
  - 無償修理期間内に故障して修理を受ける場合は、オムロンお客様サービスセンターにご連絡ください。
  - 無償修理期間内でも次の場合には有償修理になります。
    - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
    - (ロ) お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
    - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷。
  - (二) 本書の提示がない場合。
  - (ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
  - (ヘ) 消耗部品（ブラシ、充電電池）。
  - (ト) 故障の原因が本製品以外に起因する場合。
  - (チ) その他取扱説明書（本書）に記載されていない使用方法による故障および損傷。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
  - この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
  - 補修用部品は製造打ち切り後、最低5年間保有しています。

### 品質保証書

このたびは、オムロン健康機器を、お買い求めいただきありがとうございます。本機は厳重な検査を行ない高品質を確保しております。しかし通常のご使用において万一、不具合が発生しましたときは、保証規定によりお買い上げ後、一年間は無償修理いたします。

※本機の保証は、日本国内での使用の場合に限ります。  
This warranty is valid only in Japan.

※以下につきましては、必ず販売店にて、記入捺印していただく。

品名	オムロン音波式電動歯ブラシ
形式	HT-B400
ご芳名	
ご住所	
TEL	( )
お買い上げ店名	
住 所	
TEL	( )
お買い上げ年月日	年 月 日


発売元

オムロンヘルスケア株式会社

〒615-0084 京都府京都市右京区山ノ内山ノ下町24



## 取扱説明書

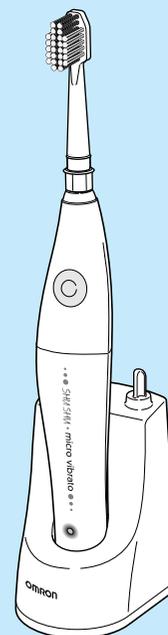

- このたびは、オムロン音波式電動歯ブラシをお買い上げいただきましてありがとうございます。
- 安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
- 本書はいつもお手元においてご使用ください。
- 本書は品質保証書を兼ねています。紛失しないように保管してください。

商品に関するお問い合わせは

オムロンお客様サービスセンター ダイヤルは正確に

電話 **0120-30-6606** 通話料無料

FAX **0120-10-1625** 通話料無料

受付時間 9:00~19:00（祝日を除く月~金）  
（都合によりお休みさせていただくことがあります。）

# OMRON

## オムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B400

### ご使用の前に

安全上のご注意	1
商品の特長と構成	4
各部の名前	5
充電について	6

### 使い方

使い方	7
しょうずなみがき方	8

### 困ったときに・保証など

お手入れと保管	9
おかしいな?と思ったら	10
お問い合わせ先	11
仕様	12
別売品について	12
廃棄するときは	13
保証規定/品質保証書	裏表紙

# 安全上のご注意

お使いになる前によくお読みください

- ここに示した警告サインと図記号の例は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や、他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。
- 表示と意味は次のようになっています。

警告サイン	内容
 <b>警告</b>	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 <b>注意</b>	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容を示します。

\*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

## 図記号の例

	△記号は注意(警告・危険を含む)を示します。 具体的な注意内容は、△の中や近くに文章や絵で示します。 左図の場合は、“感電注意”を示します。
	⊘記号は禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、⊘の中や近くに文章や絵で示します。 左図の場合は、“分解禁止”を示します。
	●記号は強制(必ず守ること)を示します。 具体的な強制内容は、●の中や近くに文章や絵で示します。 左図の場合は、“一般的な強制”を示します。

## 警告

本体に内蔵されている充電電池から漏れた液が目に入ったり、皮膚や衣服に付着したりした場合は、こすらずにすぐ流水で洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。

- そのままにすると、失明の原因になったり皮膚に障害が発生したりする恐れがあります。とくに廃棄するときには注意してください。

本機をご使用になり出血が続く場合、または、大量の出血がある場合は、歯科医にご相談ください。

- 歯周病以外のほかの病気が考えられます。

口腔または歯周手術を受けて間もない方や現在治療中の方は、本機の使用を歯科医にご相談ください。

- ブラッシングの刺激により、傷口を悪化させる恐れがあります。



## 警告

充電しないときは、充電台の電源プラグをコンセントから抜いてください。  
●感電や故障の原因になります。

充電台のお手入れをするときや、電源プラグを抜くときは、コードを持たずに電源プラグを持って引き抜いてください。  
●感電や漏電、火災の恐れがあります。

万一、充電台の電源コードが破損した場合は、すぐに電源プラグをコンセントから抜いてください。  
●そのまま使い続けると、火災や感電の原因になります。

十分に充電したにも関わらず、ご使用中に動作しない場合には、ただちにスイッチを切って、使用を中止してください。  
●そのまま使い続けると、火災や感電の原因になります。

充電台の電源コードを傷つけたり、加工したりしないでください。また、電源コードに重いものをのせたり、強く引っ張ったり、無理に折り曲げないでください。また、束ねたまま使用しないでください。  
●電源コードが破損して火災や感電、故障の原因になります。

表示された電源電圧（100～120V、50/60Hz）以外では使用しないでください。  
●火災・感電、故障の原因になります。

本機を廃棄するとき以外は絶対に分解しないでください。  
●発火したり、故障や事故の原因になります。

充電台は浴室など水のかかる場所には置かないでください。  
●感電や故障の原因になります。

本体や充電台を水中に浸けないでください。  
●感電や故障の原因になります。

濡れた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししないでください。  
●感電の原因になります。



つづく

## 安全上のご注意

### ⚠️ 注意

必ずブラシの毛先だけが歯または歯肉に当たるようにご使用ください。  
・毛先以外の部分が当たると歯または歯肉が傷つく恐れがあります。

近くで雷が発生したときは、充電台の電源プラグをコンセントから抜いてください。

・火災や感電、故障の原因になります。

自分で意思表示できない人や小さなお子様は本機を使用しないでください。また、自分で意思表示できない人や小さなお子様の本機を使用させないでください。

・事故やトラブルの恐れがあります。

歯にブラシを強く押しあてないでください。

・歯肉に損傷を与える恐れがあります。また、故障の原因になります。

本体や充電台を踏んだり、落としたり、強い衝撃を与えないでください。  
・ケガや故障の原因になります。

本体や充電台は、ぐらついた台の上や傾いたところ、すべりやすいところなど、不安定な場所に設置しないでください。

・事故やケガをしたり、故障の原因になります。

小さなお子様の手が届くところに設置しないでください。

・事故やケガの原因になります。



### お願い

歯みがき以外の目的には、使用しないでください。

充電台を鉄板など金属板の上で使用しないでください。充電効率が落ちたり、消費電流が増加します。

## 商品の特長と構成

### ■ 28,000回/分のブラッシング効果を体感

手のブラッシングと同じような感覚で、手ではみがけなかった部分まで、きれいにみがくことができます。

### ■ 経済的な充電式電池、長時間使用ができます

1回の満充電で約40分\*連続使用できます。

\*室温23℃にて満充電後250g負荷時

\*充電電池の劣化により減少します。

箱の中には次のものが入っています。


万一、不足のものがありましたら、オムロンお客様サービスセンター

(☎電話 0120-30-6606) までご連絡ください。

本体

充電台

ブラシ

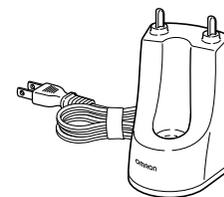


※消耗部品です。

※内蔵している充電電池は消耗部品です。

取扱説明書 (本書)  
(品質保証書付き)

## 各部の名前

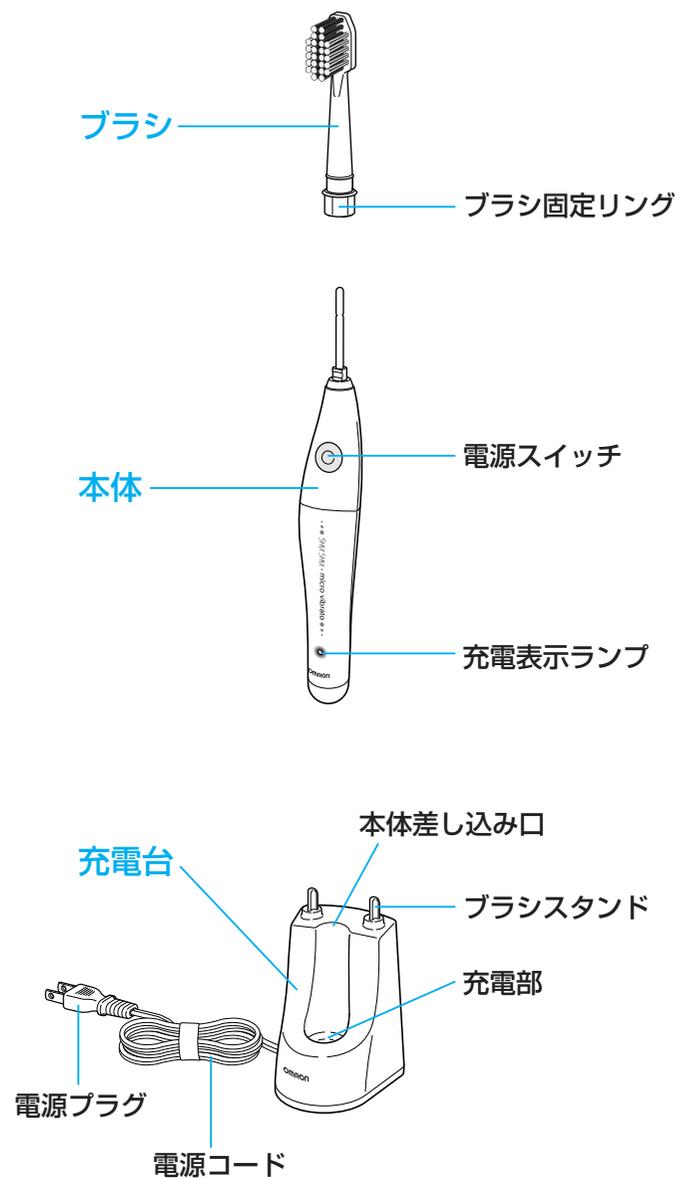


## 充電について

購入後はじめて使用するとき・長期間充電しなかったとき・使用中に動作が停止したときは16時間以上充電をおこなってください。

※充電中に本体と充電台が少しあたたかくなることがありますが、異常ではありません。

### 1. 充電台の電源プラグをコンセントに接続する

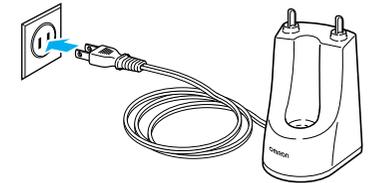


### 2. 本体を充電台に差し込む

充電表示ランプが点灯し、充電が開始されます。

※充電が完了しても充電表示ランプは点灯したままです。

※充電するときは、必ず電源スイッチを切ってから充電してください。

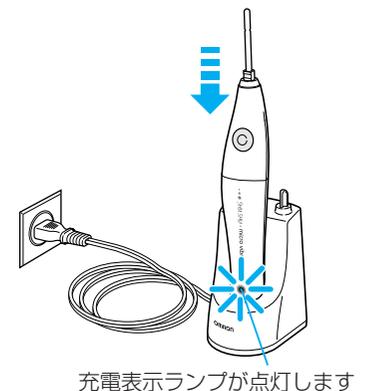

# 使い方


本体にブラシを取り付けてからご使用ください。

## 1. ブラシを本体に差し込む

① ブラシ固定リングをブラシ側に動かし、ブラシの向きを電源スイッチの向きと図のように合わせ、差し込みます。

※向きを合わせないで無理に挿入するとブラシが破損する場合があります。

② ブラシ固定リングを電源スイッチ側に、ブラシが抜けないようにしっかり固定します。

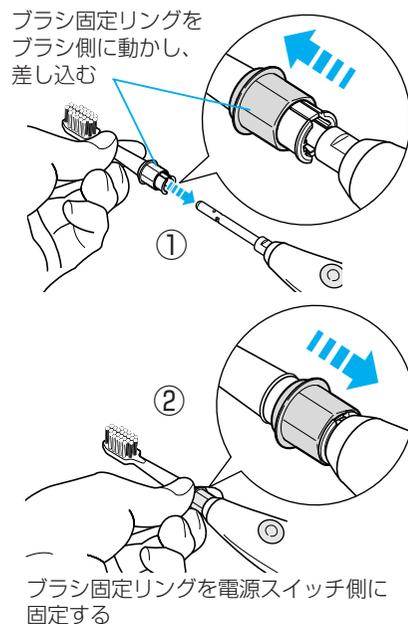

## 2. 口の中にブラシを入れる

※毛先を水で湿らすと効果的です。

※飛び散りを防ぐために、動作させる前にブラシを口の中に入れてください。



## 3. 電源スイッチを強く押す

※誤作動を防ぐため、強く押さないと電源が入らないようになっています。




## 4. みがき終わったら、口の中にブラシを入れたまま電源スイッチを強く押す




## 5. ブラシを本体から外す

ブラシ固定リングをブラシ側に動かし、本体から外します。

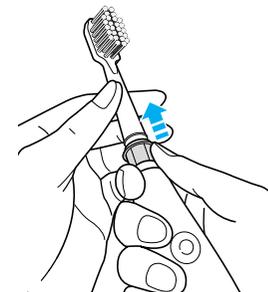

## 6. ブラシを水洗いし、水気を取った後ブラシスタンドに差し込む

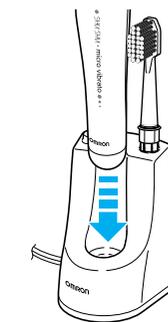


## 7. 本体の水気を乾いたやわらかい布で拭き取り、充電台に差し込む

### じょうずなみがき方

ブラシを2~3歯ずつあて、次の歯に移動させてブラッシングします。

歯ぐきをブラッシングするときは、ブラシを歯に対し45°に傾けてあてます。毛先は歯ぐきのミゾに軽くあててブラッシングします。

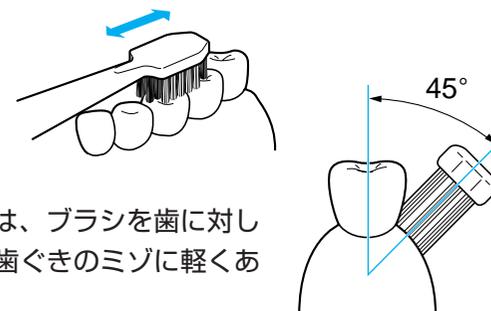

# お手入れと保管

## 本体・充電台

いつも清潔にしてお使いください。

- ・汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
- ・汚れがひどいときは、水または中性洗剤をやわらかい布にしみこませ、よく絞ってから拭き取ってください。汚れを拭き取った後、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。  
※充電台をお手入れするときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。  
※内部に水などが入らないようにしてください。

## お手入れと保管の注意



- ・汚れを落とすとき、ベンジン、シンナー、ガソリン、化学ぞうきんなどを使用しないでください。
- ・金属製のたわしや硬いスポンジなどは使用しないでください。傷がつき、故障の原因となります。
- ・次のようなところに保管しないでください。
  - ・水のかかる場所。
  - ・高温・多湿、直射日光、ホコリ、塩分などを含んだ空気の影響を受けるところ。
  - ・傾斜、振動、衝撃のある場所。
  - ・化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生する場所。
- ・乳幼児の手の届かないところに置いてください。

※上記の注意事項、その他の正しい使用方法をお守りいただけない場合は、品質に責任を負いかねます。

# おかしいな?と思ったら

こんなとき	考えられる原因	直しかた
ブラシの動作がガタつく	本体に正しくセットしていない	→ 正しくセットしてください (👉 7ページ)
動かない	充電電池の容量が減っている	→ 充電台にセットして充電してください (👉 6ページ)
本体と充電台があたたかい	充電中は少しあたたかくなります	→ 故障ではありません。また商品の寿命にも影響ありません
充電表示ランプが消えない	充電中、充電表示ランプは電池の容量にかかわらず、常に点灯します	
充電表示ランプが点灯しない	電源スイッチが入っている	→ 電源スイッチをもう一度押して切ってください
充電しても使用可能時間が短い	充電時間が短い	→ 16時間以上充電してください (👉 6ページ)
		→ 次の方法で回復する場合があります。「充電→停止するまで作動」を2~3回繰り返してください それでも使用可能時間が短いときは、充電電池の寿命です。充電電池の交換はオムロンお客様サービスセンターにご依頼ください (👉 11ページ)

※上記の方法でも、直らない場合はオムロンお客様サービスセンターまでお問い合わせください。(👉 11ページ)

# お問い合わせ先

## 修理を依頼する前に

10ページ「おかしいな?と思ったら」をご確認ください。

それでも直らないときは、下記のオムロンお客様サービスセンターにお問い合わせください。



商品は別売品は

修理・商品に関するお問い合わせ

別売品・消耗部品のお求めは

### オムロンお客様サービスセンター



修理は

電話 **0120-30-6606** 通話料無料

FAX **0120-10-1625** 通信料無料

受付時間 9:00～19:00 (祝日を除く月～金)  
(都合によりお休みさせていただくことがあります。)

別売品・消耗部品は、インターネットでもお求めいただけます。

### オムロンインターネットパーツセンター

<http://shop.healthcare.omron.co.jp>

24時間受け付けています。(通信料、送料はお客様ご負担となります。)



オムロン健康機器ホームページ「健康プラザ」のご案内

ホームページでは新製品情報や健康に関するさまざまな情報をお届けしています。

あなたの健康づくりに役立つアドバイスやヒントが満載です。  
別売品や消耗部品もご注文いただける便利なホームページです。  
ぜひ、一度ご覧ください。

<http://www.healthcare.omron.co.jp>

※通信料はお客様ご負担となります。

# 仕様

名称	オムロン音波式電動歯ブラシ
形式	HT-B400
電源電圧	AC100～120V 50/60Hz
消費電力	約2W (充電時)
充電方式	電磁誘導方式
使用電池	ニッケル水素電池1個 (Ni-MH1.2V1700 mAh)
充電時間	16時間
連続使用時間	約40分* (室温23℃にて満充電後250g負荷時)
振動数	約28,000回/分 (無負荷時)
外形寸法	本体: 約35×33×272mm (ブラシ含む) 充電台: 約68×70×119mm
質量	本体: 約170g (ブラシ含む)、充電台: 約240g
付属品	ブラシ (1本)、取扱説明書 (品質保証書付き)

※お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

\*充電電池の特性として、充電を繰り返すたびに1回の使用時間は次第に短くなります。  
満充電しても使用時間が購入後はじめてのご使用時に比べて著しく短くなったら電池の寿命です。

## 別売品について

別売品のお求めは

お買い上げの販売店またはオムロンお客様サービスセンター  
までお問い合わせください。(11ページ)

品名	型式
シュシュ マイクロビブラート専用スペアブラシ	SB-400

# 廃棄するときは

本機に使用しているニッケル水素電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。


本機を廃棄するときは、ニッケル水素電池を取り外し、お買い上げの販売店またはニッケル水素電池のリサイクル協力店へお持ちください。



## 本機の分解のしかた

### 1. 電源スイッチを押し、歯ブラシが動かなくなるまで放置する

充電電池を放電させます。

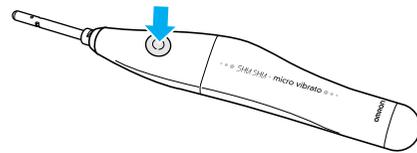


### 2. 本体底面蓋を外す

① 本体底面のねじを矢印方向に回し、ねじを外します。

② 底蓋を引き、取り外します。

※一度でもねじを取り外すと、弊社の保証対象外になります。廃棄するとき以外は絶対にねじを取り外さないでください。

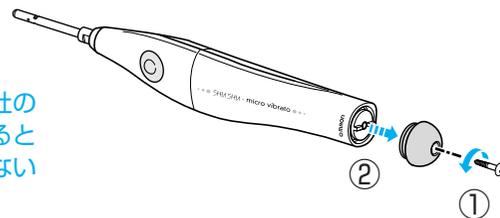

### 3. コイル部を取り出す

① ペンチなどの工具を使用して、突起部を左一杯、止まるまで回します。

② 手前に引くとコイル部が取り外せます。

※コイル部は固く固定してありますので、力を入れて手前に引いてください。



### 4. 充電電池を取り外す



① コイル部と充電電池を接続しているコードをペンチなどで切断します。

② 充電電池を取り外します。

※充電電池からの液漏れや発熱によるやけどに、十分注意してください。

※部品のかどなどでケガをしないように十分注意してください。

※取り出した電池の+-端子をショートさせないように注意してください。

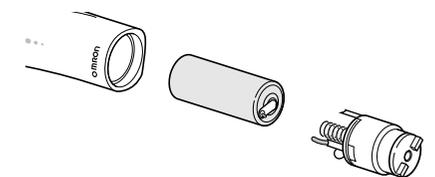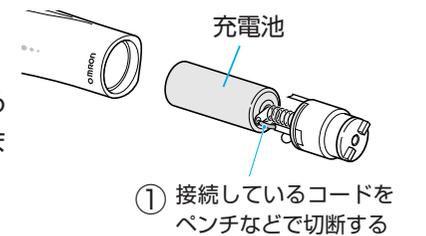

修理用の手順ではありません